

ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE UTILIZARE

Aparat cosmetic multifuncțional Giovanni 6 în 1 Ashe
Super Bubble cu generator de hidrogen



Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026



Scanează pentru
diferit
limbi




Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru viitor.

Inovatorul **aparat cosmetic multifuncțional Giovanni 6-în-1 Ashe Super Bubble** combină șase tehnologii eficiente de îngrijire, asigurând rezultate eficiente ale tratamentelor cosmetice. Aparatul, conceput pentru îngrijirea completă a pielii, oferă funcții avansate care asigură o stare optimă a acesteia. Aparatul multifuncțional Giovanni 6w1 Ashe Super Bubble este o soluție excelentă pentru saloanele de înfrumusețare, permițând extinderea semnificativă a ofertei de tratamente efectuate.

Date tehnice	
Vid	≤ 24 L
Presiune	≤ 400 kPa
Putere	60 W
Alimentare	220–240 V, 50 Hz

Descrierea aparatului

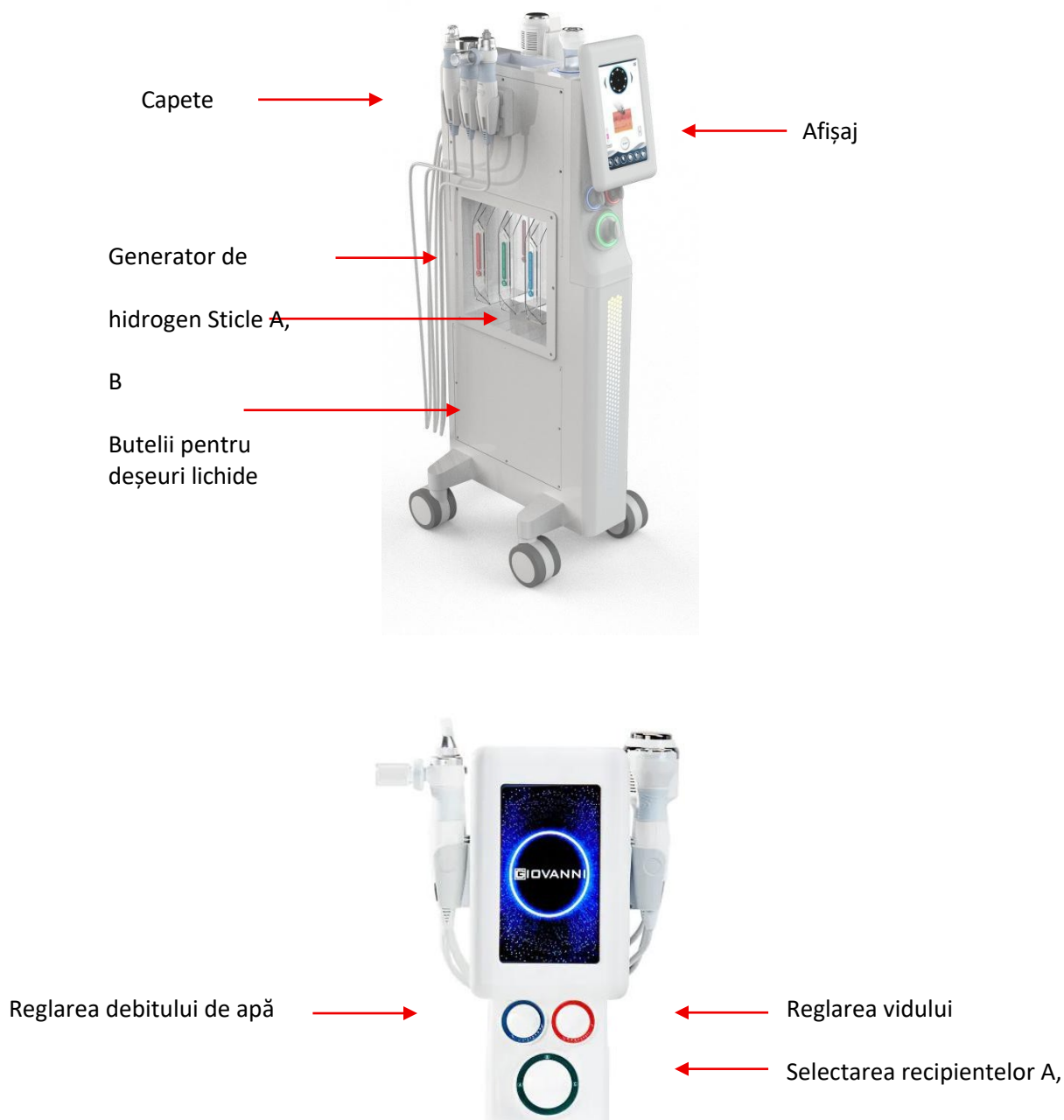

B, C

Buton de selectare a funcției: debit de apă cu abraziv / aerograf




Dacă funcția periei cu apă sau a aerografului nu funcționează corect, verificați dacă a fost selectată funcția corespunzătoare.

Prize:

Priză pentru apă
cu polimer

Priză pentru
cap de răcire

Conector pentru curățare
Vibrații

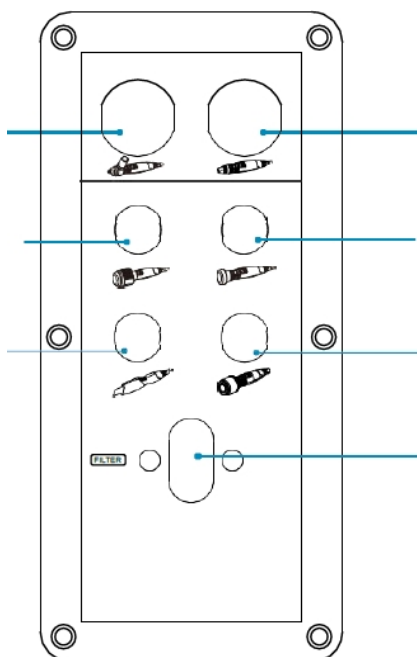

Priză pentru hidrodermabraziune

Priză pentru import
ultrasunete

Alocare pentru unde bipolare
radio (RF)

Fanta filtrului

Capete:



1

2

3

4

5

6

1. Cap pentru ultrasunete
2. Cap de răcire
3. Cap pentru piele: vibrator, de curățare
4. Cap cu polimer, apă și oxigen
5. Cap pentru hidrodermabrazie
6. Cap cu unde radio RF

Atenție

Capul trebuie ținut cu mâna goală, ușor umedă, astfel încât degetele să atingă direct elementele metalice de pe carcasa aparatului. Mențineți contactul cu contactele pe toată durata tratamentului.

Nu folosiți mănuși – este necesar un contact electric bun.



Instalare


1. Aparatul trebuie amplasat într-o încăpere curată și bine aerisită, la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 40 °C, cu o umiditate care să nu depășească 80%, ferit de lumina directă a soarelui. De asemenea, asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt acoperite și că în jurul aparatului există un spațiu liber de cel puțin 5 cm. Rețineți să nu așezați niciun obiect pe aparat, nici măcar temporar.
2. Introduceți accesoriile în mufele corespunzătoare, conform descrierii textuale și indicațiilor grafice situate deasupra interfețelor de ieșire de pe ambele părți ale aparatului. Apoi așezați accesoriile în suportul prevăzut în acest scop.
3. Montați buteliile conform ilustrației de mai jos




Atenție

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este corectă înainte de a utiliza aparatul.
- Înainte de a muta aparatul, goliți recipientele A, B, C și recipientul pentru deșeuri; în caz contrar, lichidul poate pătrunde în interiorul aparatului și îl poate deteriora
- În timpul funcționării, aparatul poate emite un semnal sonor. Urmăriți pictograma sticlei pentru deșeuri de pe interfață – dacă începe să clipească, goliți sticla pentru deșeuri și montați-o din nou corect.

Utilizare:

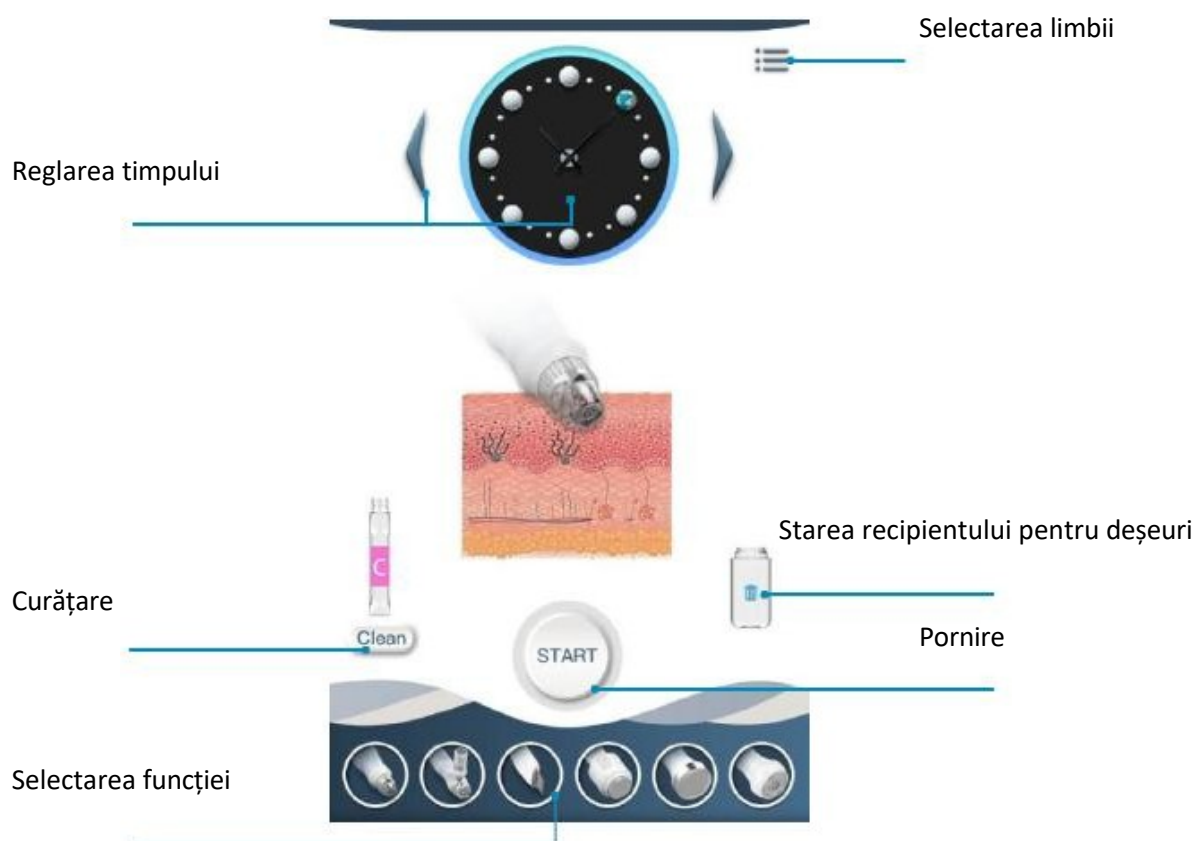

Utilizarea capului

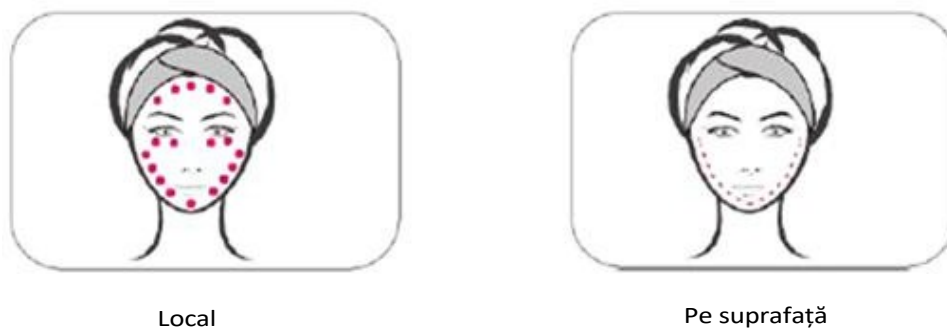

Pentru a curăța conducta de apă și abraziv, **setați** mai întâi **debitul maxim de apă** (folosind butonul rotativ de pe panoul frontal al aparatului), apoi **setați puterea maximă de aspirare**, **porniți aparatul**, **aplicați dopul atașat pe capul de curățare cu apă și abraziv** – aparatul va curăța automat conductele.

Hidrodermabraziune

1. Curățați zona care urmează să fie tratată.
2. Turnați serul diluat în rezervorul aerografului.
3. Apăsăți butonul aerografului de pe ecran.
4. Îndreptați aerograful către zona de tratament și apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a începe tratamentul.




Efectuați mișcări circulare

Capul de răcire

1. Curățați zona care urmează să fie tratată.
2. Apăsăți butonul de pornire.
3. Manipulați mânerul, aplicând partea sa frontală pe zona de tratament.
4. Modul de utilizare a mânerului.

Utilizarea undelor radio Bipolar RF

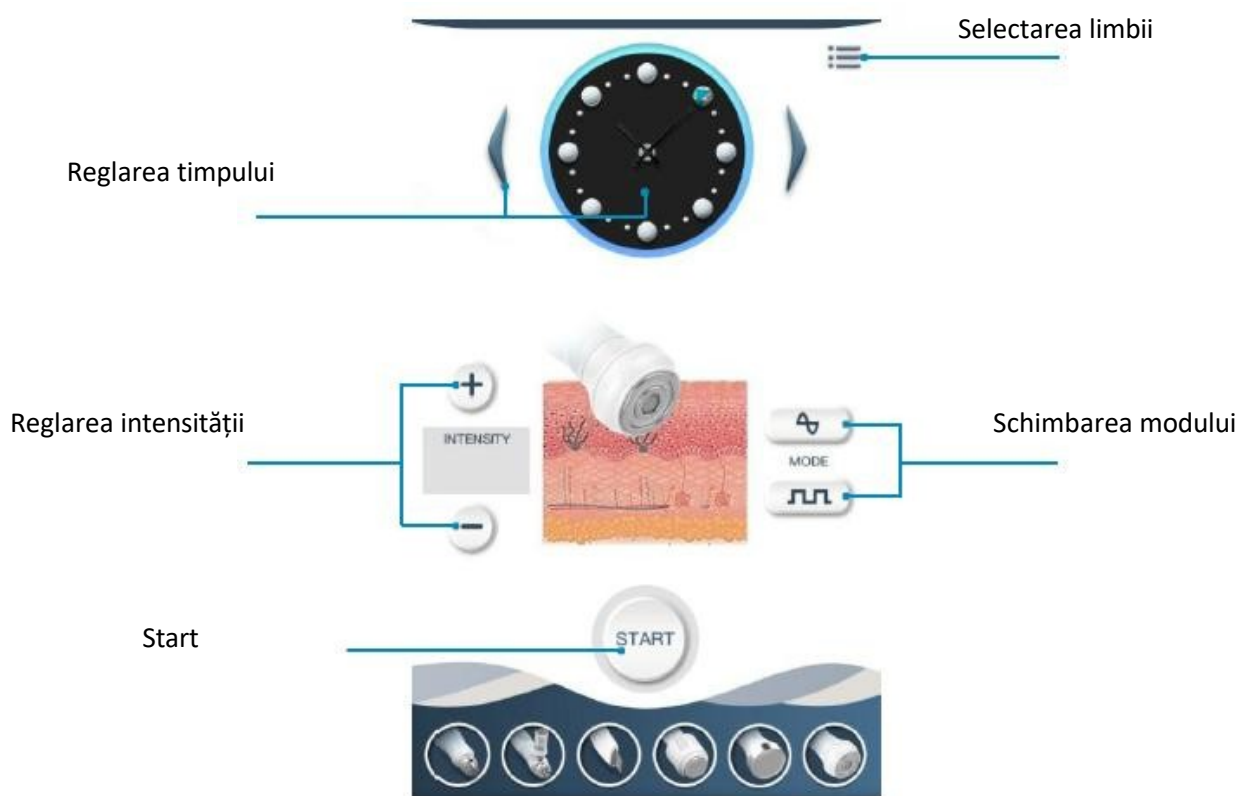

1. Curățați zona care urmează să fie tratată.
2. Aplicați o cantitate adecvată de gel nutritiv pe zona de tratament.
3. Setăți durata de funcționare, intensitatea microcurentului și modul de funcționare.
4. Țineți capul aparatului aproape de zona de tratament și faceți clic pe pictograma microcurentelor de pe ecran sau apăsați butonul de pornire de pe mâner pentru a activa funcția microcurentelor.
5. Efectuați mișcări circulare în conformitate cu liniile feței; în cazul gâtului, este necesară cooperarea clientului prin ridicarea gâtului. Efectuați mișcări circulare de jos în sus pentru a ajuta la detoxifierea organismului



Lift & Pull

Ultrasunete

1. Curățați zona care urmează să fie tratată.
2. Aplicați o cantitate adecvată de esență pe zona de tratament.
3. Setați parametrii de funcționare: durata, intensitatea undelor sonore și modul de funcționare.
4. Țineți capul cu ultrasunete aproape de zona de tratament, atingeți pictograma de sunet de pe ecran, apoi apăsați butonul de pornire de pe mâner pentru a activa funcția de ultrasunete.

Mod de utilizare a mânerului - Capul trebuie condus delicat, fără presiune, de-a lungul liniilor naturale ale pielii, efectuând mișcări de la centru spre exterior și în sus, pentru a obține un efect de lifting și pentru a îmbunătăți absorbția preparatului.



Lift & Pull

Capul pentru piele (skinscrubber)


1. Curățați zona care urmează să fie tratată.
2. Setați intensitatea de lucru, selectați modul corespunzător și apăsați butonul „Start” pentru a începe tratamentul.
3. Metoda de curățare constă în îndepărtarea impurităților de pe epidermă. Procedură:
 - Curățați pielea cu lapte demachiant.
 - Dezinfectați vârful spatulei și înmânați-l clientului pentru a-l ține (în scopul de a împământa curentul).
 - Aplicați pe piele o cantitate adecvată de apă curată.
 - Mișcați capul spatulei **la un unghi de 45º**, în sens invers față de direcția pielii, **de jos în sus**, cu o viteză moderată.
 - Durata tratamentului: **20 de minute**.



Lift & Pull

Masaj limfatic

- Curățați pielea cu un produs de curățare
- Dezinfectați vârful spatulei și înmânați-l clienței pentru a-l ține în mână (în scopul împământării).
- Aplicați pe piele o cantitate adecvată de apă de trandafiri.
- Așezați vârful spatulei pe piele și glisați-o încet de-a lungul mușchilor, urmând direcția orientării lor naturale (textura pielii).
- Durata tratamentului: 15 minute.

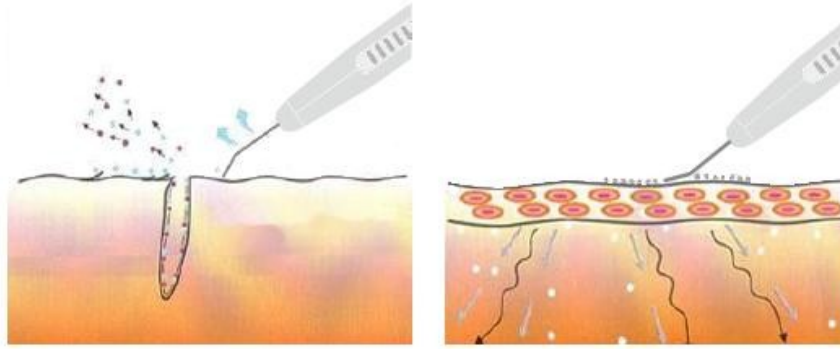

Avertismente și măsuri de precauție după tratament

- Timp de 24 de ore după tratament, nu trebuie să folosiți produse cosmetice puternice sau produse de îngrijire agresive. De asemenea, trebuie să acordați o atenție deosebită protecției solare.
- Se recomandă utilizarea unei măști hidratante curate în fiecare zi, timp de 1 săptămână după tratament.
- Persoanele cu stratul cornos al epidermei subțire sau cu roșeață pronunțată în zona pomeților nu ar trebui să utilizeze stiloul pentru hidrodermabrazie.
- În cazul pielii subțiri sau al unei roșeațe vizibile la nivelul pomeților, nu trebuie să mențineți capul de tratament RF (radiofrecvență) prea mult timp pe aceste zone.
- Tratamentul nu trebuie efectuat la persoanele cu alergii severe sau cu acnee severă.

Atenție – siguranța clientului

Dacă clientul/clienta se simte rău sau apare disconfort, opriți imediat funcționarea aparatului apăsând butonul de control de pe mâner, pentru a asigura siguranța pacientului

Generator de hidrogen

1. Scoateți sticla C, apoi deșurubați-o în sensul acelor de ceasornic. (Fig. 1)
2. Turnați apă distilată curată.
3. Porniți generatorul de hidrogen. (Fig. 2)
4. Când generatorul de hidrogen este pornit, se aprinde o lumină albastră. (Fig. 3)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Depanare

Problemă	Cauze	Soluție
Aparatul nu pornește	• Ștecherul de alimentare nu este conectat la priză. • Comutatorul de alimentare nu este pornit. • Siguranța de alimentare este arsă.	• Verificați dacă aparatul este conectat corect
Capul nu funcționează corect	• Butonul de pornire al capului nu a fost apăsat. • Capul de lucru nu a fost instalat corect. • Capul de lucru este defect. • Conectorul din spatele aparatului nu este conectat corect.	• Apăsați butonul de pornire de pe mâner. • Verificați dacă capul de lucru este instalat corect. • Înlocuiți capul de lucru sau inelul de silicon. • Remontați capul.
Scurgere de lichid	• -Inelul de silicon din poziția de etanșare este deteriorat sau lipsește. • -Instalare incorectă.	• Înlocuiți inelul de silicon pentru a asigura etanșarea. • Returnați aparatul pentru reparații.

Contraindicații pentru tratament

1. Piele sensibilă, acnee foarte severă.
2. Stimulator cardiac, defibrilator cardiac implantabil sau alt dispozitiv electromagnetic implantabil.
3. Diabet sever, hipertensiune arterială și nivel ridicat de colesterol.
4. Boli infecțioase ale pielii.
5. Alunițe, hemangioame, cheloide și răni recente pe piele.

Măsuri de precauție

1. Nu utilizați dispozitivul dacă este conectat la mai multe surse de alimentare.
2. În timpul înlocuirii siguranței, opriți butonul de alimentare pentru a evita riscul de incendiu sau de electrocutare.
3. Utilizați o sursă de alimentare de 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz și o priză cu împământare.
4. Utilizarea unui cablu de alimentare deteriorat prezintă riscul de incendiu sau de electrocutare.
5. Nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare pentru a evita incendiile sau electrocutarea.
6. Dacă aparatul este defect, contactați serviciul de service.
7. Nu utilizați aparatul pe o suprafață instabilă, cum ar fi o suprafață înclinată, sau în locuri în care aparatul ar putea fi deteriorat.
8. În aparat nu trebuie să se afle apă sau impurități; în cazul prezenței corpurilor străine, vă rugăm să contactați compania.
9. În timpul transportului aparatului, deconectați ștecherul de alimentare
10. Nu mutați aparatul când este pornit.
11. Aparatul trebuie așezat pe o suprafață stabilă, lăsând cel puțin 5 cm de spațiu liber pentru a asigura circulația aerului.
12. Pentru a preveni blocarea orificiilor de ventilație, aparatul nu trebuie acoperit cu nimic
13. Evitați utilizarea echipamentului în următoarele condiții: lumină solară, umiditate ridicată, în apropierea apei, în prezența oricărui tip de vibrații, pe suprafețe înclinate sau lângă un câmp magnetic puternic.
14. Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea aparatelor de radio, televizoare, copiatoare, faxuri etc.
15. Nu se poate utiliza împreună cu alte aparate (cum ar fi cuptoarele cu microunde), pentru a evita

- care pot provoca funcționarea incorectă.
16. Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție manualul de utilizare. Utilizatorul trebuie să fie familiarizat cu acesta.
 17. Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.
 18. Parametrii de funcționare ai aparatului, durata și intensitatea trebuie selectați individual, în funcție de nevoile și de tipul de piele al clientului.
 19. Setări parametrii de funcționare ai aparatului sub supravegherea unui specialist.
 20. În cazul apariției unor anomalii la pacient sau la aparat, operatorul trebuie să întrerupă imediat procedura, să apese butonul de oprire și să înceteze utilizarea aparatului.
 21. În timpul funcționării aparatului, trebuie să observați continuu starea clientului și a aparatului și să fiți atenți la eventualele anomalii.

Atenție

- După terminarea tratamentului, toate capetele trebuie curățate și dezinfectate cu atenție, conform normelor de siguranță în vigoare. Nu trebuie să înmuijați capetele care sunt conectate direct la aparat. Acest lucru poate deteriora aparatul. Capetele curate trebuie așezate pe suportul fixat de aparat.
- Aparatul trebuie curățat cu o cârpă; nu se recomandă utilizarea produselor chimice puternice. Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, acesta trebuie curățat bine și apa rămasă trebuie golită.

Atenție

- Asigurați-vă că cablul de împământare este conectat corect.
- Asigurați-vă că toate cablurile electrice sunt conectate și fixate corect.
- Atunci când utilizați aparatele împreună, este important ca acestea să fie folosite corect, altfel pot fi periculoase

Atenție

- În timpul funcționării aparatului, supravegheați în permanență clienta și aparatul
- Aparatul trebuie utilizat de un operator calificat
- După utilizare, curățați cu atenție mânerul de operare înainte de următoarea utilizare a sondei.
- În cazul în care apare fum, miros de ars sau dacă dispozitivul nu mai funcționează, există riscul de incendiu și de electrocutare dacă se continuă utilizarea. Apăsăți rapid butonul de oprire, opriți alimentarea, deconectați ștecherul și contactați imediat compania sau distribuitorul.
- Aparatul și componentele sale trebuie verificate periodic.
- Nu folosiți instrumente de curățare, cum ar fi perii, măști etc., care pot deteriora stratul protector al aparatului.
- Dacă aparatul nu a fost utilizat timp de mai mult de două săptămâni, trebuie verificat cu atenție înainte de a fi folosit din nou

Recomandări

1. Asigurați-vă că ați instalat dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă, pentru a reduce riscul de cădere și deteriorare.
2. Nu lăsați niciodată aparatul conectat la rețea fără supraveghere.
3. Utilizați dispozitivul conform destinației descrise în manual.
4. Nu utilizați niciodată acest aparat dacă cablul sau ștecherul este deteriorat.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau a căzut în apă.
6. Nu trageți direct de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.
7. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Nu-l expune la intemperii.

8. Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie. Cel mai bine este să curățați aparatul cu o cârpă umedă.
9. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.

Măsuri de siguranță

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau încercarea de a-l utiliza în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a aparatului.
7. Nu introduceți obiecte străine în interiorul aparatului. În cazul în care un obiect nedorit pătrunde în interior, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, o raftură sau un vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a asigura durata de viață specificată a aparatului, se recomandă să se aștepte un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestui echipament, cu condiția să li se asigure supravegherea adecvată sau instruirea cu privire la utilizarea corectă și sigură a acestuia și să înțeleagă riscurile asociate.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropierea acestuia se află copii sau persoane care nu dețin cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia.
4. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea aparatului



În scopul protejării mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Respectați regulile privind aruncarea acestui tip de echipamente și nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere.

La sfârșitul duratei de viață, aceste aparate conțin în continuare componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între $(-20\text{ }^{\circ}\text{C})$ și $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$, exclusiv în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, la o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între $(+10\text{ }^{\circ}\text{C})$ și $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$. În timpul proceselor de depozitare și transport, nu se permite aruncarea sau scăparea aparatului, nici expunerea acestuia la șocuri mecanice sau la intemperii.