



Temperatura de depozitare: 15°C ~ 25°C
Umiditate relativă de depozitare: <85%



Mască nazală și accesorii CPAP/VPAP- MAȘTĂ NASALĂ CPAP, medie

REF **0806357**

LOT



Data fabricatiei:



Utilizare de către:

Utilizare prevăzută

Această mască este destinată a fi utilizată sub îndrumarea specifică a unui medic. Este utilizat împreună cu ventilatoarele neinvazive în medii de acasă, spitale și instituționale.

* Este pentru utilizarea unui singur pacient

⚠️ Atenție: Legea federală din SUA limitează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la ordinul unui medic.

Caracteristici

- * Cauciuc siliconic turnat dintr-o bucată; mic, ușor și confortabil.
- * Masca transparentă permite o vedere bună a gurii și a zonei nazale.
- * Spațiul mort scăzut are ca rezultat un nivel scăzut de CO₂construi.
- * Pivoare duble la 360 de grade la fixarea măștii și la punctul de atașare a tubului standard de 22 mm.
- * Articolele pentru cap cu elemente de fixare Velcro oferă versatilitate și mișcare maxime.

Instrucțiuni de curățare

- * Detașați călcarea de pe mască.
- * Spălați ușor de mână cu săpun ușor și apă caldă, clătiți bine masca și componentele.
- * Lăsați masca și componentele să se usuce la aer înainte de reutilizare.
- * Înlocuiți masca dacă există crăpături, rupturi sau decolorare excesivă.

Dezinfecție și sterilizare pentru mediul instituțional și spital

Consultați *Ghidul de dezinfecție și sterilizare al măștii CPAP și VPAP*

⚠️ Atenție

Folosirea de înălbitor, clor, alcool sau soluții pe bază de arome poate provoca întărirea materialelor de construcție și poate reduce durata de viață a produsului.

Contraindicații

Această mască poate să nu fie potrivită pentru pacienții cu următoarele afecțiuni: afectarea funcției sfincterului cardiac, reflux excesiv, afectarea reflexului tusei și hernie hiatală. Nu trebuie utilizat dacă pacientul nu răspunde, este obstrucționat, nu poate îndepărta masca sau nu cooperează.

⚠️ Avertismente

- * Această mască trebuie utilizată numai cu sistemele NIV recomandate de medicul dumneavoastră sau de terapeutul respirator.
- * Nu utilizați această mască decât dacă sistemul NIV este pornit și funcționează corect.

Nota: Când ventilatorul nu funcționează, nu va fi furnizat suficient aer proaspăt prin mască și aerul expirat poate fi reinspirat. Respirația aerului expirat mai mult de câteva minute poate duce, în anumite circumstanțe, la sufocare.

Dacă se folosește oxigen cu sistemul NIV, fluxul de oxigen trebuie oprit atunci când ventilatorul nu este în funcțiune.

Nota: Când ventilatorul nu funcționează și fluxul de oxigen este lăsat pornit, oxigenul livrat în tubulatura de ventilație se poate acumula în incinta ventilatorului și poate crea un risc de incendiu.

Nota: La un debit fix de oxigen suplimentar, concentrația de oxigen inhalat va varia în funcție de setarea presiunii, modelul pacientului și rata de scurgere.

* Nu fumați dacă utilizați oxigen.


* Contactați un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți disconfort toracic, dificultăți de respirație, distensie abdominală, eructații sau dureri de cap severe.

* Evitați să mâncați sau să beți cu trei ore înainte de a utiliza această mască pentru a minimiza riscul de vărsături în timpul tratamentului.


* Nu folosiți această mască dacă luați medicamente care pot provoca vărsături.

Atenție: Trebuie utilizat numai de către persoane care au primit instruire și instruire adecvată din partea personalului medical calificat.


Dacă este inclus un accesoriu pentru cap, urmați instrucțiunile de asamblare de mai jos:

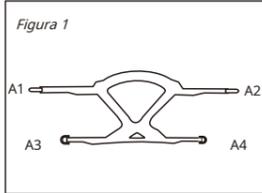


Așezați accesoriul pentru cap cu partea velcro în jos pe o suprafață plană, detașați 2 benzi velcro pe A1 și A2.

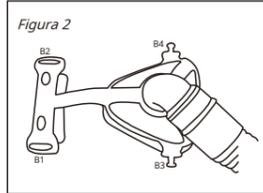


Identificați pozițiile de fixare a articolelor pentru acoperirea capului pe mască.

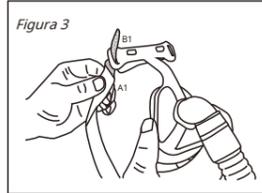


Trageți cureaua superioară A1 pentru acoperirea capului prin fanta B1 de pe mască, asigurându-vă că Velcro este orientat spre exterior.

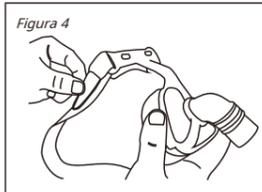


Fixați banda Velcro.

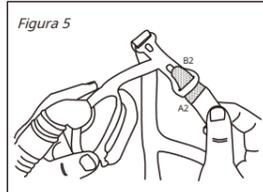


Trageți cureaua superioară A2 pentru acoperirea capului prin fanta B2 de pe mască, asigurându-vă că Velcro este orientat spre exterior.

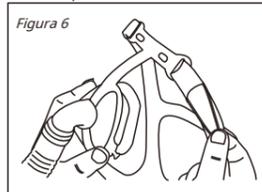


Fixați banda Velcro.

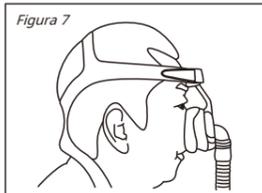


Așezați accesoriul peste cap și reglați ambele curele superioare pentru acoperirea capului la o tensiune confortabilă.

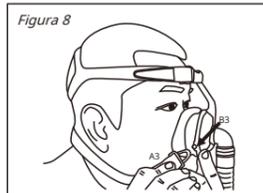


Agățați catarama de plastic A3 pe B3 și A4 pe B4 pe rama măștii.

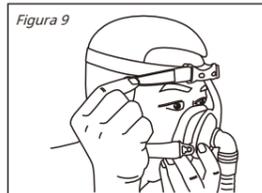

Reglați din nou ambele curele superioare A1 și A2 la o tensiune confortabilă.

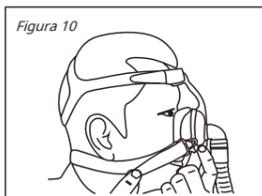

Reglați ambele curele inferioare pentru acoperirea capului A3 și A4 la o tensiune confortabilă.

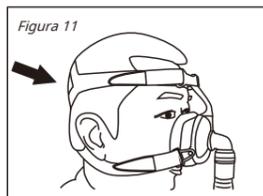

Asigurați-vă că cureaua de deasupra capului este în poziția corectă pentru a evita alunecarea în jos.

* Pentru a scoate masca și accesoriul pentru cap, pur și simplu desfaceți ambele catarama de pe cadrul măștii și trageți cureaua superioară a capului departe de cap.

* Pentru a reutiliza masca și accesoriul pentru cap, pur și simplu plasați cureaua superioară deasupra capului și conectați-o la ambele catarama.

HSINER Co., Ltd.
312, Jhongshan Rd., Shengang Dist,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com Site Web: <http://www.hsiner.com>

EC REP Reprezentantul UE
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530 Fax:
+49 511 3908 9539 <http://www.mdi-europa.com>

CE
2460

EC0061045402
Rev.03 11/22

Ghidul de dezinfecție și sterilizare al măștii CPAP și VPAP

Următoarele metode de dezinfecție și sterilizare sunt destinate utilizării unui singur pacient în mediul spitalicesc/instituțional, iar acest ghid este folosit numai pentru uz profesional. Aceste metode sunt procedurile recomandate și vă sfătuim ca fiecare unitate de sănătate să-și consulte propriile proceduri înainte de a efectua următoarele instrucțiuni.

Ocazie de dezinfecție și sterilizare:

- Ori de câte ori masca este contaminată cu secreții, vărsături sau alte substanțe străine care sunt considerate periculoase pentru pacient.
- Judecata terapeutului respirator sau medicului dacă masca este pentru pacienții de terapie intensivă. La fiecare 7 zile continue de utilizare a aceluiași pacient.

Procedură:

1. Dezasamblați perna din cadrul măștii și scoateți setul de accesorii pentru cap.
2. Clătiți toate piesele cu apă curată pentru a îndepărta reziduurile.
3. Mănuile spălați bine toate părțile măștii cu detergent neutru de curățare aproximativ 5 minute.
4. Clătiți toate piesele cu apă curată pentru a îndepărta detergentul rămas și lăsați piesele să se usuce la aer.
5. Dezinfectare/Sterilizare:

- Autoclavarea nu trebuie să depășească 121 °C timp de 15 minute (Nu include setul de accesorii pentru cap)

- Dezinfectare Cidex 2% Glutaraldehydă timp de 20 de minute (Nu include setul de accesorii pentru cap):

Consultați furnizorul de dezinfectant înainte de prima utilizare. Clătiți bine cu apă sterilă.

6. Uscăți-le bine. Inspectați toate componentele pentru a vă asigura că sunt curate și uscate. Dacă piesele sunt uzate sau deteriorate, aruncați-le.
7. Verificare funcțională:

- Masca reasamblată trebuie verificată vizual complet înainte de utilizare și conectată la mașina de ventilație cu presiune pozitivă.

- Purlați masca pe fața pacientului cu accesorii pentru cap și asigurați-vă că rezistența este suficientă.

- Asigurați-vă că masca este reglată într-o poziție confortabilă și că nu există scurgeri evidente de la suprafața de atingere a pernei.

- Dacă perna încă nu se poate etanșa bine, vă rugăm să înlocuiți una cu alta.

Atenție:

- Accesoriul pentru cap nu este potrivit pentru acest ghid; trebuie spălat ferm și nu reambalat cu mască dezinfectată/autoclavată înainte de următoarea utilizare.
- Eliminarea măștii trebuie să respecte legile locale referitoare la deșeurile spitalelor din mediul spitalicesc/instituțional.
- Principalele părți ale ciclurilor maxime de dezinfecție și sterilizare ale măștii CPAP/VPAP sunt recomandate de 30 de ori. Se recomandă spălarea cu detergent neutru de 90 de ori. Nu scoateți supapa anti-asfixie în timp ce dezasamblați conectorul cot. Disclaimer: este responsabilitatea utilizatorului să califice orice abateri de la metoda recomandată de reprocesare.
- Contactați distribuitorul pentru informații suplimentare.

