



Manual de utilizare

Mască nazală

(YN-03)



Rev.: A 2019-10

Utilizare preconizată

O mască este un accesoriu neinvaziv utilizat pentru a filtra fluxul de aer (cu sau fără oxigen suplimentar) către un pacient conectat la un produs cu presiune pozitivă a căilor respiratorii (PAP), cum ar fi un sistem cu presiune pozitivă continuă a căilor respiratorii (CPAP) sau un sistem cu două niveluri.

- Masca este indicată pentru utilizarea de către pacienți (greutate >30 kg), reutilizare de către pacient la domiciliu.
- Masca este indicată pentru utilizarea de către un pacient într-un spital sau altă unitate medicală.

Contraindicații

Dacă utilizatorul suferă de următoarele afecțiuni, este posibil ca produsul să nu fie potrivit pentru utilizare. De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită momentului în care trebuie utilizat. În orice caz, medicul este cel care va recomanda sau nu utilizarea măștii. Aceste afecțiuni sunt următoarele:

- Operație recentă la ochi sau ochi uscați
- Glaucom
- Hernie hiatală prin hiatusul esofagian
- Disfuncție a sfincterului esofagian, excesivă reflux, tulburare de reflex al tusei
- Vărsături
- Emfizem pulmonar vezicular
- Tensiune arterială scăzută cu cauze patologice
- Bypassul căilor respiratorii superioare
- Pneumotorax
- Sinuzită acută sau otită medie diagnosticată
- Risc de aspirare a conținutului gastric
- Alergie sau hipersensibilitate la materialele măștii sau pentru pacienții care nu sunt capabil să scoată masca

ATENȚIE: În SUA, legea federală restricționează vânzarea acestui produs la sau la recomandarea unui medic.




AVERTIZĂRI

- Citiți întregul ghid înainte de a utiliza produsul.
- Deschiderile conductelor de aer trebuie să rămână libere.
- Avertisment Explicație: Sistemele Aparatele CPAP sunt destinate utilizării cu măști speciale cu conectori care au deschideri pentru a permite circulația continuă a aerului în afara mascăi. Când aparatul CPAP este pornit și funcționează corect, aerul proaspăt din aparatul CPAP elimină aerul expirat prin orificiul de expirare atașat măștii. Cu toate acestea, atunci când aparatul CPAP nu funcționează, nu va fi furnizat suficient aer proaspăt prin mască și va fi inhalat aer expirat. Reinhalarea, adică inhalarea aerului expirat, mai mult de câteva minute poate provoca în unele cazuri asfixiere. Acest avertisment se aplică majorității modelelor de aparate CPAP.
- La presiuni scăzute Circulația CPAP prin orificiul de expirație poate fi insuficientă pentru a elimina tot aerul expirat din tub. Reinspirația este posibilă.
- Pentru a minimiza riscul de vărsături în timpul somnului, Pacientul trebuie să evite consumul de alimente sau băuturi timp de trei ore înainte de utilizarea măștii. Această mască nu este recomandată dacă pacientul ia medicamente eliberate pe bază de rețetă care pot provoca vărsături.
- Această mască nu trebuie utilizată la pacienții care nu sunt cooperant, cu nivel de conștiență redus, incapabil să-și îndepărteze masca.
- Respectați toate precauțiile atunci când utilizați oxigen suplimentar.
- Fluxul de oxigen trebuie oprit atunci când generatorul de flux nu este pornit funcționează astfel încât oxigenul neconsumat să nu se acumuleze în carcasa generatorului de debit și să nu prezinte un pericol de incendiu.
- Cu un debit constant de oxigen suplimentar, concentrația de Cantitatea de oxigen inhalat variază în funcție de setările de presiune, modelul de respirație al pacientului, mască, locul de aplicare și rata de scurgere.
- Specificațiile tehnice ale măștii sunt furnizate medicului dumneavoastră pentru verificare. dacă este compatibilă cu generatorul de debit. Dacă este utilizată cu încălcarea specificațiilor tehnice sau cu dispozitive incompatibile, masca poate să nu etanșeze etanș și să fie inconfortabilă, este posibil să nu se obțină terapia optimă, iar scurgerile sau modificarea ratei de scurgere pot afecta funcționarea generatorului de debit.



- Nu mai folosiți masca și consultați medicul sau terapeutul somnului dacă observați ORICE efecte adverse în urma utilizării măștii.
- Pentru detalii și informații despre setări și funcționare, Consultați manualul generatorului de debit.
- Ca în cazul tuturor măștilor, este posibil să existe reinhalare presiuni CPAP scăzute.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de a utiliza masca.

Părți ale măștii

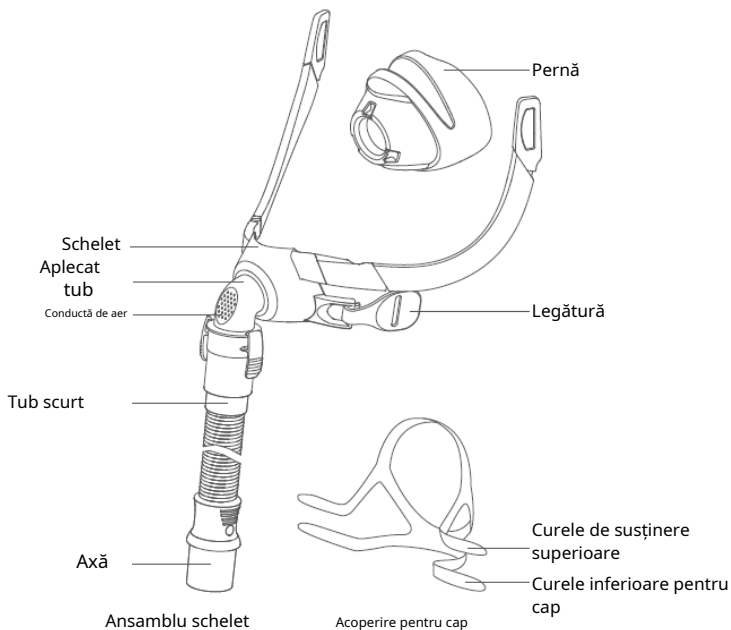

Ajustare

Folosiiți un conector conic standard dacă sunt necesare citiri de presiune și/sau oxigen suplimentar.

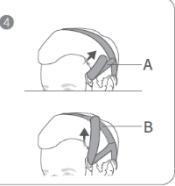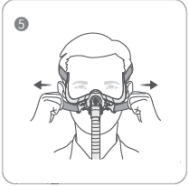		
Deconectați-le mai jos legăturile sale accesoriu pentru cap din schelet.	Ține masca. ferm pe față și trageți capacul capului peste din capul tău.	Doborându-i curelele de sub urechi, atașați banda de susținere la fundul scheletic.
		
Deschideți legăturile. pe bretelele superioare a copertei cap. Trageți-le curelele uniform spre creștetul capului sau deasupra urechilor până când masca este fixată și confortabilă. Legați din nou masca.	Deschideți legăturile. pe curelele inferioare ale caschetei. Trageți curelele uniform până când Asigurați-vă că masca este fixată și confortabilă. Legați din nou masca.	Masca și echipamentul de protecție pentru cap trebuie așezate după cum urmează: Este prezentat în imagine.

Nota: Conectați tubul dispozitivului la tija măștii și asigurați-te că este bine conectat.

Îndepărtare

Pentru a scoate masca, deconectați una dintre legăturile inferioare ale benzii de susținere și trageți masca și banda de susținere peste cap.



PRECAUȚII

- Nu scoateți cascheta înainte de a fi eliberate elementele de fixare.
- Confirmați că puteți scoate confortabil catarama și capacul cap.


Demontare

Note:

1. Ansamblul tubului îndoit se poate bloca, iar reinstalarea va fi mai dificilă.



Scoateți furtunul de aer.
Deconectați-le de mai jos
conectorii accesoriilor pentru
cap și eliberați curelele
superioare pentru cap.

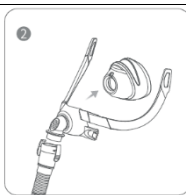

Separați cu grijă perna
de cadru.

Reasamblare

 Diagram 1 shows a hand inserting a strap into a channel on a frame. A circular component is shown separately, representing the head cap.	 Diagram 2 shows the top straps of a helmet being inserted into a loop on the frame. The circular head cap is shown being placed onto the helmet.
Montați perna în canalul cadrului.	Treceți curelele superioare ale caschetei prin bucla cadrului. Păstrați conectorii pe curelele inferioare ale caschetei și Atașați capacul capului la partea inferioară a cadrului.

Curățarea măștii acasă

Note:

- Curățarea măștii și a echipamentului de protecție a capului trebuie efectuată doar cu spălarea mâinilor.
- Țeava îndoită nu poate fi demontată pentru spălare.
- Dacă se observă orice uzură vizibilă pe o componentă a măștii (crăpare, ruptură etc.), această piesă trebuie scoasă și înlocuită.



PRECAUȚII

- Nu utilizați soluții care conțin înălbitor, clor, alcool, parfumuri, produse hidratante, antiseptice sau uleiuri aromatice pentru a curăța orice parte a sistemului sau a tubului de aer. Aceste soluții pot provoca daune și pot scurta durata de viață a produsului.
- Expunerea directă a oricărei părți a sistemului sau a conductei aerului în lumina soarelui sau la căldură poate provoca daune.
- Nu spălați această mască în mașina de spălat vase.

- Nu uscați componentele măștii în aer liber, sub lumina soarelui, deoarece aceasta poate accelera îmbătrânirea produsului.
- Nu călcați plăriile. Există posibilitatea de a le deteriora. deteriorarea capacului
- Dacă curățarea nu este efectuată conform instrucțiunilor (sau nivelul crește) (frecvența de curățare). Există posibilitatea să se observe o performanță redusă a produsului sau o durată de viață mai scurtă a acestuia.

Zilnic / După fiecare utilizare

- Dezasamblați componentele măștii conform instrucțiunilor demontare.
- Curățați temeinic componentele măștii separat (cu excepția (accesoriu pentru cap) prin frecare ușoară în apă caldă (aproximativ 30°C) folosind un săpun delicat.
- Folosiți o perie moale pentru a curăța conducta de aer.
- Pentru a optimiza potrivirea măștii, îndepărtați resturile de grăsime de pe pernă după utilizare.
- Inspectați fiecare componentă și, dacă este necesar, repetați spălarea până când Fiecare componentă ar trebui să arate curată și nu ar trebui să existe reziduuri de săpun.
- Clătiți toate piesele cu apă potabilă și lăsați-le să se usuce în aer liber, ferit de lumina soarelui.
- Când toate piesele sunt uscate, reasamblați conform instrucțiunilor. instrucțiuni de asamblare.

Săptămânal

Spălați manual echipamentul de protecție pentru cap și toate accesoriile în apă caldă (aproximativ 30°C) cu săpun. Folosiți săpun pur. Clătiți bine accesoriile și lăsați-le să se usuce afară, ferite de lumina soarelui.

Dacă este expusă la lumina directă a soarelui, masca va prezenta semne de uzură, iar durata sa de viață va fi redusă. Dacă se observă orice uzură vizibilă pe o componentă a măștii (crăpături, rupturi etc.), componenta respectivă trebuie îndepărtată și înlocuită.

Folosiți masca într-un spital sau altă unitate medicală



PRECAUȚII


- Masca este indicată pentru utilizarea de către un pacient într-un spital sau alt centru un centru de îngrijire medicală. Dacă masca se murdărește în timpul utilizării, folosiți șervețele medicale de unică folosință sau hârtii de curățare pentru a îndepărta murdăria vizibilă, apoi clătiți masca bine cu apă potabilă și lăsați-o să se usuce ferită de lumina soarelui.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Masca face mult zgomot	Căile respiratorii sunt complet sau parțial blocate. Masca nu asamblate corect.	Curățați-le conducte de aer conform instrucțiunile din secțiunea „Curățarea măștii acasă”. Reasamblați masca.
Scurgeri de mască în față.	Masca a fost montată greșit.	Urmați cu atenție instrucțiunile din secțiunea „Personalizare”.
Masca nu este confortabil	Masca a fost montată greșit.	Urmați cu atenție instrucțiunile din secțiunea „Personalizare”.
	Perna măștii poate fi murdară.	Curățați-le conducte de aer conform instrucțiunile din secțiunea „Curățarea măștii acasă”.

Specificații tehnice

Curba presiune-debit

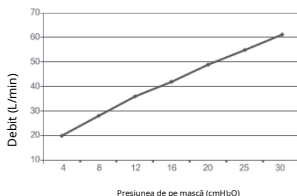

Informații despre spațiul mort

Spațiul mort este volumul gol al măștii până la axă.
Spațiul mort al măștii variază în funcție de dimensiunea pernei, dar este mai mic de 142 ml.

Presiunea de tratament

4 până la 30 cmH₂O/Ceal/Ceal/Ceal

Rezistență

Cădere de presiune măsurată la 50 L/
min: $\leq 0,5$ cmH₂O la 100 L/min: $\leq 1,5$
cmH₂O/Ceal/Ceal/Ceal

Sunet

VALORI DE EMISIE DE ZGOMOT DECLARATE ÎN DOUĂ CIFRE conform ISO 4871.
Presiunea sonoră ponderată A a măștii este mai mică de 38 dBA, cu o incertitudine de 3 dBA. Presiunea sonoră ponderată A a măștii la o distanță de 1 m este mai mică de 30 dBA, cu o incertitudine de 3 dBA.

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare: -5°C până la +40°C (-41°F până la +104°F)
Umiditate de funcționare: Umiditate relativă 10%~90% fără condens
Depozitare și transport: -20°C până la +60°C (-4°F până la 140°F)
Umiditate pentru depozitare și transport:
Umiditate relativă 10%~90% fără condens

Notă: Sistemul de mască nu conține latex de cauciuc natural, PVC sau DEHP.

Depozitare

Asigurați-vă că masca este curățată și uscată bine înainte de Depozitați masca pentru o perioadă lungă de timp. Depozitați masca într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui.

Respingere

Masca nu conține substanțe periculoase și poate fi aruncată laolaltă cu alte deșeuri menajere.

Simboluri

Sistem și ambalare

	Atenție, consultați documentele însoțitoare. Indică un Avertisment sau o Precauție și vă avertizează asupra unei potențiale vătămări corporale sau explică măsurile speciale pentru utilizarea sigură și eficientă a dispozitivului.
	Dispozitiv medical
	Cod lot
	Data fabricației
	Data expirării: A se consuma de preferință înainte de data inscripționată.
	Consultați instrucțiunile de utilizare.
	Un pacient - multe utilizări
	Număr de catalog
	Nu este fabricat cu latex de cauciuc natural
	Limitarea temperaturii
	Limitarea umidității
	Producător
	Ereprezentant autorizat în Uniunea Europeană

Garanție limitată

Masca, inclusiv cadrul, perna și ansamblul de protecție pentru cap, este garantată a fi lipsită de defecte de materiale și de fabricație pentru o perioadă de nouăzeci (90) de zile de la data achiziției de către primul consumator.

Această garanție nu acoperă daunele rezultate în urma accidentelor, utilizării necorespunzătoare, abuzului, neglijenței, modificării, neutilizării sau întreținerii Produsului în condițiile și în conformitate cu termenii documentelor care însoțesc Produsul, precum și alte defecte care nu au legătură cu materialele sau manoperă.



Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.

Șoseaua Jinfeng nr. 9, Orașul Știință și Tehnologie Suzhou,
215163 Suzhou, Jiangsu, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Tel.: +86-512-67373001

adresa site-ului web: www.yuyue.com.cn



Metrax GmbH

Rheinwaldstr.22, D-78628 Rottweil,
Badenwuerttemberg, Germania Tel.:
+49-741-257-223

Fax: +49-741-257-214

E-mail: heiko.borkowsky@primedic.com



yuwell



Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.
No.9 Jinfeng Road., Suzhou Science & Technology
Town, 215163 Suzhou, Jiangsu, PRC Tel:
+86-512-67373001
Adresă web: www.yuwell.com



Metrax GmbH
Rheinwaldstr.22, D-78628 Rottweil, Germania Tel:
+49-741-257-0 +49-741-257-223 Fax:
+49-741-257-214
E-mail: vigilance@primedic.com
heiko.borkowsky@primedic.com



Versiunea IFU-V-25(01): D
Data pregătirii: 03-2022

Manual de utilizare

Seria de îmbrăcăminte respirabilă

Mască nazală

YN-0 3



Utilizare preconizată

Masca este un accesoriu neinvaziv utilizat pentru canalizarea fluxului de aer (cu sau fără oxigen suplimentar) către un pacient de la un dispozitiv cu presiune pozitivă a căilor respiratorii (PAP), cum ar fi un sistem cu presiune pozitivă continuă a căilor respiratorii (CPAP) sau un sistem cu două niveluri.

- Masca trebuie utilizată de pacienți (cu greutatea ≥ 30 kg), fiind destinată reutilizării de către un singur pacient în mediul casnic.
- Masca este destinată utilizării de către un singur pacient în mediul spitalicesc sau instituțional.

Contraindicații

Dacă utilizatorul suferă de următoarele afecțiuni, este posibil ca produsul să nu fie potrivit pentru utilizare. De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită atunci când trebuie utilizat. În ambele cazuri, medicul este cel care decide dacă masca trebuie utilizată sau nu. Aceste afecțiuni includ:

- Operație recentă la ochi sau ochi ușați
- Glaucom
- Hernie hiatală
- Funcție afectată a sfincterului cardiac, reflux excesiv, reflex de tuse afectat,
- vărsături
- Boala pulmonară buloasă
- Tensiune arterială patologic scăzută, ocolită de
- căile respiratorii superioare
- Pneumotorax
- Diagnosticat cu sinuzită acută sau otită medie.
- Cu risc de aspirare a conținutului gastric.
- Alergie sau hipersensibilitate la materialele măștii sau la pacienții care nu pot scoate masca



AVERTIZARE

În SUA, legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv la vânzarea de către sau pe numele recomandarea medicului.



AVERTIZĂRI


- Vă rugăm să citiți întregul ghid înainte de utilizare.
- Orificiile de ventilație trebuie menținute libere.

- Explanation of Warning: CPAP systems are intended to be used with special masks with connectors which have vent holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the CPAP machine is turned on and functioning properly, new air from the CPAP machine flushes the exhaled air out through the attached mask exhalation port. However, when the CPAP machine is not operating, enough fresh air will not be provided through the mask, and exhaled air will be rebreathed. Rebreathing of exhaled air for longer than several minutes can, in some circumstances, lead to suffocation. This warning applies to most models of CPAP systems.
- At low CPAP pressures the flow through the exhaled port may be inadequate to clear all exhaled gas from the tube. Some rebreathing may occur.
- To minimize the risk of vomiting during sleep, the patient should avoid eating or drinking for three hours before using the mask. This mask is not recommended if the patient is taking a prescription drug that may cause vomiting.
- This mask should not be used on patients who are uncooperative, obtunded, unresponsive, or unable to remove the mask.
- Follow all precautions when using supplemental oxygen.
- Oxygen flow must be turned off when the flow generator is not operating, so that unused oxygen does not accumulate within the flow generator enclosure and create a risk of fire.
- At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration varies, depending on the pressure settings, patient breathing pattern, mask, point of application and leak rate.
- The technical specifications of the mask are provided for your clinician to check if it is compatible with the flow generator. If it is used beyond technical specifications or used with incompatible devices, the seal and comfort of the mask may not be effective, optimum therapy may not be achieved, and leak, or variation in the rate of leak, may affect the function of the flow generator.
- Stop using the mask and consult your physician or sleep therapist, if you have ANY adverse reaction to the use of the mask.
- Refer to your flow generator manual for details on settings and operational

information.



- As with all masks, some rebreathing may occur at low CPAP pressures.
- Remove all packaging before using the mask.

Părți ale măștii

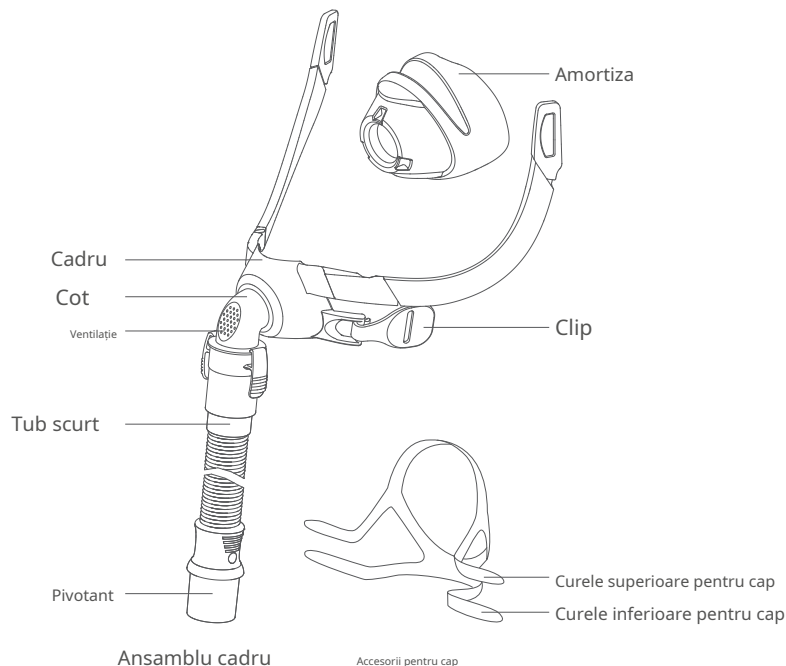

Montaj

Folosiți un conector conic standard dacă sunt necesare citiri de presiune și/sau oxigen suplimentar.

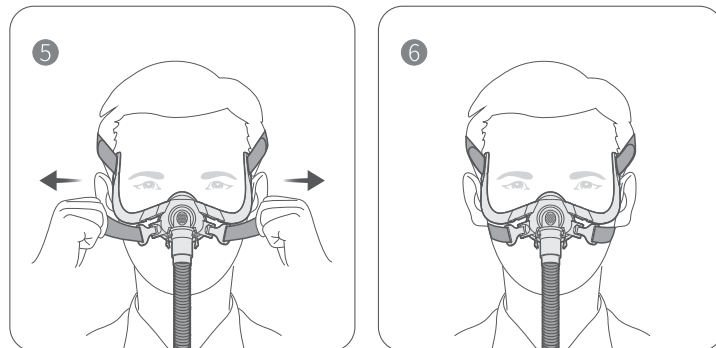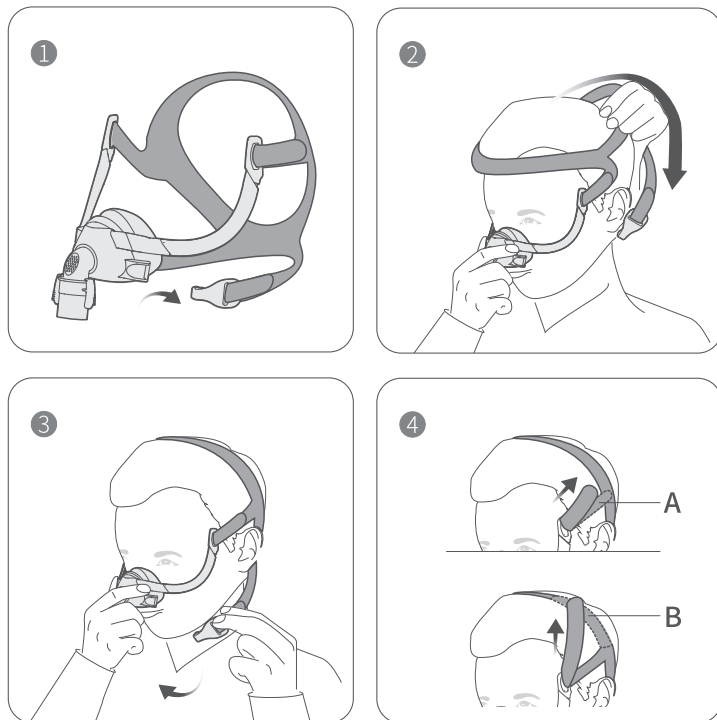

1. Desprindeți una dintre clemele inferioare ale sistemului de protecție pentru cap de pe cadru.
2. Țineți masca ferm pe față și trageți casceta peste cap.
3. Aducând curelele inferioare sub urechi, prindeți casca de partea inferioară a cadrului.
4. Desfaceți clemele de fixare de pe curelele superioare ale caschetei. Trageți curelele uniform spre creștetul capului sau deasupra urechilor până când masca este stabilă și confortabilă. Reașezați clemele de fixare.
5. Desfaceți clemele de fixare de pe curelele inferioare ale caschetei. Trageți uniform de curele până când masca este stabilă și confortabilă. Reașezați clemele de fixare.
6. Masca și echipamentul de protecție pentru cap trebuie poziționate așa cum se arată în ilustrație.

⚠️ Nota:

Conectați tubul de aer al dispozitivului la pivotul măștii și asigurați-vă că este fixat ferm, conectat.

Îndepărtare


Pentru a scoate masca, deconectați una dintre clemele inferioare ale echipamentului de protecție pentru cap și trageți masca și echipamentul de protecție în sus peste cap.

⚠️ ATENȚII

- Nu scoateți casceta până când clemele nu sunt eliberate.
- Vă rugăm să confirmați că puteți scoate catarama și eșarfa pentru cap fără probleme.

Demontare


⚠️ Note:
Ansamblul cotului poate fi suportat, iar reinstalarea va deveni mai dificil.

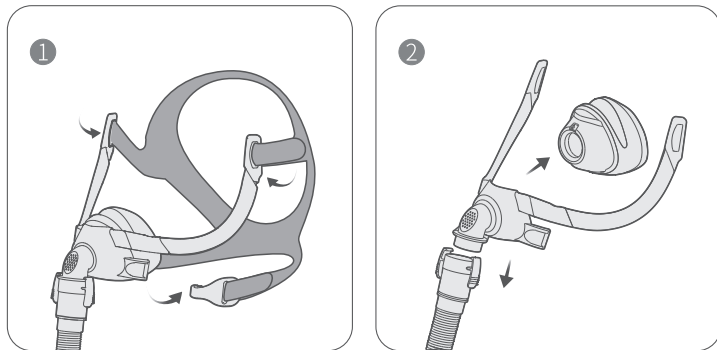

1. Detașați tubul de aer. Desfaceți clemele inferioare ale dispozitivului de fixare a capului și desfaceți curelele superioare ale dispozitivului de fixare a capului.

2. Separați cu grijă perna de cadru.

Reasamblare

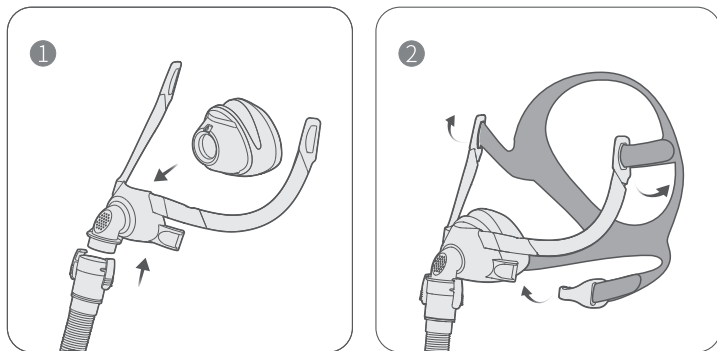

1. Montați perna în canalul cadrului.

2. Trecerea curelelor superioare ale accesoriului pentru cap prin bucla cadrului. Mențineți clemele atașate la curelele inferioare ale accesoriului pentru cap și fixați accesoriul pentru cap în partea inferioară a cadrului.

Curățarea măștii acasă

⚠️ Note:

- Mască și echipamentul de protecție pentru cap pot fi curățate doar prin spălare manuală.
- Cotul nu poate fi demontat pentru spălare.
- Dacă este evidentă orice deteriorare vizibilă a unei componente a măștii (crăpături, rupturi etc.), componenta măștii trebuie aruncată și înlocuită. Se recomandă înlocuirea măștii după 30 de curățări. Se recomandă înlocuirea lunară.

⚠️ ATENȚII

- Nu utilizați soluții care conțin înălbitor, clor, alcool, substanțe aromatice, hidratante, agenți antibacterieni sau uleiuri parfumate pentru a curăța orice parte a sistemului sau a tubului de aer. Aceste soluții pot provoca daune și pot reduce durata de viață a produsului.
- Expunerea oricărei părți a sistemului sau a tubulaturii la lumina directă a soarelui sau la căldură poate cauza deteriorarea.
- Nu folosiți mașina de spălat vase pentru a spăla această mască.
- Nu uscați componentele măștii la aer în lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate accelera îmbătrânirea produsului.
- Nu călcați accesoriul pentru cap. Acesta se poate deteriora.
- Dacă curățarea nu este efectuată conform instrucțiunilor (sau dacă se crește frecvența curățării), produsul poate fi afectat de performanța sa slabă sau de durata sa de viață redusă.

Zilnic / După fiecare utilizare

- Dezasamblați componentele măștii conform instrucțiunilor de dezasamblare.
- Curățați temeinic componentele separate ale măștii (cu excepția echipamentului de protecție a capului), frecându-le ușor cu apă caldă (aproximativ 30°C) apă folosind un săpun blând. Înmuiiați în apă nu mai mult de 10 minute.

- Folosiți o perie cu peri moi pentru a curăța orificiul de ventilație.
- Pentru a optimiza etanșarea măștii, uleiurile faciale trebuie îndepărtate de pe pernă după utilizare.
- Inspectați fiecare componentă și, dacă este necesar, repetați spălarea până când este curată vizual, asigurându-vă că nu există reziduuri de săpun.
- Clătiți bine toate componentele timp de 3-5 minute cu apă potabilă și lăsați-le să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.
- Când toate componentele sunt uscate, reasamblați-le conform instrucțiunilor de reasamblare.

Săptămânal

- Spălați manual echipamentul de protecție pentru cap și toate componentele la apă caldă (aproximativ 30°C) și apă cu săpun. Folosiți săpun pur. Clătiți bine componentele și lăsați-le să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.
- Această acțiune va îmbătrâni sau deteriora masca și îi va scurta durata de viață. Dacă este evidentă orice deteriorare vizibilă a unei componente a măștii (crăpături, rupturi etc.), componenta măștii trebuie aruncată și înlocuită.

Utilizați masca în mediul spitalicesc sau instituțional

⚠ ATENȚIE

Masca este destinată utilizării unui singur pacient în mediul spitalicesc sau instituțional. Metode de curățare conform secțiunii: Curățarea măștii acasă.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Masca este prea zgomotoasă	Gurile de aerisire sunt blocate sau parțial blocate. Masca este asamblată incorect.	Curățați orificiile de ventilație conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățarea măștii acasă”. Reasamblați masca.
Scurgeri de mască în jurul feței	Este posibil ca masca să fi fost montată incorect.	Urmați cu atenție instrucțiunile din „Montare”.

Masca este incomod

Este posibil ca masca să fi fost montată incorect.


Urmați cu atenție instrucțiunile din „Montare”.

Perna măștii poate fi murdară.

Curățați orificiile de ventilație conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățarea măștii acasă”.

Technical Specifications

Curba Presiune-Debit

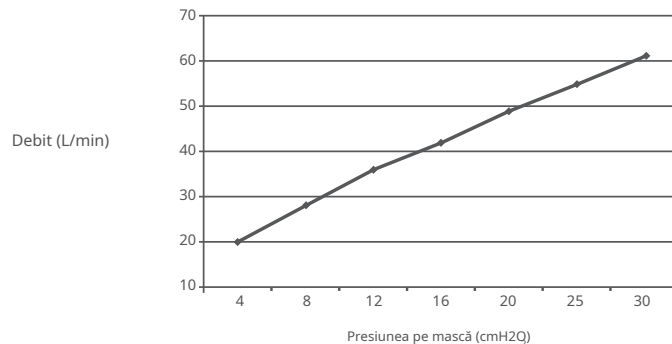

Informații despre spațiul mort

Spațiul mort este volumul gol al măștii până la punctul de pivotare. Spațiul mort al măștii variază în funcție de dimensiunile pernuteilor, dar este mai mic de 142 ml.

Presiune terapeutică

4 până la 30 cmH₂O/Cel/Ceai/Cele

Rezistență	Scădere de presiune măsurată la 50 L/min: $\leq 0,5$ cmH ₂ O la 100 L/ min: $\leq 1,5$ cmH ₂ Cel/Cea/Cei/Cele
Sunet	VALORI DE EMISIE DE ZGOMOT DECLARATE CU NUMĂR DUAL în conformitate cu ISO 4871. Nivelul de putere sonoră ponderat A al măștii este mai mic de 33 dBA, cu o incertitudine de 3 dBA. Nivelul de presiune sonoră ponderat A al măștii la o distanță de 1 m este mai mic de 25 dBA, cu o incertitudine de 3 dBA.
Condiții de mediu	Temperatura de funcționare: +5°C la 0°C la +40°C. (41° F până la 104°F) Umiditate de funcționare: 10% ~ 90% umiditate relativă fără condens Depozitare și transport: -20° De la 0°C la +60°C. (-4° F până la 140°F) Umiditate la depozitare și transport: 10% ~ 90% umiditate relativă fără condens

Notă: Sistemul de mască nu conține latex de cauciuc natural, PVC sau materiale DEHP.

Depozitare

Asigurați-vă că masca este complet curată și uscată înainte de a o depozita pentru o perioadă lungă de timp. Depozitați masca într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Eliminare

Masca nu conține substanțe periculoase și poate fi aruncată la gunoiul menajer.

Simboluri

Sistem și ambalare



Cod lot



Data fabricației



Număr de catalog



Nu este fabricat cu latex de cauciuc natural



Limitarea temperaturii



Limitarea umidității



Producător



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană



Dispozitiv medical



Data de expirare



Consultați instrucțiunile de utilizare



Pacient unic - utilizare multiplă

Atenție, consultați documentele însoțitoare.



Indică un avertisment sau o precauție și vă avertizează asupra unei posibile vătămări corporale sau explică măsurile speciale pentru utilizarea sigură și eficientă a dispozitivului.



Marcaj CE



Identificator unic al dispozitivului

Garanție limitată

Se garantează că masca, inclusiv ansamblul cadrului, perna și echipamentul de protecție pentru cap, vor fi lipsite de defecte de material și de fabricație pentru o perioadă de nouăzeci (90) de zile de la data achiziției de către consumatorul inițial.

Această garanție nu acoperă daunele cauzate de accidente, utilizare necorespunzătoare, abuz, neglijență, modificare, neutilizarea sau neîntreținerea Produsului în condiții normale de utilizare și în conformitate cu termenii din documentația produsului și alte defecte care nu au legătură cu materialele sau manoperă.