



Revizuit: 25.07.2020

Debitmetru de oxigen medical tip Click

REF VST-426

Manual

IMPORTANT!

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL.

Specificații ale „{цпнc”

Debitmetru de oxigen medical tip Click O2

- Presiune de ieșire: 50 psi
- Conexiune de intrare G, 0-15 LPM 20 C°
- Manometru bar, maxim 300 bar
- CE 2460

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Regulatorul de presiune O2 medical cu flux continuu (0-15 LPM) este destinat pacienților care necesită oxigenoterapie acasă sau în spital. Acesta este conectat la butelia de oxigen medical a pacientului și furnizează pacientului debitul de oxigen necesar, conform avizului medical.

CONTRAINDICAȚII

Produsul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute.

AVERTIZARE!

Oxigenul este un gaz neinflamabil; cu toate acestea, oxigenul îi crește substanțial riscul de a deveni inflamabil atunci când este combinat cu ulei, grăsimi și alte hidrocarburi. Aceste materiale nu trebuie niciodată utilizate sau aplicate pe nicio parte a buteliei de oxigen, a supapei buteliei sau a altor echipamente utilizate cu oxigen.

INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Aceste regulatoare sunt destinate administrării de oxigen pacienților despre care un medic consideră că au nevoie de niveluri crescute de oxigen pentru a-și îmbunătăți sau stabiliza condițiile respiratorii.
2. Oxigen într-un gaz neinflamabil; cu toate acestea, toate materialele care ard în aer vor arde MULT mai rapid în prezența oxigenului. ULEIUL ȘI/SAU GRĂSIMILE DEVIN FOARTE INFLAMABILE ÎN PREZENȚA OXIGENULUI! NU UTILIZAȚI ULEI sau grăsimi sau orice altă substanță pe bază de petrol sau inflamabilă pe sau în jurul echipamentelor de oxigen!

3. Trebuie respectate precauțiile standard din industrie atunci când sunt utilizate în alte situații aplicabile. Aceste regulatoare pot fi utilizate și în situații de urgență (unele modele nu ating debite compatibile cu aplicațiile de urgență). În orice situație care necesită oxigen de urgență, apălați imediat la un medic sau la un tehnician al Serviciului Medical de Urgență. Această unitate este un inhalator și este utilă numai pentru persoanele care respiră înainte de administrarea oxigenului.

4. Dacă folosiți un umidificator sau un dispozitiv similar, scoateți dispozitivul din regulator înainte de a schimba butelia. **NU** permite fluidelor să pătrundă. **NU** încercați să scoateți un regulator sau un umidificator dintr-o butelie dacă manometrul/manometrele indică presiune! **NU** încercați să mutați butelia decât dacă regulatorul sau umidificatorul a fost scos și capacul buteliei (dacă este cazul) este montat.


5. Verificați cu atenție supapa buteliei și regulatorul pentru a depista eventualele urme de praf, ulei și grăsime. Ștergeți piesele prăfuite cu o cârpă umedă. **NU FOLOSIȚI CILINDRUL DACĂ ESTE PREZENT ULEI SAU GRĂSIME!** Informați imediat furnizorul de gaz despre această situație.

6. Terapia cu oxigen și regulatoarele de oxigen de urgență sunt dispozitive de reducere a presiunii care scad presiunea oxigenului dintr-o butelie la un nivel care poate fi utilizat în siguranță.

7. **FUMATUL INTERZIS** – Îndepărtați chibriturile, țigările, brichetele și lichidele de aprindere de la pacient și din zona de oxigenoterapie înainte de a administra oxigen. Îndepărtați alte materiale inflamabile din zonă.

8. NU FOLOSIȚI REGULATORUL DE OXIGEN DACĂ EXISTĂ ULEI, GRĂSIME SAU ORICE CONTAMINARE SAU DACĂ EXISTĂ DETERIORATII! Duceți regulatorul la un tehnician calificat pentru curățare și/sau reparare înainte de utilizare. Inspectați filtrul de admisie al regulatorului din conexiunea de admisie pentru a vă asigura că este curat. Dacă pare murdar, duceți-l la un tehnician calificat pentru înlocuire.

DESCRIEREA CONEXIUNII DE INTRARE

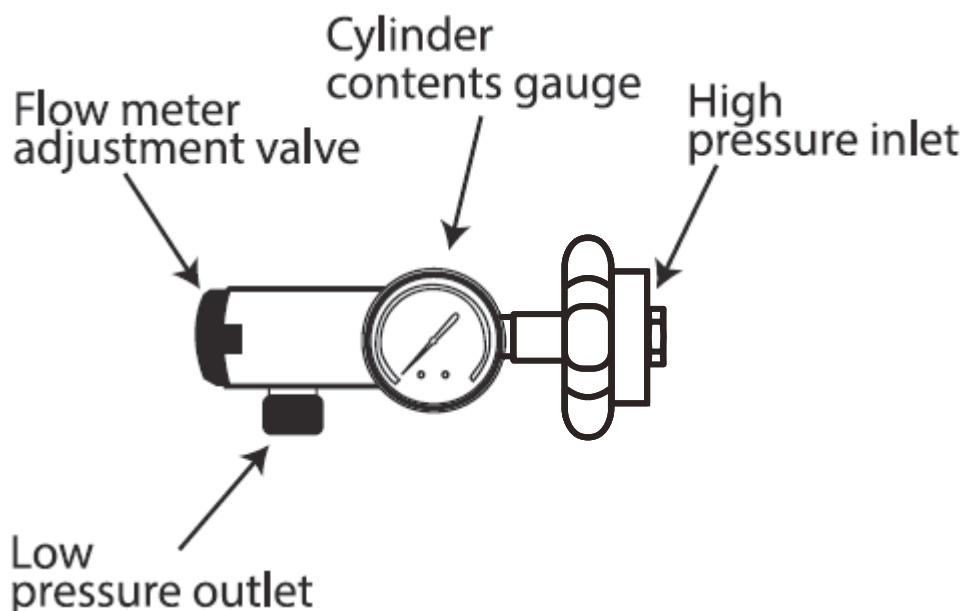

- Presiune de ieșire: 50 psi
- Intrare $\frac{3}{4}$, intrare laterală, pentru supapă de oxigen mamă cu sens orar
- Manometru de bar: 0-300 bar
- **ATENȚIE:** Asigurați-vă că șaiba de etanșare este montată pe orificiul de admisie și fixată pe supapă. Strângeți-o manual folosind roata de mână din plastic. Strângeți piulița cu o cheie adecvată (N° 24) până când este fixată pentru a asigura o conexiune etanșă. Cu ieșirea supapei orientată în direcția opusă dumneavoastră, deschideți ușor supapa cilindrului de oxigen pentru a elimina orice reziduuri nedetectabile de pe scaunul supapei, apoi închideți din nou supapa.

PRESUIZAREA REGULATORULUI - SETAREA DEBITULUI

For a click type regulator, the output pressure is fixed.

AVERTIZARE

Nu utilizați concentrații mari de oxigen mai mult de 5 ore fără întreruperi de 1 oră.
Do not adjust the output pressure without training.

OPERATION & CERINȚE PRIVIND MEDIUL DE DEPOZITARE

Este foarte important să păstrați produsul în ambalajul original timp de 12-24 de ore pentru a se aclimatiza la temperatura camerei înainte de utilizare.

Temperatura de funcționare și depozitare a regulatorului trebuie să reflecte condițiile de mediu tipice ale unei unități medicale.

Limite de mediu de funcționare: 5°C ~ 60°C (41°F ~ 140°F)

Limite de mediu de depozitare: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

Umiditate: Max 95% fără condens

TESTAREA SCURGERII REGULATORULUI

Dacă regulatorul prezintă scurgeri și trebuie scos din funcțiune și returnat pentru reparații, nu uitați să închideți întotdeauna complet robinetul buteliei înainte de a demonta sau slăbi conexiunea regulatorului.

AVERTIZARE

Temperaturile maxime și minime de funcționare nu trebuie să depășească 140°F (60°C) și nu mai puțin de 41°F (5°C).

REGLAREA DEBITULUI DE OXIGEN

Înainte de a deschide robinetul buteliei de oxigen, asigurați-vă că butonul de reglare a debitului regulatorului este în poziția oprit. Acest lucru se poate realiza rotind butonul de reglare complet în sensul acelor de ceasornic. Pentru regulatoarele de debitmetru, rotiți butonul de reglare a debitului de pe debitmetru în sensul acelor de ceasornic (oprit) până când se fixează strâns.

ÎNCHIDEREA REGULATORULUI

1. Cu oxigenul încă curgând, rotiți supapa buteliei sau cheia în sensul acelor de ceasornic până când se fixează strâns.
2. Lăsați presiunea gazului din regulator să se evacueze complet.
3. După ce a fost eliberată toată presiunea, rotiți regulatorul în poziția oprit.

ATENȚIE

- Nu utilizați și nu depozitați în apropierea căldurii sau a flăcării
- Nu perforați cilindrul în niciun fel
- Nu încercați să scoateți supapa buteliei.
- Nu aruncați niciodată butelia în foc și nu o incinerati.

DEMONTAREA REGULATORULUI DE PE CILINDRU

AVERTIZARE

NU Încercați să scoateți un regulator dintr-o butelie dacă manometrul/manometrele indică presiune!
NUNU Încercați să mutați butelia decât dacă regulatorul a fost îndepărtat și capacul buteliei (dacă este cazul) este la locul ei. Nu este necesar să scoateți regulatorul decât dacă butelia este schimbată cu una nouă. O butelie cu o presiune mai mică de 20 bar (300 PSI) pe manometrul de înaltă presiune trebuie schimbată cu o butelie plină pentru a asigura o alimentare adecvată cu apă.

oxigen. Asigurați-vă că robinetul buteliei este închis. Deschideți regulatorul pentru un moment pentru a elibera toată presiunea înainte de a-l scoate din butelie. Scoateți regulatorul din butelie slăbind conexiunea de admisie în sens invers acelor de ceasornic.

NOTA: Contrapresiunea care depășește 0,15 bar (2 PSI) va cauza o inexactitate a debitelor indicate pe butonul de reglare. Cauzele frecvente ale contrapresiunii sunt îndoirea furtunului, lungimea prea mare a acestuia între utilizator și regulator sau existența unor bariere care restricționează debitul în zona respectivă. Nu acoperiți și nu blocați orificiul de ventilație din corpul regulatorului cu etichete, autocolante sau alte materiale adezive. Blocarea orificiului de ventilație poate afecta accidental presiunea presetată a regulatorului, rezultând debite inexacte.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este de folos, luați în considerare mediul înconjurător:

1) Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile municipale (aceasta este și importanța simbolului de reciclare menționat).

2) Contactați autoritățile municipale pentru a indica punctul de eliminare a dispozitivului dumneavoastră pentru reciclare.

3) Trebuie să aruncați produsul inutil în locul potrivit

Reciclarea ajută la protejarea mediului și la valorificarea materialelor produsului dumneavoastră.

Garantie

Produsul are garanție de un (1) an

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU se aplică daunelor rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea deficitară, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor de operare ale produsului.

Daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul) și transportul efectuat de companii nu sunt acoperite de garanție.

VFormular de garanție

CumpărătorID.ata

Nume:.....

Data achiziției:.....S/N.....

LOT:.....Pgresie:

Datele distribuitorilor

Nume:.....

Adresa:.....

Telefon:.....

Stampilă de revânzător

 **Acare Technology Co., Ltd.**
5F-4 & 6F-3, No 24, Wuquan 2nd. Rd, Xinzhuang Dist.,
New Taipei City, Taiwan

 **Surpass Biomedical Europe B.V.**
Gijsbertje Louffhof 15,
1382 MG Weesp, The Netherlands

 **MOBIAC S.A.**
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA|CRETE|GREECE
TEL.: +30 28210 63222 www.mobiackcare.com

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος
Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive



Anatheoris: 25.07.2020

Ροόμετρο Ιατρικού Οξυγόνου Τύπου Κλικ

REF VST-426

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣΤΑ ΤΙΣΤΑ ΤΙΣΤΕ ΤΙΣΤΕ ΤΙΣΤΕ ΤΙΣΤΕ ΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προδιαγραφές του "VST-426"

Ροόμετρο Ιατρικού Οξυγόνου Τύπου Κλικ

- Πίεση εξόδου: 50psi
- Σύνδεση εισόδου G.3/4, 0-15 LPM 20°C.
- Μανόμετρο πίεσης , metru 300 bar
- CE2460

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο ρυθμιστής πίεσης συνεχούς ροής οξυγόνου για ιατρικό σκοπό (0-15 LPM) προορίζεται για ασθενείς που χρειάζονται οξυγονοθεραπεία στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Συνδέεται με τη φιάλη οξυγόνου του ασθενούς και παρέχει στον ασθενή την απαιτούμενη ροθηνούς και παρέχει στον ασθενή την απαιτούμενη ροθενούνωαμύνη ροθενούς με την Ιατρική Γνώματευση

ANTENDEIS

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προβλεπόμενιται.

PRODUCERE!

Το οξυγόνο είναι ένα μη εύφλεκτο αέριο. Ωστόσο, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να γίνει εύφλεκτο όταν συνδυάζεται με λάδι, γράσο κουαίς υδρογονάνθρακες. Αυτά τα υλικά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ή να εφαρμόζονται σε κανένα μέρος της φοιμοποιούνται ή να εφαρμόζονται σε κανένα μέρος της φοιμοποιούνται, βαλβίδας της φιάλης ή άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται με οξυγόνο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτοί οι ρυθμιστές προορίζονται για τη χορήγηση οξυγόνου σε ασθενείς που θεωρούνται τια τόνται οξυγόνου χρειάζονται αυξημένα επίπεδα οξυγόνου για να βελτιώσουν ή να σταθεροποιήσουν την αναπνοήσουν την αναπνεκταττουστάσάστας να βελτιώσουν.
2. Το Οξυγόνο είναι ένα μη εύφλεκτο αέριο. Ωστόσο, όλα τα υλικά που καίγονται στον αέρα θα καούν ΠΟΛΥ πιο γρήγορα παρουσία οξυγόνου. ΤΟ ΛΑΔΙ Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΣΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΞΙΑ ΟΥΣΙΑ ΥΟΥΣΙΑ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΔΙ ή γράσο ή οποιαδήποτε άλλη ουσία με βάση το πετρέλαιο ή εύφλεκτη. ουσία πάνω ή γύρω από τον εξοπλισμό ozoggόνου!

3. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυπικές προφυλάξεις του κλάδου όταν χρησιμοποιείται/ισοποιείται σε σχέση σε φυλάξεις του κλάδου περιπτώσεις. Αυτοί οι ρυθμιστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης αναγκομής (οριμαμένα den επιτυγχάνουν ροές που να είναι συμβατές με εφαρμογές έκτακτης ανάγκης). Σε οποιαδήποτε περίπτωση που απαιτείται οξυγόνο έκτακτης ανάγκης, καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή έναν τεχνικό ιατροτεχνολογικών/νωρικών προί. Αυτή η μονάδα είναι μια συσκευή εισπνοής και είναι χρήσιμη μόνο σε άτομα που αναπνέουν πριν από τη χορήγηση οξυγόνου οξυυσκευή.

4. Εάν χρησιμοποιείτε υγραντήρα ή παρόμοια συσκευή, αφαιρέστε τη συσκευή από τον ρυθμιστή/ατά παρόμοια συσκευή φιάλη. ΜΗΝ αφήνετε τα υγρά να εισέλθουν. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε έναν ρυθμιστή ή έναν υγραντήρα από μια φιάλη εάν το/τα μανόμετρο/μανόμετρα πίεσης δείχνουν πίεση! ΜΗΝ επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη φιάλη εκτός εάν ο ρυθμιστής ή ο υγραντήρας έχει αφαιρεθεί και το καπάκι της φιάλης (όταν υπάρχει) είναι έστη θέσης φιάλης.


5. Επιθεωρήστε προσεκτικά τη βαλβίδα της φιάλης και τον ρυθμιστή για σκόνη, λάδι και γράσ. Σκουπίστε τα σκονισμένα μέρη με ένα υγρό πανί. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΔΙ Ή ΓΡΑΣΟ! Ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή αερίου σας για αυτήν την κατάσταση.

6. Η οξυγονοθεραπεία και οι ρυθμιστές οξυγόνου έκτακτης ανάγκης είναι συσκευές μείωσης της μείωσης της μείωσης της έκτακτης ανάγκης την πίεση του οξυγόνου από μια φιάλη σε επίπεδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ – Απομακρύνετε τα σπύρτα, τα τσιγάρα, τους αναπτήρα αναπτήρα σπύρτα αναπτήρες από τον ασθενή και από την περιοχή οξυγονοθεραπείας πριν από τη χορήγηση οξυγόνου. Απομακρύνετε άλλα εύφλεκτα υλικά από preocheala.

8. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΔΙΑΔΟΣΛΕΙΑ/ΙΟΠΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΛΥΝΣΗ Ή ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΗΜΙΑ! Πηγαίνετε τον ρυθμιστή σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών για καθαρισμό ή/και ενπιδικευμένο τεχνικό για καθαρισμό ή/και ενπιδικευμένο τεχνικό χρήση. Ελέγξτε το φίλτρο εισόδου του ρυθμιστή στη σύνδεση εισόδου για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαί κ. Εάν φαίνεται βρώμικο, πηγαίνετε το σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών για αντικατάσταση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

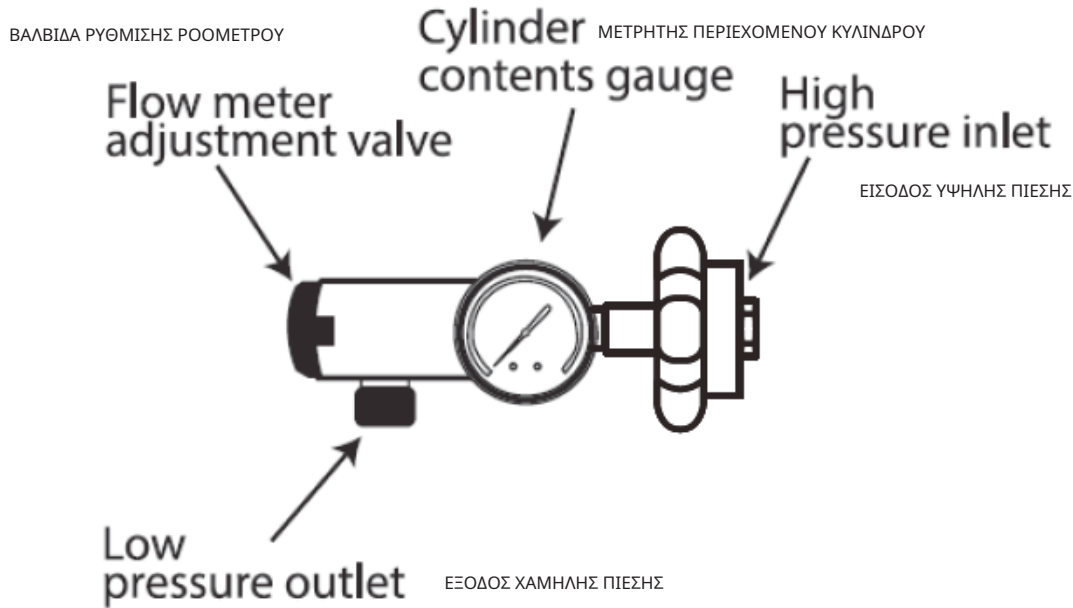

- Πίεση εξόδου: 50psi
- Σύνδεση εισόδου G3/4, πλευρική είσοδος, για δεξιόστροφη θηλυκή βαλβίδα οξυγόνου
- Μανόμετρο πίεσης , μέγιστο 300 bar
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα στεγανοποίησης είναι στη θέση της στην είσοδο και τσενση στησης βαλβίδα. Σφίξτε την χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τον πλαστικό χειροτροχό. Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κατάλληλο κλειδί (Nº 24) μέχρι να ασφαλιστεί για να εξαστεί να εξασφαλιστεί. Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κατάλληλο κλειδί (Nº 24) σύνδεση. Με την έξοδο της βαλβίδας να είναι στραμμένη μακριά από εσάς, ανοίξτε ελαφρά τη βαλβίδα τοι道府 τοι道府 μακριά από εσάς για να αφαιρέστε τυχόν μη ανιχνεύσιμα υπολείμματα από την έδρα της βαλβίδας και, στη συσαι, στη συν, έχεισασα βαλβίδα.

ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Για έναν ρυθμιστή τύπου κλικ, η πίεση εξόδου είναι σταθερή

PENTRU ORIENTARE

Μην χρησιμοποιείτε υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου για περισσότερο από 5 ώρες χωρίς διακοπή 1 oraă.

Μην προσαρμόζετε την πίεση εξόδου χωρίς να είστε εκπαιδευμένοι.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΣΚΕΥ

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία για 12-24 ώρσο στην αρχική σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.

Η θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης του ρυθμιστή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τικέτης περιβαλλοντικές συνθήκες ενός ιατρικού ιδρύματος.

Περιβαλλοντικά όρια λειτουργίας: 5°C ~ 60°C (41°F~140°F)

Περιβαλλοντικά όρια αποθήκευσης: 5°C ~ 40°C (41°F~104°F)

Valoare: Μέγιστο 95% χωρίς συμπύκνωση

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

Εάν ο ρυθμιστής παρουσιάζει διαρροή και πρέπει να αποσυρθεί από τη χρήση και να επιστραφεί, επιστραφεί να αποσυρθεί
θυμηθείτε να κλείνετε πάντα πλήρως τη βαλβίδα του δοχείου πριν αφαιρέσετε ή χαλαρώσετε του δοχείου
rutinā.

PENTRU ORIENTARE

Οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 60°C και δειπαίνουν τους μικρότερες de la 5°C.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Πριν ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ρύθμισης ροής του ροής του ροής του ότι το κουμπί ρύθμισης οξυγόνου στη θέση απενεργοποίησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα. Για τους ρυθμιστές ροής, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ροής στο μετρητή ροής δεξιόστροφα (απενεργοποιήστε το) μέχρι να ασφαλίσει.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

1.Ενώ το οξυγόνο εξακολουθεί να ρέει, περιστρέψτε τη βαλβίδα της φιάλης ή το κλειδί δεξοφιαστέψτε τη βαλβίδα της φιάλης ασφαλίσει.

2. Αφήστε την πίεση αερίου στον ρυθμιστή να διαφύγει εντελώς.

3.Αφού εκτονωθεί όλη η πίεση, γυρίστε τον ρυθμιστή στη θέση απενεργοποίησης.

PROSOXY

- Μην το χρησιμοποιείτε ή το αποθηκεύετε κοντά σε θερμότητα ή φλόγα
- Māh τρυπάτε την φιάλη με κανέναν τρόπο
- Māh επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη βαλβίδα της φιάλης.
- Māh πετάτε ποτέ την φιάλη στη φωτιά ή προσπαθήσετε να την κάψετε

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ

PENTRU ORIENTARE

ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε έναν ρυθμιστή από φιάλη εάν το/τα μανόμετρο/μανόμετρο/μανόμετρο/μανόμετρο/τεχιστή

πίεση!ΜΗΝ επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη φιάλη εκτός εάν έχει αφαιρεθεί ο ρυθμιστής!ΜΗΝ επιχειρήσετε τη φιάλη εκτός εάν έχει αφαιρεθεί ο ρυθμιστής! ΜΗΝ επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη φιάλη εκτός εάν έχει αφαιρεθεί ο ρυθμιστής!

(όταν υπάρχει) βρίσκεται στη θέση του. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τον ρυθμιστή εκτός εάν η φιάλη

πρόκειται να αντικατασταθεί με μια καινούργια. Μια φιάλη με πίεση μικρότερη από 20 bar (300 PSI) π

εμφανίζεται στο μανόμετρο υψηλής πίεσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια πλήρη φιά πίεσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια πλήρη φιάστια γλήρη φιάνλη αγιδιστφ η

επαρκής παροχή οξυγόνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πίεση επιστροφής που υπερβαίνει τα 0,15 bar (2 PSI) που υποδεικνύονται στο κουμπί ρύθμισης. Συνήθεις αιτίες είναι η συστολή του σωλήνα, η πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ του χρήστη και του ρυθμιστή ή τυχόν εμπόδια που περιορίζουν τη ροή που συμψήνι συμψήσεν την περιοχή. Μην καλύπτετε ή σφραγίζετε την οπή εξαερισμού στο σώμα του ρυθμιστή με ετικετέος, αυλητοκόος ή άλλο αυτοκόλλητο υλικό. Ο φραγμός της οπής εξαερισμού μπορεί να επηρεάσει ακούσια την προκαθορισμένη πίεση του ρυθμιστή, με αποτέλεσμα ανακριβείς ρυθμούς ροής.



Η ανακύκλωση βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη λειτουργία των υλικών των προϊόντων.

CE₂₄₆₀

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive