
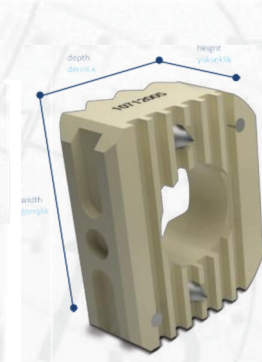


BIA, CAGE CERVICAL ANTERIOR din PEEK

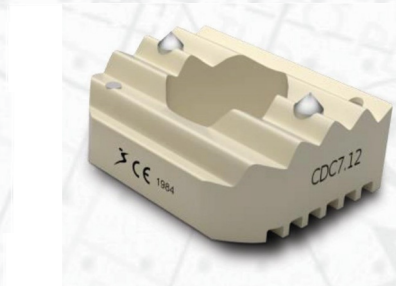


Adancime x Latime	Inaltime	Cod Referinta
12 x 14	H4	BOSCC412
	H5	BOSCC512
	H6	BOSCC612
	H7	BOSCC712
	H8	BOSCC812
13 x 15	H4	BOSCC413
	H5	BOSCC513
	H6	BOSCC613
	H7	BOSCC713
	H8	BOSCC813
14 x 16	H4	BOSCC414
	H5	BOSCC514
	H6	BOSCC614
	H7	BOSCC714
	H8	BOSCC814

* Optional, sunt disponibile si inaltimele H9, H10 si H11.

Conform cu originalul



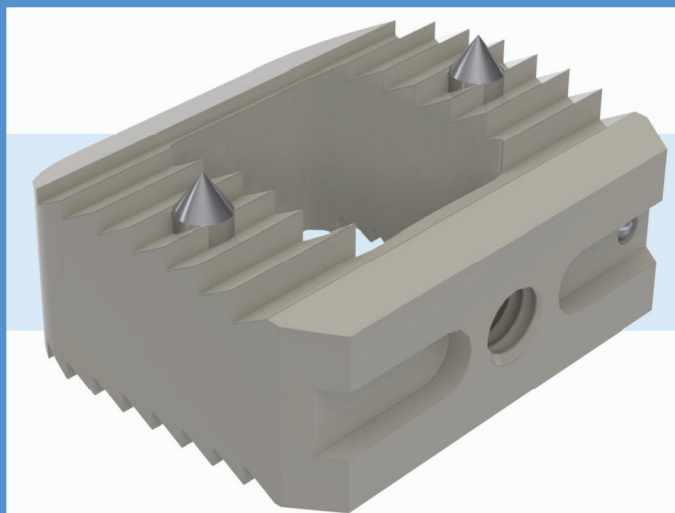

BIA

CAGE ANTERIOR CERVICAL din PEEK

Tehnica chirurgicala
Implanturi - Instrumentar



Conform cu originalul



OSIMPLANT
Spine Restoration Technology

BIA



Conform cu originalul



TABEL MASURATORI

 LUNGIME (L) LENGTH (L) LATIME (W) WIDTH (W) HIGH (H) INALTIME (H)	12 L x 14 W mm	13 L x 15 W mm	14 L x 16 W mm
	H4 H5 H6 H7 H8	H4 H5 H6 H7 H8	H4 H5 H6 H7 H8



OSIMPLANT
Spine Restoration Technology

BIA PREPARARE PRE-IMPLANTARE


Discectomia

Cu o tehnică chirurgicală adecvată, aria unde implantul va fi plasat este curată de discul cervical. Si zonele adiacente sunt pregătite pentru implantare..




Bia - Tepusa

Dupa ce au fost facute procedurile de curatare a discului, se foloseste tepusa pentru a crea o gaura speciala ce permite intrarea pinului de distractare din instrumentar.

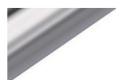

Conform cu originalul

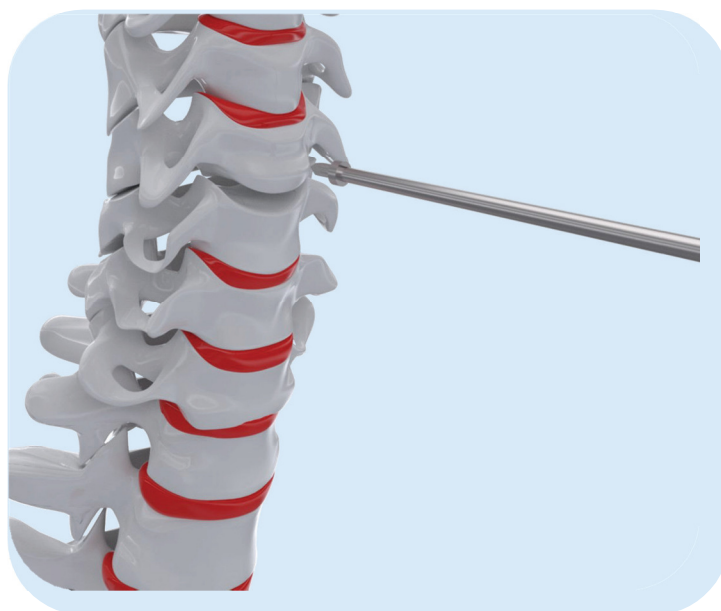

Bia - Distractorul Caspar si Pini Caspar

.Acesti pini se folosesc pentru deschiderea spatiului discal. Daca reste posibil, inserati cei 2 pini in mijlocul vertebrei inferioare si superioare folosind instrument Pin Driver.




Conform cu originalul



Bia - Distractorul Caspar si Pini Caspar

Este recomandat ca pinii sa fie inserati la cel puțin 5 mm de de end-plate ult fiecarei vertebre adiacente. Apoi montati distractorul canulat Caspar prin acesti pini. Spatiul discal poate fi deschis deschizand distractorul cu ajutorul cheii de pe bara zimtata.

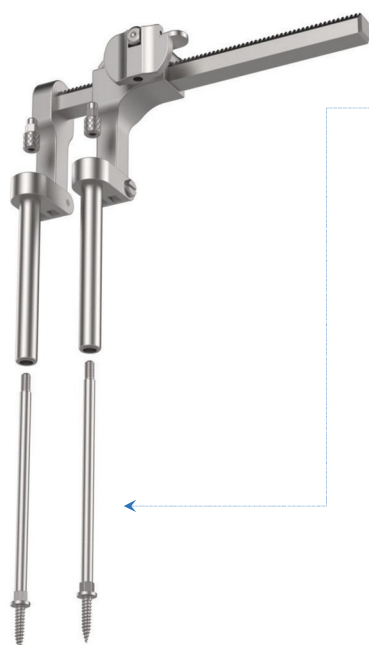

SELECTIA IMPLANTULUI


Conform cu originalul



PROBA




Proba de implant BIA este destinata pentru a se folosi cu holderul de implant. Incepand cu cea mai mica marime, secvential se incearca probele in mod crescator. Cea mai potrivita proba ce se potriveste in disc este selectata .Proba aleasa confirma si paralelismul end-plate-urilor preparate anterior. Proba trebuie sa se potriveasca perfect, strans in spatiul discal. Daca nu s potriveste si spatiul este lax se foloseste urmatoarea proba.

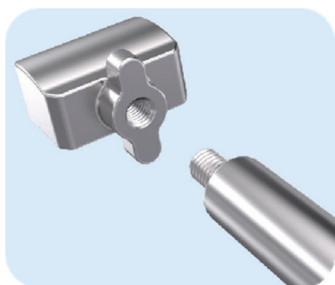




TABEL MASURATORI PROBE

12 L x 14 W mm	13 L x 15 W mm	14 L x 16 W mm
H4	H4	H4
H5	H5	H5
H6	H6	H6
H7	H7	H7
H8	H8	H8

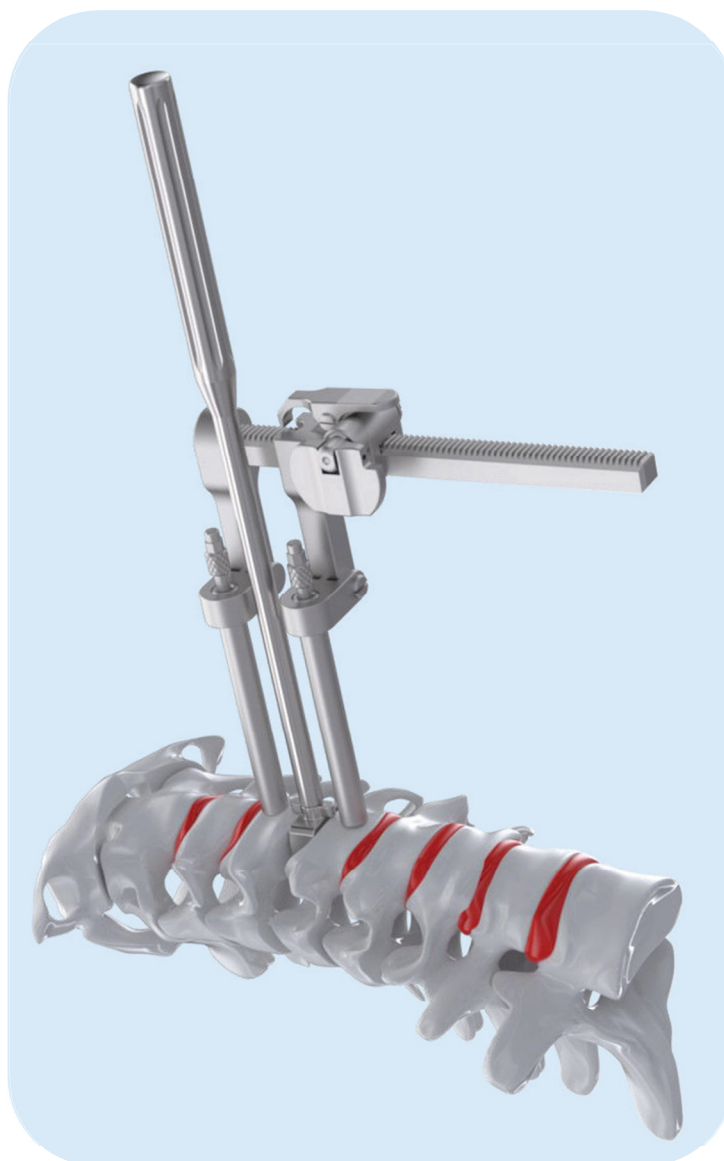

INSERTIA IMPLANTULUI

BIA

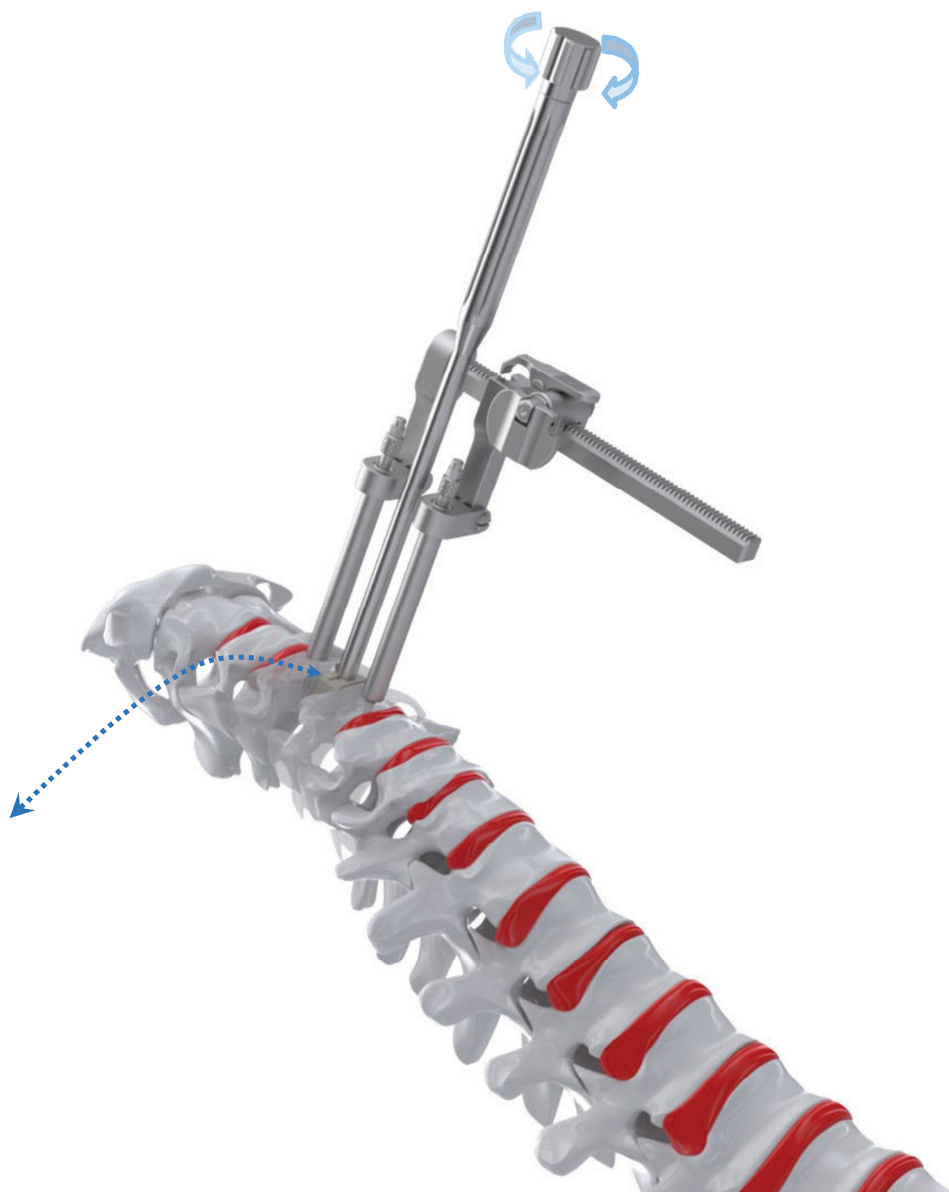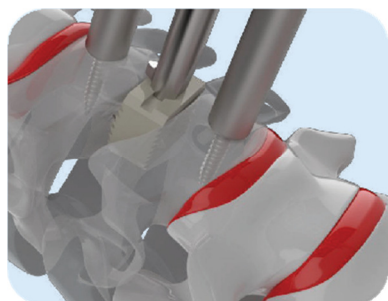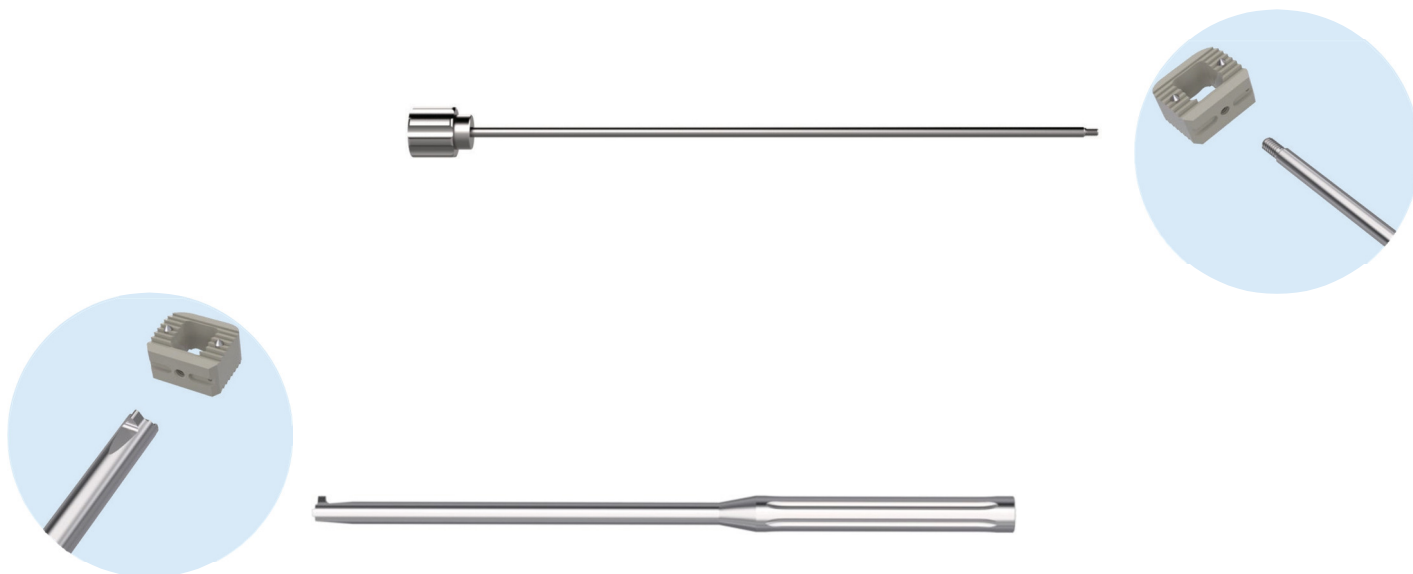


Conform cu originalul



Bia Impactor Liber - Bia (Ciocan)

Pozitionati implantul si manerul in pozitia corecta cranio-caudal si inseratile atent in spatiul discal creat. Cage-ul cervical este impactat folosind ciocanul Bia , in timp ce distractarea este mentinuta. Eliberati distractorul Caspar si indepartati si resul instrumentelor.

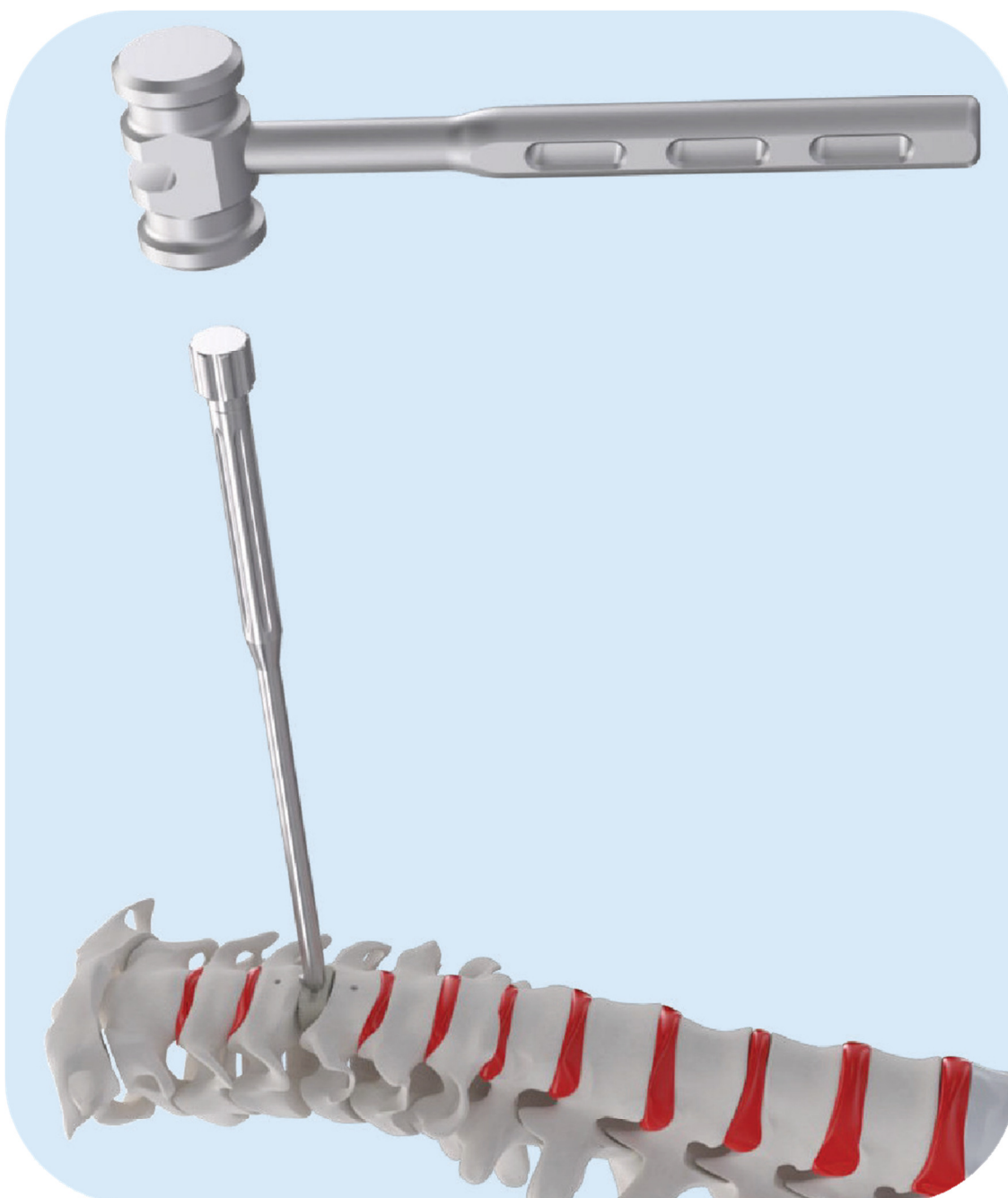


Conform cu originalul



BIA Indepartarea Implantului

Bia Impactor Liber - Bia (Ciocan)


Aceasta procedura este reversa procedeului de implantare. Fixati impactorul in implant. Invertiti manerul impactorului la 90 grade invers acelor de ceasornic intr-o maniera controlata. Cand manerul devine vertical cage-ul este extras.

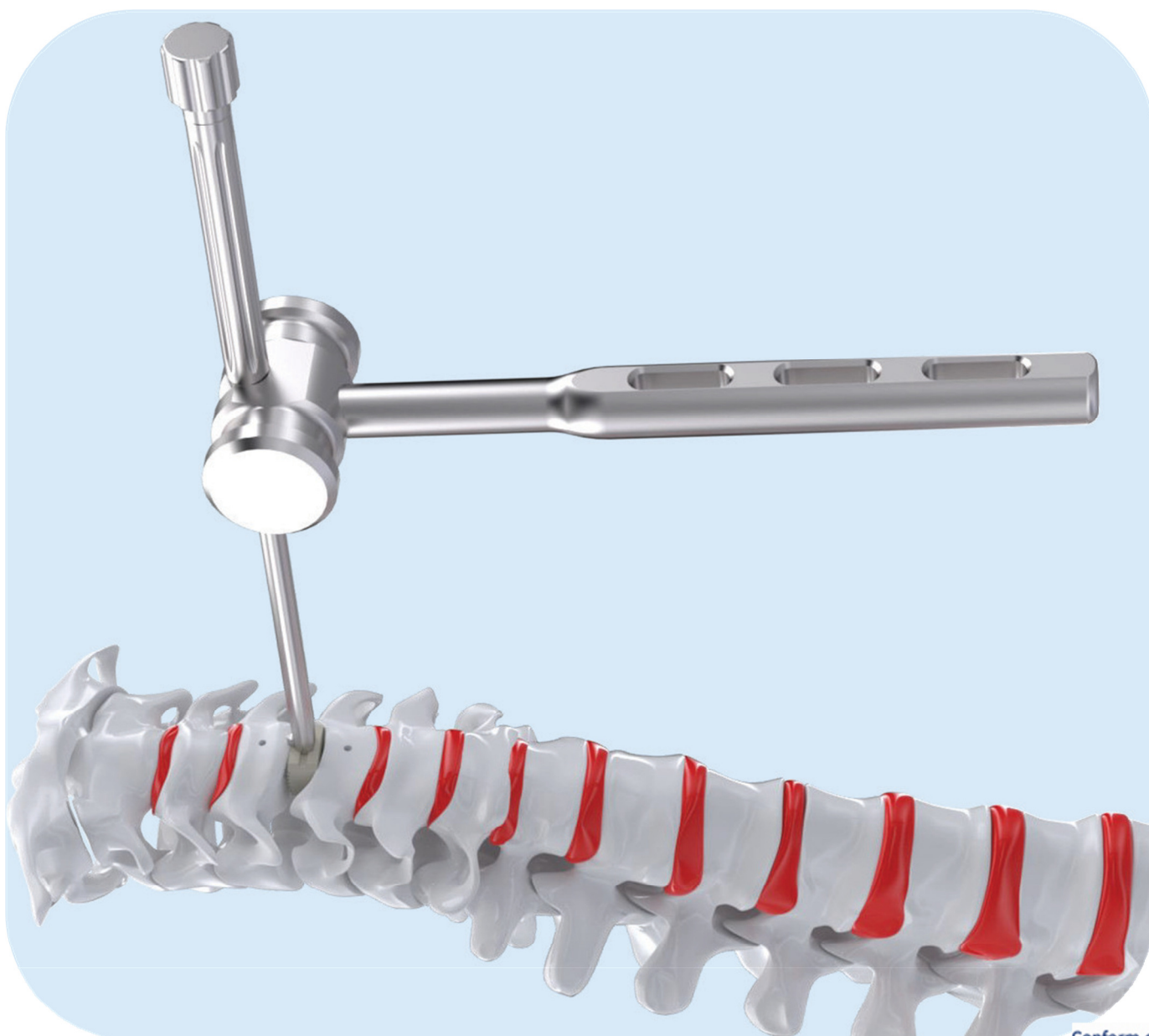

Conform cu originalul



BIA

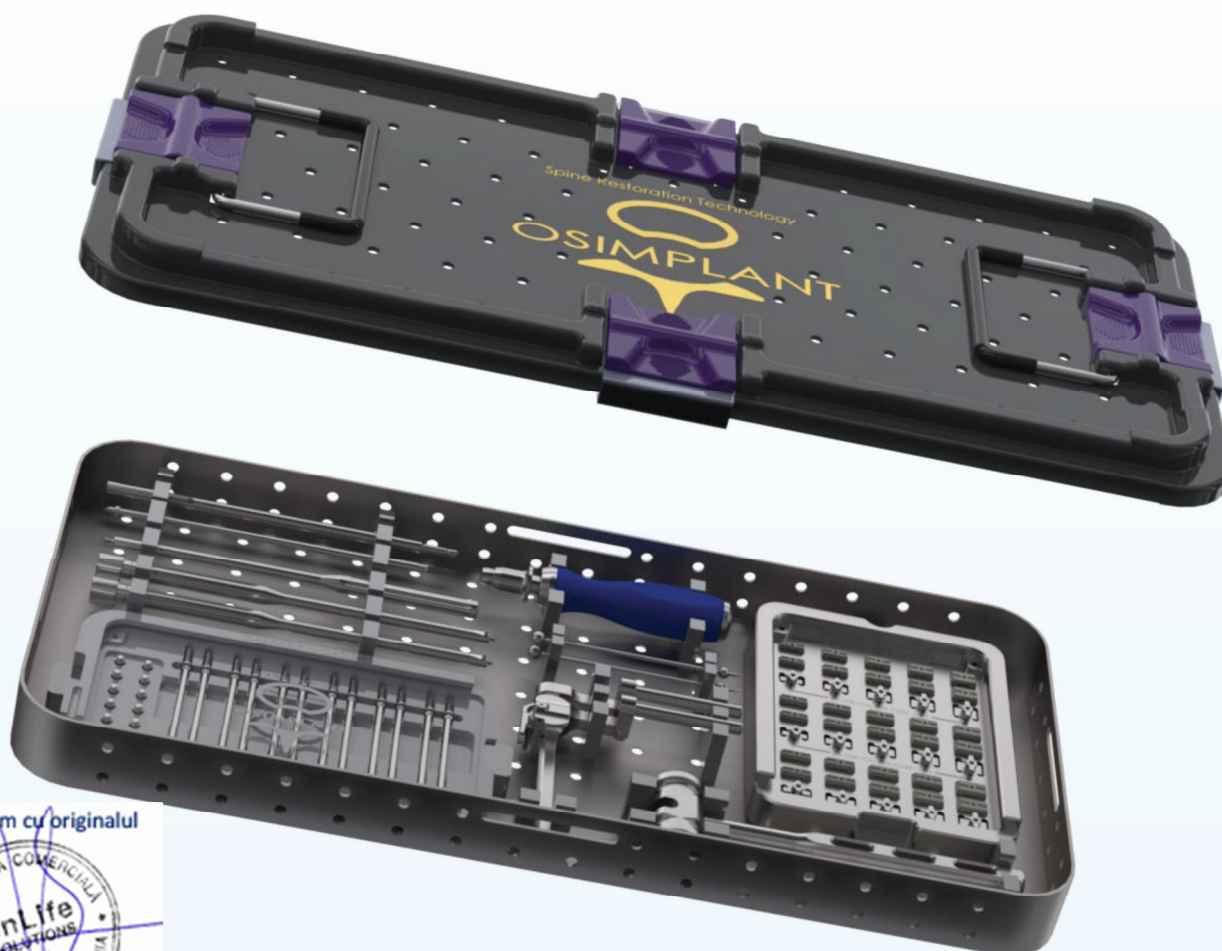

Conform cu originalul



Pentru mai multe informatii: www.osimplant.com

HEADQUARTER

Osimplant Tibbi Malzemeler

Ilkbahar Mh., Galip Erdem Cd.
(571. Cad.) No:47, 06550

Çankaya/Ankara, Turkey

T: +90 312 473 82 80 – 473 22 80

F: +90 312 473 81 90



FABRICA

İkitelli O.S.B.14. Cd. MuVakçılar
Sanayi Sitesi, 4 Blok No:47

Phone: +(90) 212 485 40 32

Fax: +(90) 212 485 40 34

info@bonimplant.com.tr