ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Masă de masaj pliabilă din lemn Balance Lux, cu 2 segmente, 190x70 cm



Importator:
ACTIVESHOP sp. z o.o.
str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

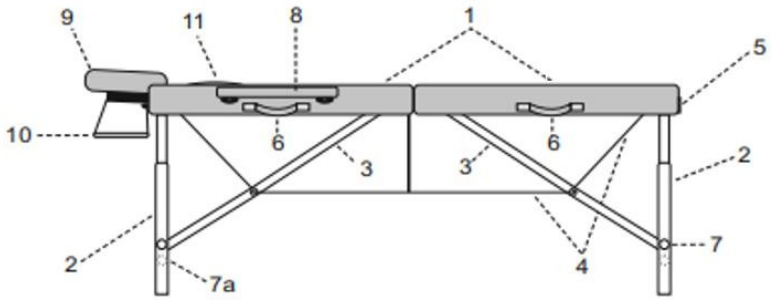
Scanează pentru diferit limbi

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.
Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru viitor.

Masa de masaj pliabilă BALANCE Lux cu picioare din lemn este o soluție practică și versatilă, conceput pentru activitatea zilnică a maseurilor, fizioterapeuților și a altor specialiști. Construcția din două segmente asigură stabilitate și confort atât pentru persoana care efectuează tratamentul, cât și pentru pacient. Datorită Datorită dimensiunilor compacte, greutății reduse și husei incluse, se pretează perfect și pentru lucrul în deplasare – permițând plierea și transportul rapid și comod.

Date tehnice	
Materialul tapițeriei	Piele sintetică
Umplutură	Spumă
Sarcina maximă	225 kg

Structura aparatului:



1. Blaturile mesei
2. Picioare
3. Suporturi pentru blat
4. Tensionare cu cablu
5. Închizătoare tip valiză
6. Mânere de transport
7. Șuruburi / bolțuri pentru reglarea înălțimii 7a. Șuruburi suplimentare
8. Cotiere
9. Tetieră
10. Raft pentru brațe
11. Capac pentru decupajul pentru față

Instrucțiuni de asamblare

1. Masa pliată seamănă cu o valiză. Deschideți încuietorile și desfășurați blaturile mesei
2. Scoateți accesoriile (cotiere, tetieră și suport pentru brațe)
3. Desfășurați picioarele în exteriorul mesei



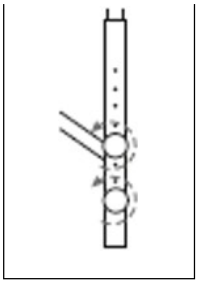
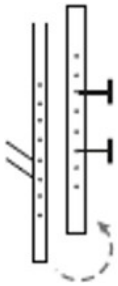
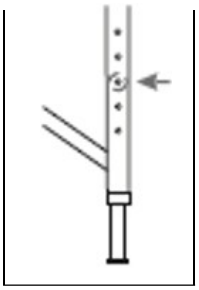
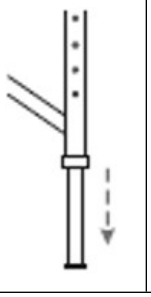
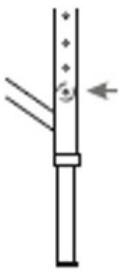
4. Așează masa pe picioare și apasă-o la îmbinarea blaturilor
5. Verificați tensiunea cablului
6. Reglați înălțimea preferată a blatului conform instrucțiunilor de mai jos
7. Introduceți cotierele în orificiile situate pe partea laterală a mesei

8. Fixați perna de capătul patului cu ajutorul velcro-ului, apoi introduceți capătul patului în orificiile situate în partea superioară a patului. Folosiți dispozitivul de blocare pentru a fixa capătul patului în poziția dorită.



Raftul pentru brațe poate fi fixat în două moduri

Reglarea înălțimii:

1	2	3	Mese	Descrierea operațiunilor
			Din lemn	1. Deșurubați șuruburile care fixează suporturile de picioarele mesei. 2. Reglați suporturile la înălțimea dorită. 3. Strângeți șuruburile.
			Din aluminiu	1. Apăsați știftul de blocare. 2. Mutați suportul pentru blat în poziția dorită. 3. Aliniați orificiul cu știftul.

Atenție

- Înainte de a așeza pacientul, asigurați-vă că picioarele exterioare sunt poziționate corect, iar cablurile sunt în stare bună și sunt tensionate corespunzător.
- Sarcina maximă a mesei de masaj este de 225 kg.

Recomandări:

1. Masa este destinată utilizării în interior.
2. Este interzisă schimbarea poziției mesei atunci când aceasta este sub sarcină.
3. Este interzis să săriți brusc pe masă, precum și să vă așezați, să îngenuncheați și să vă sprijiniți direct de tetieră și de cotiere.
4. Masa poate fi transportată numai în stare pliată și cu sistemul de blocare asigurat.
5. La plierea mesei, trebuie să se acorde atenție poziționării cablurilor. Nu blocați cablurile.
6. Masa trebuie utilizată și depozitată departe de surse directe de foc și căldură.
7. Utilizat corespunzător, masa poate funcționa fără defecțiuni timp de mulți ani.
8. Deteriorările apărute ca urmare a nerespectării indicațiilor de mai sus nu constituie motiv de reclamație.

Dimensiunile aparatului



Dimensiuni după asamblare 95 x 70 x 15 cm

Curățare și întreținere:

Pentru a menține produsul în stare tehnică bună și a-i asigura o durată de viață cât mai lungă, este necesar să îl curățați și să îl întrețineți în mod regulat.

- Suprafața patului – folosiți o cârpă curată și moale. Puteți utiliza o cantitate mică de produs special pentru curățarea și impregnarea pieilor sintetice.
- Suprafețele din lemn sau placaj trebuie curățate cu o cârpă moale, ușor umezită, apoi uscate bine. Nu folosiți produse chimice.

Atenție!

Lemnul, ca material natural, poate prezenta diferențe în ceea ce privește dispunerea anelor, nuanțele de culoare și de prezența unor elemente naturale, cum ar fi dungi sau puncte. Acestea nu constituie un defect al produsului – dimpotrivă, ele atestă autenticitatea și originea naturală a acestuia. Astfel de caracteristici nu constituie un motiv de reclamație.

Măsuri de siguranță:

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau încercarea de a-l utiliza în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de service și reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat,
   b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare este deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a aparatului.
7. Nu introduceți obiecte străine în interiorul aparatului. În cazul în care un obiect nedorit pătrunde în interior, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a garanta durata de viață specificată a aparatului, se recomandă să se aștepte un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestui echipament, cu condiția să li se asigure supravegherea corespunzătoare sau instruirea privind utilizarea corectă și în condiții de siguranță, iar riscurile asociate să fie înțelese.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia se află în apropiere.
4. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea aparatului



În scopul protejării mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Respectați regulile privind aruncarea acestui tip de echipamente și nu le aruncați în containerele pentru deșeuri menajere.

La sfârșitul duratei de viață, aceste aparate conțin în continuare componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (–)20 °C și (+)40 °C, exclusiv în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, la o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+)10 °C și (+)40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, nu se permite aruncarea sau scăparea aparatului pe jos, nici expunerea acestuia la șocuri mecanice sau la intemperii.