

# Ръководство на потребителя за апарат за кръвно налягане Beurer BM 23




Отидете на страница 2 преди да прочетете тези инструкции за употреба.

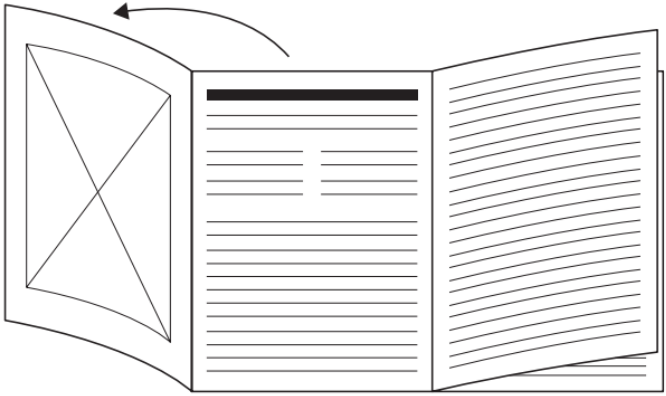

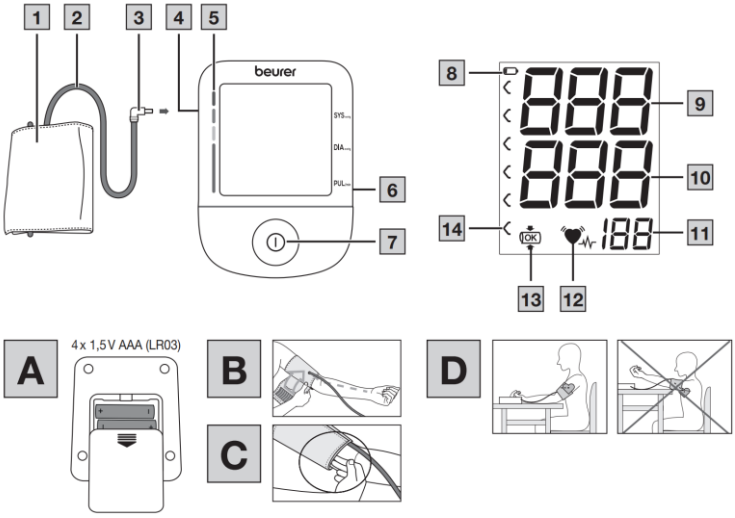


Прочетете внимателно тези инструкции за употреба. Спазвайте предупрежденията и бележките за безопасност. Запазете тези инструкции за употреба за бъдещи справки. Направете инструкциите за употреба достъпни за други потребители. Ако устройството бъде предадено, предоставете инструкциите за употреба и на следващия потребител.

## 1. КЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА:

Проверете дали външната страна на картонената опаковка за доставка е непокътната и се уверете, че цялото съдържание е включено в доставката.
Преди употреба се уверете, че няма видими повреди по устройството и аксесоарите и/или резервните части и че целият опаковъчен материал е отстранен. Ако имате някакви съмнения, не използвайте устройството и се

свържете с вашия търговец или на посочения адрес за обслужване на клиенти.

- Апарат за измерване на кръвното налягане в горната на част на ръката
- Маншет за горната част на ръката (22-42 см)
- Батерии, вижте точка „Технически спецификации“
- Торбичка за съхранение
- Инструкции за употреба

## 2. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ:

Следните символи са използвани в тези инструкции за употреба, върху опаковката и върху типовата табела за устройството и аксесоарите:

| |
|---|
| ⚠ WARNING<br><br>**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**<br>Показва потенциално непосредствена опасност. Ако не бъде избегната, ще настъпи смърт или сериозно нараняване. |
| ⚠ CAUTION<br><br>Показва потенциално непосредствена опасност. Ако не бъде избегната, може да възникнат леки или малки наранявания. |
| **Информация за продукта**<br>Забележка за важна информация |
| **Спазвайте инструкциите**<br>Прочетете инструкциите, преди да започнете работа и/или да работите с устройства или машини |
| Изхвърляне в съответствие с Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване – WEEE. |

| | |
|---|---|
|   | Не изхвърляйте батерии, съдържащи вредни вещества, заедно с битовите отпадъци |
|  | Производител. |
|  | Дата на производство. |
|  | CE етикетът удостоверява, че продуктът отговаря на основните изисквания на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските продукти. |
|  | Разделете продукта и елементите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. |
|   | Маркировка за идентифициране на опаковъчния материал.<br>A = Код на материала, B = Номер на материала: 1-7 = Пластмаса, 20-22 = Хартия и картон |
|  | Продуктът може да се рециклира, подлежи на разширена отговорност на производителя и се събира отделно. |
|   | Защитен срещу твърди чужди предмети с диаметър 12,5 mm и по-големи и срещу вертикално падащи капки вода. |
|  | Постоянен ток/напрежение. |
|   | Уникален идентификатор на устройството (UDI) Идентификатор за уникална идентификация на продукта |
|   | Обозначение на партидата |
|   | Номер на артикула |
|   | Сериен номер |

| | |
|---|---|
| MD | Медицинско изделие |
| # | Тип номер |
|  | **Приложна част тип BF** |
|  | Температурен диапазон |
|  | Диапазон на влажност |
|  | Ограничение на атмосферното налягане |
|  | Вносител |

**3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:**

**Предназначение:**

Апаратът за кръвно налягане (наричан по-долу апарат) е предназначен за напълно автоматично, неинвазивно измерване на стойностите на артериалното кръвно налягане и пулса на горната част на ръката.

Той е предназначен за самостоятелно измерване от възрастни в домашна среда.

**Предвидени потребители:**

Измерването на кръвното налягане е подходящо за възрастни потребители, чиято обиколка на горната част на ръката е в диапазона, отпечатан върху маншета.

**Клинични ползи:**

Потребителят може бързо и лесно да записва своите стойности на кръвното налягане и пулс с помощта на устройството. Записаните стойности се класифицират според международно приложимите насоки и се оценяват

графично. Освен това, устройството може да открие всеки нередовен сърдечен ритъм, възникнал по време на измерване, и да информира потребителя чрез символ на дисплея.

**Показания:**

В случай на хипертония или хипотония, потребителят може самостоятелно да следи стойностите на кръвното си налягане и пулса си у дома.

Въпреки това, не е необходимо потребителят да страда от хипертония или аритмия, за да използва устройството.

**Противопоказания:**




- Не използвайте апарата за кръвно налягане върху новородени, деца или домашни любимци.
- Лицата с намалени физически, сетивни или умствени способности трябва да бъдат наблюдавани от лице, отговорно за тяхната безопасност, и да получават инструкции от това лице как да използват устройството.
- Не използвайте устройството, ако използвате електрически импланти (напр. пейсмейкъри).
- Не използвайте устройството, ако имате метални импланти.
- Не използвайте маншета при хора, които са претърпели мастектомия или които имат отстранени лимфни възли.
- Не поставяйте маншета върху рани, тъй като това може да причини допълнително нараняване.
- Не поставяйте маншета, ако имате артерии или вени, които са подложени на медицинско лечение, напр. интраваскуларна терапия или артериовенозен шънт.
- Не използвайте уреда при хора с алергии или чувствителна кожа.

**Нежелани странични ефекти:**

- Дразнене на кожата**.**
- Негативно влияние върху кръвообращението.

## 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

**Основни предупреждения:**




- Измерените от Вас стойности са само за Ваша информация. Те не могат да заменят медицинския преглед. Обсъдете измерените стойности с Вашия лекар и никога не основавайте никакви медицински решения на тях (напр. лекарства и тяхното приложение).
- Устройството е предназначено само за целите, описани в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди в резултат на неправилно или небрежно използване.
- Използването на апарата за кръвно налягане извън домашната ви среда или в движение (напр. докато пътувате с кола, линейка или хеликоптер, или докато извършвате физическа дейност, като например спортуване) може да повлияе на точността на измерването и да причини неправилни измервания.
- Сърдечносъдовите заболявания могат да предизвикат неправилно отчитане на стойностите. Ако имате някое от следните състояния, е важно да се консултирате с Вашия лекар преди да използвате устройството:
  - Сърдечна аритмия, нарушения на кръвообращението, диабет, бременност, преeклампсия, хипотония, втрисане, треперене.
- Не използвайте устройството едновременно с други медицински електрически устройства (ME оборудване). Това може да доведе до повреда на измервателното устройство и/или неточно измерване.
- Не използвайте устройството извън посочените условия за съхранение и работа. Това може да доведе до неправилни измервания.
- Използвайте само маншетите, включени в доставката или описани в тези инструкции за употреба с устройството. Използването на различен маншет може да доведе до неточни измервания.

- Имайте предвид, че при надуване на маншета функциите на засегнатия крайник може да бъдат нарушени.
- Не извършвайте измервания по-често от необходимото. Поради ограничаването на кръвния поток може да се появят синини.
- По време на измерването на кръвното налягане не трябва да се спира кръвообращението за ненужно дълго време. Ако устройството не функционира правилно, отстранете маншета от ръката.
- Поставете маншета само върху горната част на ръката. Не поставяйте маншета върху други части на тялото.
- Въздушният маркуч представлява риск от удушаване за малки деца.
- Малките части могат да представляват опасност от задавяне за малки деца, ако бъдат погълнати. Следователно те винаги трябва да бъдат наблюдавани
- Пазете опаковъчния материал далеч от деца. Съществува риск от задушаване.
- Пазете от деца, домашни любимци и вредители.
- Не изпускайте, не стъпвайте и не разклащайте устройството.
- Не разглобявайте устройството, тъй като това може да причини повреда, неправилна работа и неизправности.
- Не модифицирайте устройството.
- За да се изключи разликата между лявата и дясната ви ръка, първоначално измерването трябва да се направи на двете ръце.
- Никога не работете с устройството по време на работа по поддръжката му. Работата по поддръжката включва поддръжка, проверка и ремонт.
- Използвайте леснодостъпна връзка към електрическата мрежа, така че щепселът да може да се извади бързо, ако е необходимо.

**Общи предпазни мерки:**

**⚠ CAUTION**

- Апаратът за кръвно е изработен от прецизни електронни компоненти. Точността на измерените стойности и експлоатационният живот на уреда зависят от внимателната му употреба.
- Пазете уреда от удари, влага, мръсотия, значителни температурни колебания и пряка слънчева светлина.
- Уверете се, че устройството е на стайна температура, преди да направите измерване. Ако измервателният уред е бил съхраняван близо до максималните или минималните температури за съхранение и транспортиране и е поставен в среда с температура 20 °C, се препоръчва да изчакате прибл. 2 часа преди да използвате апаратът за кръвно налягане.
- Не използвайте устройството в близост до силни електромагнитни полета и го дръжте далеч от радиосистеми или мобилни телефони.
- Препоръчваме да извадите батериите, ако устройството няма да се използва за продължителен период от време.
- Избягвайте всякакво механично ограничаване, натиск или огъване на маншета.

**Относно батериите:**

**⚠ WARNING**

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- **Риск от задавяне!** Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане.
- Незабавно потърсете медицинска помощ при поглъщане на батериите.
- **Риск от експлозия!** Не хвърляйте батериите в огън.
- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа. Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Не разглобявайте, срязвайте или мачкайте батериите.
- Съблюдавайте + и – поляритета на батериите.

**⚠ CAUTION**

- Пазете батериите от силна топлина.
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.
- Ако устройството няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите от отделението за батерии.
- Използвайте само идентични или еквивалентни по вид батерии.
- Винаги сменяйте всички батерии едновременно.
- Не използвайте презаредими батерии.

**Бележки относно електромагнитната съвместимост:**

**⚠ CAUTION**

- Устройството е подходящо за използване във всички среди, изброени в тези инструкции за употреба, включително домашна среда.
- Използването на устройството може да бъде ограничено при наличие на електромагнитни смущения. Това може да доведе до проблеми като съобщения за грешка или повреда на дисплея/устройството.
- Избягвайте да използвате това устройство директно до други устройства или подредено върху други устройства, тъй като това може да доведе до неправилната му работа. Ако обаче е необходимо устройството да се използва по описания начин, това устройство, както и другите устройства, трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че работят правилно.
- Употребата на аксесоари, различни от посочените или предоставени от производителя на това устройство, може да доведе до увеличаване на електромагнитните емисии или намаляване на електромагнитната устойчивост на устройството; това може да доведе до неправилна работа.
- Дръжте преносимите радиочестотни комуникационни устройства (включително периферно оборудване, като

антенни кабели или външни антени) на разстояние най-малко 30 см от всички части на устройството, включително всички кабели, включени в доставката.
- Неспазването на горното може да влоши работата на устройството.

## 5. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА:

1. Маншет
2. Маркуч на маншета
3. Конектор на маншета
4. Букса за конектора на маншета (отляво)
5. Индикатор за риск
6. Връзка за захранващ адаптер
7. Бутон за Включване и Изключване
8. Индикатор за изтощена батерия
9. Систолично налягане
10. Диастолично налягане
11. Изчислена стойността на пулса
12. Символ за сърдечна аритмия / Символ за пулс
13. Контрол на положението на маншета
14. Индикатор за риск

## 6. УПОТРЕБА:

**Първоначална употреба:**

**Поставяне на батерии**

- Махнете капака на отделението за батерии на гърба на уреда **(A)**.
- Поставете батерии (вижте точка “Технически спецификации”). Поставете батериите, като се уверите, че поляритетът е правилен според етикета **(A)**.
- Затворете капака на отделението за батерии.

Ако индикаторът за слаба батерия седи на дисплея, измерванията вече са невъзможни и трябва да смените батериите. Подменете всички батерии.

**Употреба на ток:**
Можете също така да работите с това устройство със захранваща част (не е включена в доставката). Въпреки това, преди да свържете устройството към електрическата мрежа, моля, уверете се, че сте извадили батериите от устройството. По време на работа на ток не трябва да има батерии в отделението за батерии, тъй като това може да повреди устройството.

- За да се избегнат евентуални повреди, устройството може да работи само със захранваща част, която отговаря на спецификациите, описани в точка „Технически спецификации“.
- Освен това захранващата част трябва да бъде свързана само към мрежовото напрежение, посочено на типовата табела.
- Включете захранващия адаптер в предвидения за целта контакт на апарата за кръвно налягане.
- След това вкарайте щепсела на захранващата част в контакта.
- След като използвате апарата за кръвно налягане, първо изключете захранващата част от контакта и след това го изключете от апарата за кръвно налягане.

**Преди измерване на кръвното налягане:**
**Общи правила при измерване на собственото Ви кръвно налягане:**

- За да генерирате информативен профил на промените във вашето кръвно налягане, който може да се използва за сравнения, трябва да измервате кръвното си налягане редовно и винаги по едно и също време на деня.
- Измервайте кръвното си налягане два пъти на ден: веднъж сутрин след ставане и веднъж вечер.
- Винаги извършвайте измерването, когато сте достатъчно физически отпочинали. Избягвайте да правите измервания в стресови моменти.
- Не правете измерване в рамките на 30 минути след хранене, пиене, пушене или тренировка.

- Преди първоначалното измерване на кръвното налягане винаги почивайте за около 5 минути.
- Ако искате да направите няколко последователни измервания, винаги се уверете, че минават 5 минути между всяко измерване.
- Повторете измерването, ако имате съмнения относно измерената стойност.

**Позициониране на маншета:**
Можете да измерите кръвното си налягане на двете ръце. Някои отклонения между стойностите на дясната и лявата ръка са напълно нормални. Винаги извършвайте измерването на ръката с по-високи стойности на кръвното налягане. Консултирайте се с Вашия лекар за това, преди да започнете самостоятелното си измерване.

- Винаги измервайте кръвното си налягане на една и съща ръка.
- Използвайте устройството само с предоставения маншет, въз основа на обиколката на горната част на ръката.
- Преди да направите измерването, проверете пасването, като използвате индекса, описан по-долу.
- Оголете горната част на ръката си. Кръвообращението на ръката не трябва да се възпрепятства от тесни дрехи или други подобни.
- Маншетът трябва да бъде поставен върху горната част на ръката, така че долният ръб да е позициониран на 2-3 cm над лакътя и над артерията. Линията трябва да сочи към центъра на дланта тук **(B).**
- Маншетът трябва да бъде закопчан така, че два пръста да пасват под маншета, когато е затворен **(C).**
- Сега свържете маркуча на маншета към конектора на маншета.
- Маншетът е подходящ за вас, ако обозначението (▼) попада в ОК интервала след поставянето му върху ръката.

**Правилна поза за измерване на кръвно налягане:**

- Седнете в удобна изправена позиция, когато измервате кръвното си налягане. Облегнете се назад, така че гърбът ви да е подпрян.
- Поставете ръката си върху хоризонтална повърхност **(D)**.
- Поставете краката си върху земята един до друг в плоско положение.
- Маншетът трябва да е на нивото на сърцето ви.
- Стойте възможно най-неподвижни по време на измерването и не говорете.

**Измерване на кръвното налягане:**
**Изискване**: прикрепен маншет.

**Измерване на кръвното налягане:**

1. Натиснете . Всички елементи на дисплея се показват за кратко. Маншетът се надува автоматично. Процесът на измерване започва. Когато се улови пулс, показва се символ .

   За да отмените измерването натиснете .
2. На дисплея се показват пулса, систоличното и диастоличното кръвно налягане.

   Символът за контрол на позицията на маншета се показва по време на цялото измерване. Ако маншетът е твърде разхлабен, ще се покажат и **“Er3”**. В такива случаи измерването се отменя след прибл. 15 секунди и устройството се самоизключва.
   **“Er”** се показва, ако измерването не може да се извърши правилно. В този случай, моля, вижте раздела „Отстраняване на неизправности“.
   Ако е необходимо, прикрепете отново маншета след 1 минута.
   Устройството се изключва автоматично след прибл. 60 секунди.

**Отчитане на резултатите:**

**Обща информация за кръвното налягане:**

- Кръвното налягане е силата, с която кръвният поток притиска артериалните стени. Артериалното кръвно налягане постоянно се променя в хода на сърдечния цикъл.
- Кръвното налягане винаги се изразява под формата на две стойности:
  - Най-високото налягане е систоличното кръвно налягане. Това се случва, когато сърдечният мускул се свие и кръвта се изпомпва в кръвоносните съдове.
  - Най-ниското налягане е диастоличното кръвно налягане. Това се случва, когато сърдечният мускул отново се е отпуснал напълно и сърцето се пълни с кръв.
- Колебанията в кръвното налягане са нормални. Дори при повторни измервания може да има значителни разлики между измерените стойности. Поради това еднократните или нередовни измервания не дават надеждна информация за действителното кръвно налягане. Надеждна оценка е възможна само когато извършвате измерването редовно при сравними условия.

**<u>Сърдечна аритмия:</u>** Уредът може да улови възможна сърдечна аритмия като това се обозначава с икона .

Повторете измерването, ако се покаже .
Когато измервате кръвното си налягане, използвайте само резултатите, които са записани без никакви нередности в пулса.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако  се показва често. Само той може да ви прегледа и да установи дали има аномалия при сърдечния ви пулс.

| **Систолично** (в mmHg) | **Диастолично** (в mmHg) | **Класификация** | **Индикатор на риск:** |
|---|---|---|---|
| ≥ 180 | ≥ 110 | 3: Тежка хипертония [1] | Червен |
| 160-179 | 100-109 | 2: Умерена хипертония [1] | Оранжев |
| 140-159 | 90-99 | 1: Лека хипертония [1] | Жълт |
| 130-139 | 85-89 | Нормално в горната граница [1] | Зелен |
| 120-129 | 80-84 | Нормално [1] | Зелен |
| < 120 | < 80 | Оптимално [1] | Зелен |
| < 90 | < 60 | Ниско кръвно налягане [2] | Оранжев |

[1]Източник: СЗО, 1999 (Световна Здравна Организация)
[2] Източник: Национална здравна служба, 2023

**Индикатор на риск:**
Индикаторът за риск **5 / 14** показва в коя категория попадат записаните стойности на кръвното ви налягане. Ако измерените стойности са в две различни категории (напр. систолично налягане във „висок нормален“ диапазон и диастолично налягане в „нормален“ диапазон), индикаторът за риск винаги показва по-високия диапазон – „висок нормален“ в описания пример.

Обърнете внимание, че тези стойности по подразбиране са само за общи насоки, тъй като отделните кръвни налягания могат да варират.

Моля, обърнете внимание, че самостоятелното измерване у дома обикновено води до стойности, по-ниски от записаните в лекарски кабинет. Консултирайте се с Вашия лекар на редовни интервали. Само той е в състояние да Ви даде персонални целеви стойности за контролирано кръвно налягане, особено ако сте подложени на медицинска терапия.

**Ниско кръвно налягане:**




Ниското кръвно налягане (хипотония) може да представлява опасност за здравето и да причини замаяност или припадък. Кръвното налягане се счита за ниско, ако систоличното и диастоличното налягане са под 90/60 mmHg (източник: Национална здравна служба, 2023 г.).
Потърсете медицинска помощ, ако внезапно страдате от ниско кръвно налягане.

## 7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

- Почиствайте уреда и маншета само с леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте никакви почистващи препарати и разтворители.
- В никакъв случай не дръжте устройството или маншета под вода, тъй като това може да доведе до навлизане на течност и повреда на устройството и маншета.
- Ако съхранявате устройството и маншета, не поставяйте тежки предмети върху устройството и маншета. Маркучът на маншета не трябва да се огъва рязко.
- Извадете батериите, ако устройството няма да се използва за дълъг период от време.

## 8. АКСЕСОАРИ И/ИЛИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ:

Аксесоари и/или резервни части са налични на www.beurer.de, под „Услуга“. Моля, посочете съответния номер на поръчка.

| Обозначение | Номер на артикул и/или номер на поръчка |
|---|---|
| Универсален маншет (22-42 см) | 110.031 |
| Адаптер за ток (EU) | 072.78 |

| | |
|---|---|
| Адаптер за ток (UK) | 072.79 |

## 9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:

| **Съобщение при грешка** | **Възможна причина** | **Решение** |
|---|---|---|
| **Er1** | Не може да се запише пулс. | Моля, изчакайте една минута и повторете измерването. Уверете се, че не говорите и не се движите по време на измерването. |
| **Er2** | Измереното кръвно налягане е извън обхвата на измерване. | |
| **Er3** | Има грешка в пневматичната система. | Повторете измерването. Уверете се, че маркучът на маншета е правилно свързана и че не се движите или говорите. |
| **Er4** | Възникна грешка по време на измерването. | Моля, изчакайте една минута и повторете измерването. Уверете се, че не говорите и не се движите по време на измерването. |
| **Er5** | Налягането при надуване е по- | Моля, направете още едно |

| | | |
|---|---|---|
| | високо от 300 mmHg. | измерване, за да проверите дали маншетът може да бъде правилно напомпан. Уверете се, че нито ръката ви, нито други тежки предмети притискат маркуча и че маркучът не е огънат. |
| **Er6** | Има системна грешка. | Ако се появи това съобщение за грешка, моля, свържете се с Отдела за обслужване на клиенти. |
| **L0**  | Батериите са почти изтощени. | Поставете нови батерии в устройството. |

## 10. ИЗХВЪРЛЯНЕ:

**Ремонт и изхвърляне на уреда:**

- Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами. В противен случай правилната му работа вече не може да бъде гарантирана.
- Не отваряйте устройството, освен отделението за батерията.
  Неспазването ще анулира гаранцията.
- Ремонтите трябва да се извършват само от отдел за обслужване на клиенти или от оторизирани търговци

на дребно. Преди да направите рекламация, първо проверете батериите и ги сменете, ако е необходимо.

- Устройството не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изхвърлете устройството в подходящ местен пункт за събиране или рециклиране във вашата страна. Изхвърлете устройството в съответствие с Директивата на ЕО – WEEE (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Моля, свържете се с местните власти, отговорни за изхвърлянето на отпадъци, ако имате въпроси относно изхвърлянето.



**Изхвърляне на батерии:**




- По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника
- Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:
    - Pb = Батерията съдържа олово
    - Cd = Батерията съдържа кадмий
    - Hg = Батерията съдържа живак

## 11. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

| Тип | BM 25 |
|---|---|
| Модел | BM 23 |
| Метод на измерване | Осцилометрично, неинвазивно измерване на кръвното налягане на горната част на ръката |
| Диапазон на измерване | Налягане в маншета 0-300 mmHg,<br>Систолично 50-280 mmHg,<br>Диастолично 30-200 mmHg,<br>Пулс 40-199 удара/минута |

| | |
|---|---|
| Точност на дисплея | Систолно ± 3 mmHg,<br>Диастолно ± 3 mmHg,<br>Пулс ± 5% от показаната стойност |
| Неточност на измерването | Макс. допустимо стандартно отклонение според клинични тестове:<br>Систолично 8 mmHg /<br>Диастолично 8 mmHg |
| Памет | 4 x 30 места за памет |
| Размери | Д 120 мм x Ш 90 мм x Н 40 мм |
| Тегло | Приблизително 318 гр (без батерии, с маншет) |
| Размер на маншета | 22 до 42 см |
| Допустими условия на работа | +10°C до +40°C, <90% относителна влажност, 800 –1050 hPa околно налягане |
| Допустими условия на съхранение | -20°C до +55°C, <90% относителна влажност |
| Захранване | 4 x 1,5 ⎓ LR03 AAA батерии |
| Живот на батерията | За прибл. 300 измервания, в зависимост от нивата на кръвното налягане и налягането на напомпването |
| Очакван експлоатационен живот | Информация за експлоатационния живот на продукта можете да намерите на началната страница. |
| Класификация | Вътрешно захранване, IP21, без AP или APG, непрекъсната работа, част за приложение тип BF |

Серийният номер се намира на устройството или в отделението за батерията.

Техническата информация подлежи на промяна без уведомяване, за да позволи актуализации.

- Уредът отговаря на Европейски стандарт EN 60601-1-2 (Група 1, Клас B, в съответствие със CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) и с него трябва да се работи внимателно относно електромагнитната съвместимост. Моля, имайте предвид, че преносимите и мобилните високочестотни комуникационни системи може да попречат на това устройство.
- Точността на този апарат за кръвно налягане е внимателно проверена и разработена с оглед на дълъг полезен живот. Ако използвате устройството за търговски медицински цели, то трябва редовно да се тества за точност по подходящ начин. Точни инструкции за проверка на точността могат да бъдат поискани от сервизния адрес на Beurer.

**Захранващ адаптер:**

| | |
|---|---|
| Модел № | LXCP12X-050100BG |
| Вход | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,5 A макс. |
| Изход | 5 V DC, 1 A, само във връзка с апарати за кръвно налягане Beurer |
| Производител | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd |
| Защита | Това устройство е двойно изолирано и има изключващ превключвател от основната страна, който изключва устройството от електрическата мрежа в |

| | |
|---|---|
| | случай на неизправност. Уверете се, че сте извадили батериите от отделението за батерии, преди да използвате захранващия адаптер. |
|  | Полярност |
|  | Изолиран/клас на защита 2 |
| Корпус и защитни капаци | Корпусът на захранващия адаптер предпазва потребителите от докосване на части, които са или биха могли да бъдат под напрежение (например с пръсти или с игла или кука за проверка). Потребителят не трябва да докосва пациента и изходния конектор на AC/DC захранващия адаптер едновременно. |

**12. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ:**
Допълнителна информация относно гаранцията и гаранционните условия можете да намерите в предоставената гаранционна карта.

**Уведомяване за инциденти:**
За потребители/пациенти в Европейския съюз и идентични регулаторни системи (Регламент на ЕС за медицински изделия (MDR) 2017/745) се прилага следното: Ако по време на или чрез използване на продукта възникне голям

инцидент, уведомете производителя и/или негов представител, както и съответния национален орган на държавата членка, в която се намира потребителят/пациентът.