Ръководство на потребителя
за апарат за измерване на кръвно налягане Beurer BM 64

I. Включено в опаковката:

- Апарат за измерване на кръвно налягане Beurer BM 64
- Маншет за горната част на ръката (размер 22-42 см)
- Батерии
- USB-C кабел
- Торбичка за съхранение
- Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба. Спазвайте предупрежденията и бележките за безопасност. Запазете тези инструкции за употреба за по-нататъшна употреба. Ако дадете устройството на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.

II. Предназначение на уреда:

Апаратът за измерване на кръвно налягане в горната част на ръката се използва за неинвазивно измерване и наблюдение на стойностите на артериалното кръвно налягане при възрастни. Той е предназначен за употреба от възрастни у дома. Апаратът е подходящ за употреба от хора с обиколка на ръката, посочена на маншета му.

Може да записвате отчетените стойности по лесен и бърз начин. Записаните стойности се класифицират спрямо международно приложими стандартни и се оценяват графично. Освен това апаратът ви предупреждава при улавяне на нередовни сърдечни удари, които се появяват по време на измерването и апаратът ви информира за това чрез символ на дисплея.

Апаратът запазва записаните стойности и ви показва средните стойности от предишните ви измервания.

Записаните данни може да помогнат на вашите лекари за диагностициране и лечение на проблеми с кръвното ви налягане. Освен това апаратът ви помага да следите здравето си в дългосрочен план.

Показания:

В случай на хипертония или хипотония, потребителят може самостоятелно да следи стойностите на кръвното си налягане и пулса си у дома. Разбира се не е задължително даденият потребител да страда от хипертония или аритмия, за да използва този апарат.

III. Полезни съвети и инструкции за безопасност:

- Не използвайте уреда върху новородени, върху деца и върху животни.
- Уредът не е предназначен за употреба от хора (вкл. деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности без надзора на възрастен, отговорен за тяхната безопасност.
- Не използвайте устройството, ако използвате електрически импланти (напр. пейсмейкъри).
- Не използвайте устройството, ако имате метални импланти.
- Не използвайте маншета на хора, претърпели мастектомия или хора, които имат премахнати лимфни възли.
- Не поставяйте маншета върху рани, тъй като това може да предизвика допълнителни наранявания.
- Уверете се, че маншетът не е поставен върху ръката, чиито артерии или вени са подложени на медицинско лечение, напр. интраваскуларен достъп или интраваскуларна терапия, или артериовеноен (AV) шунт.
- Не използвайте устройството върху хора с алергии или чувствителна кожа.

Нежелани странични ефекти:

- Дразнене на кожата и отрицателно въздействие върху кръвообращението.

Основни предписания:

- Измерванията, които правите, са само за ваша информация – те не са заместител на медицински преглед! Обсъдете вашите измерени стойности с вашия лекар и никога не вземайте медицински решения сами на базата на отчетените от апарата стойности! (напр. относно дозите на лекарства, които приемате).
- Устройството е предназначено само за целта, описана в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или нехайна употреба.
- Използване на апарата за кръвно налягане извън домашната среда или докато сте в движение (напр. докато пътувате с кола, линейка или хеликоптер, или докато извършвате физическа активност като например спортуване) може да повлияе на точността на измерването и да причини неправилни измервания.

- Сърдечносъдовите заболявания могат да предизвикат неправилно отчитане на стойностите. Това важи и при много ниско кръвно налягане, диабет, нарушения на кръвообращението и аритмии, както и при тремор.
- Не използвайте уреда едновременно с други медицински електрически устройства (ME оборудване). Това може да повлияе отрицателно върху правилната функционалност на устройството и/или да доведе до неточни измервания.
- Не използвайте устройството извън определените за съхранение и употреба места. Това може да доведе до неправилни измервания.
- Използвайте само маншетите, включени в доставката или описани в тези инструкции за употреба с устройството. Използване на различен маншет може да доведе до неточни измервания
- Обърнете внимание, че по време на напомпване може да се нарушат функциите на съответния крайник.
- По време на измерване на кръвното налягане, кръвообращението не трябва да се спира за ненужно дълго време. Ако устройството не функционира правилно, махнете маншета от ръката.
- Не допускайте продължително налягане в маншета или части измервания. Ограничаването на кръвния поток на ръката може да причини нараняване.
- Въздушните маркучи представляват риск от задушаване на малки деца.
- Малките части могат да представляват опасност от задавяне на малки деца, ако бъдат погълнати. Следователно те винаги трябва да бъдат наблюдавани, когато в близост до устройството.
- Не изпускайте, не стъпвайте и не разклащайте устройството.
- Не разглобявайте устройството, тъй като това може да причини повреди или неизправности.
- Ако имате някое от следните състояния, задължително се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате устройството: Сърдечна аритмия, нарушения на кръвообращението, диабет, хипотония, втрисане, треперене.
- За да се изключи разликата между двете страни на тялото ви, измерването трябва първоначално да се направи и на двете ръце.

Внимание:

- Устройството е направено от прецизни електронни компоненти. Точността на отчетените стойности и продължителността на експлоатационния му живот зависят от внимателната му употреба.
- Пазете устройството и неговия захранващ адаптер от удари, влажност, мръсотия, изразени температурни колебания и директна слънчева светлина.
- Уверете се, че устройството е на стайна температура, преди да направите измерване. Ако устройството е било съхранявано близо до максималните или минималните температури на съхранение и транспортиране и е било поставено в среда с температура на 20°C, препоръчително е да изчакате прибл. 2 часа преди да използвате апарата за измерване на кръвното налягане.
- Не използвайте устройството в близост до силни електромагнитни полета и го дръжте далеч от радиосистеми или мобилни телефони.
- Препоръчваме да извадите батериите, ако устройството няма да се използва за продължителен период от време.
- Избягвайте всякакво механично ограничаване, сгъване или прегъване на маншета.
- Уредът не трябва да се използва с високочестотни хирургични апарати.
- Използвайте само при хора със съответстваща на уреда обиколка в горната част на ръката.
- Избягвайте всякакви механични ограничения, сгъвания или огъвания на маншета.
- Устройството е предназначено само за целите, описани в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди в резултат на неправилно или небрежно използване.
- Всяка поправка трябва да се извършва от оторизиран технически персонал. В противен случай съществува опасност от нараняване в следствие на неправилна работа на устройството. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията на апарата невалидна.

Бележка за работа с батериите:


- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане и задушаване!
- Съблюдавайте **+** и **–** поляритета на батериите.
- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа.
- Пазете батериите от силна топлина.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия.
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.
- Ако няма да използвате устройството дълго време, извадете батериите от него.
- Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип батерии.
- Не зареждайте батериите.
- Не използвайте презаредими батерии.
- Не разглобявайте, срязвайте или смачквайте батериите.
- Махнете батериите, ако няма да използвате уреда дълго време.

Електромагнитна съвместимост:

- Уредът може да се използва във всяка среда, посочена в тези инструкции за употреба, включително домашна среда.


- Работата на уреда може да бъде повлияна от наличието на електромагнитни смущения. Те могат да предизвикат съобщения за грешка и отказ на дисплея/уреда.
- Избягвайте използването на уреда в близост до други устройства или поставянето му върху други устройства, защото това може да доведе до неправилната им работа. В подобни случаи трябва да следите внимателно дали устройствата функционират правилно.
- Употребата на други аксесоари, освен посочените от производителя, може да доведе до увеличаване на електромагнитното излъчване или до намаляване на електромагнитния имунитет на уреда, което да предизвика неправилна работа.
- Дръжте преносимите радиочестотни комуникационни устройства (включително периферно оборудване, като антенни кабели или външни антени) на разстояние най-малко 30 см от всички части на устройството, включително всички кабели, включени в доставката.
- Неспазването на горните съвети може да повлияе негативно върху правилната работа на устройството.

IV. Описание на уреда:

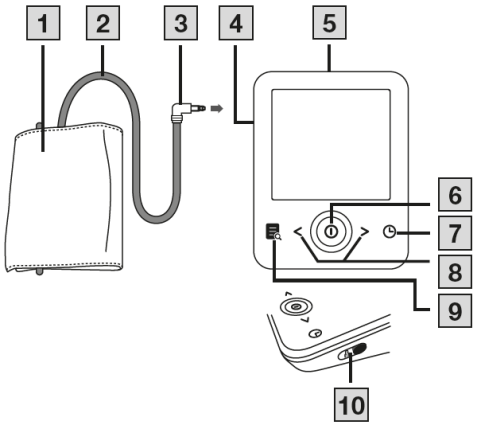


1. Маншет
2. Маркуч на маншета
3. Конектор на маншета
4. Връзка за конектор на маншета (от лявата страна)
5. Връзка за захранващ адаптер
6. СТАРТ/СТОП бутон
7. Бутон Настройки
8. Функционални бутони **</>**
9. Бутон за Памет
10. Плъзгащ се бутон за избор на потребител

Дисплей :

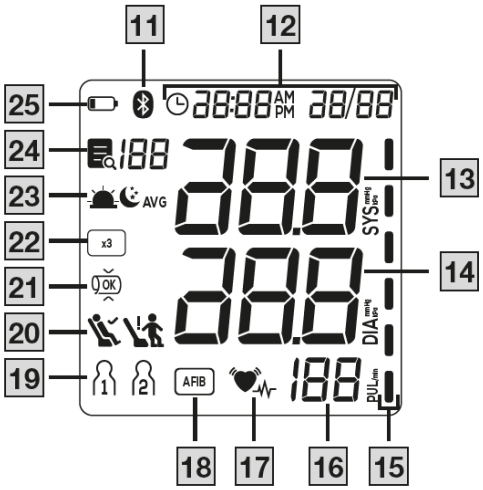

11. Символ за Bluetooth връзка
12. Дата/Час
13. Систолично налягане
14. Диастолично налягане
15. Индикатор на риска
16. Изчислена стойност на пулса
17. Символ за сърдечна аритмия / Символ за пулс
18. AFib
19. Потребителска памет
20. Индикатор за покой
21. Контрол на позицията на маншет
22. Многократно измерване
23. Показване на памет: средна стойност AVG, средна стойност сутрин и средна стойност привечер
24. Номер на място в паметта
25. Индикатор за нисък заряд на батерията

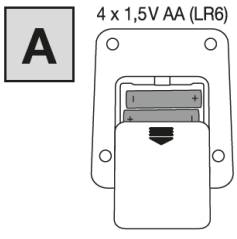

V. Първоначална употреба:

Поставяне на батериите:

- Махнете капака на отделението за батерии в задната част на устройството **A**.
- Поставете батериите като се уверите, че са сложени с правилния си поляритет спрямо етикет **A.**
- След това затворете капака на отделението за батерии внимателно.
- Ако индикаторът за смяна на батериите седи на дисплея постоянно вече не може да правите измервания с устройството и трябва да подмените батериите му. Когато извадите батериите от апарата, датата и часът ще бъдат нулирани. Всички запазените отчетени стойности ще се запазят.

Работа на ток:

Можете също така да работите с това устройство със захранваща част (не е включена в доставката). Въпреки това, преди да свържете устройството към електрическата мрежа, моля, уверете се, че сте извадили батериите от устройството. По време на работа на ток не трябва да има батерии в отделението за батерии, тъй като това може да повреди устройството.

- За да се избегнат евентуални повреди, устройството може да работи само със захранваща част, която отговаря на спецификациите на апарата за измерване на кръвното налягане.
- Освен това захранващата част трябва да бъде свързана само към мрежово напрежение, което отговаря на посоченото на табелата на устройството.
- Поставете захранващия адаптер в предвиденото за целта гнездо в задната страна (5) на апарата за кръвно налягане.
- След това вкарайте щепсела на захранващата част в контакта.
- След като използвате апарата за кръвно налягане, първо изключете захранващата част от контакта и след това го изключете от апарата. Веднага след като изключите захранващата част, апаратът за кръвно налягане губи настройката за дата и час, но записаните измерени стойности се запазват.

Промяна на настройки:

Уверете се, че настройките на устройството са зададени правилно, за да можете да използвате пълноценно всичките му функции. В противен случай няма да можете да запазите вашите измерени стойности с дата и час и да ги получите по-късно.

Има два различни начина за достъп до менюто с настройки:

- Преди първоначална употреба и след всяка смяна на батерията:
  Когато поставите батерии в устройството, автоматично ще бъдете отведени до съответното меню.
- Ако батериите вече са поставени:

При включено устройство натиснете и задръжте за прибл. три секунди.

Настройка на формата на формата на часа, датата, часа и Bluetooth:

Натиснете всеки път, за да потвърдите избора си.

Форматът на часа започва да мига на дисплея.

- Натиснете </>, за да изберете формата на часа.

Годината започва да мига на дисплея.

- Натиснете </>, за да изберете годината.

Месецът започва да мига на дисплея.

- Натиснете </>, за да изберете месеца.

Денят започва да мига на дисплея.

- Натиснете </>, за да изберете деня.

Bluetooth започва да мига на дисплея.

- Натиснете </>, за да изберете дали Bluetooth да прехвърля данните автоматично (bt on) или не (bt off) и потвърдете избора си като натиснете
  Употребата на Bluetooth ще скъси живота на батерията на устройство.

VI. Употреба:

Основни правила за измерване на кръвно налягане:

- За да имате точни стойности за сравнение, мерете кръвното си налягане по едно и също време на денонощието.
  Мерете кръвното си налягане два пъти на ден: веднъж сутрин след като сте станали и веднъж привечер.
- Винаги се уверете, че сте отпочинали преди измерване.
- Не мерете кръвното си налягане 30 минути след хранене, пиене, пушене или физическо натоварване.
- Отпочинете 5 минути преди първото измерване.
- Ако искате да повторите измерването, моля изчакайте 5 минути преди да измерите кръвното си налягане отново.
- Ако не сте уверени в отчетената стойност, повторете измерването.


Позициониране на маншета:

Бележка: Отчетените стойности може да бъдат различни на лявата и на дясната Ви ръка. Заради това винаги трябва да измервате кръвното си налагяне на една и съща ръка. Ако стойностите се различват значително, трябва да се консултирате с вашия лекар относно коя ръка да използвате при измерване на кръвното си налягане.

Важно: Уредът трябва да се използва само с оригинален маншет, който е предназначен за обиколка на ръката 22-44 см.


1. Навийте ръкава си или премахнете връхната си дреха. Кръвният поток в ръката не трябва да бъде ограничен от стегнати дрехи.

2. Поставете маншета върху горната част на голата си ръка – долната част на маншета трябва да е 2-3 см над свивката на лакътя, а маркучът да е позициониран централно на дланта. Наместете устройството, така че маркировката ▼ и маркучът да са директно върху артерията **B**.
   Стегнете маншета (но не прекалено). Трябва да можете да пъхнете два пръста между маншета и ръката **B**.
3. Свържете маркуча на маншета към гнездото за свързване с маншета.
4. Маншетът е подходящ размер за вас, ако индексът (▼) е в рамките на „OK“ зоната.

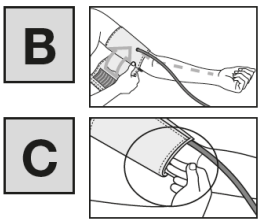

Правилна поза за измерване на кръвно налягане:

1. Починете си 5 минути преди измерването.
2. Можете да мерите в седнало или легнало положение на тялото като маншетът трябва да е на нивото на сърцето.
3. Седнете комфортно, с подпрени ръце и гръб. Не кръстосвайте крака. Поставете стъпалата на пода.
4. Не мърдайте по време на измерването и не говорете.

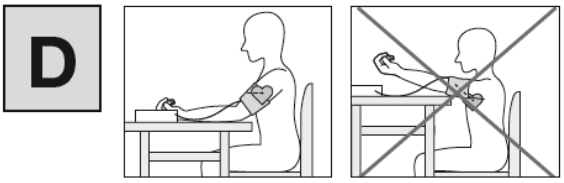

Избор на потребител:

Това устройство има две потребителски памети със 120 места за всеки, за да можете да запазвате измервания от двама различни хора отделно един от друг.

Ако няколко души използват устройството, уверете се, че е избран правилният потребител преди всяко измерване:

- Използвайте плъзгащия се бутон (10), за да зададете желания потребител.

Измерване на кръвното налягане:

Условие: Маншетът трябва да бъде поставен и трябва да сте избрали потребителска памет.

Сложете маншета според описанието и приемете правилна поза, за да извършите измерването.

1. Натиснете бутона ⏻ . За кратко ще видите всички елементи на дисплея.
2. Началният екран ви приветства за избраната памет **1** или **2.** От този начален екран може да получите достъп до всички елементи на менюто, например потребителската памет.
3. Натиснете отново, за да стартирате измерване. Маншетът се надува автоматично. Процесът на измерване започва. Символът ♥ се показва веднага, когато е отчетен пулс.
   За да отмените този процес, натиснете ⏻ .
4. На екрана излизат отчетените: сърдечен ритъм, систолично и диастолично налягане. Символът за контрол на позицията на маншетът OK се вижда на екрана през цялото време на измерване. Ако маншетът е прекалено хлабав на дисплея се изписва **Er 3.** В подобни случаи измерването се отменя след около 15 секунди и устройството се самоизключва.
   Ако е необходимо трябва да поставите маншетът на ръката си повторно. Устройството се самоизключва след около 15 секунди (автоматично). Стойността е запаметена в избраната или най-скоро използваната потребителска памет.

   На екрана излиза Er, ако измерването не може да се извърши правилно. Ако е необходимо, прикрепете отново маншета след 1 минута. Устройството се изключва автоматично след прибл. 30 секунди. Стойността се записва в избрания или най-скоро използван потребител.

Многократни измервания:

1. Натиснете ⏻ . Всички елементи на дисплея се показват за кратко.
2. Началният екран ви приветства за избраната памет **1** или **2.** От този начален екран може да получите достъп до всички елементи на менюто, например потребителската памет.
3. Множество измервания могат да бъдат избрани чрез натискане на < или >. x3 мига на дисплея. За да започнете измерването, потвърдете с ⏻ .
   Маншетът се надува автоматично. Измерването започва.
4. Устройството показва първия цикъл на измерване за 3 секунди и след това извършва редовно измерване, което се повтаря три пъти. Във втория и третия цикъл също се показва 30-секундно обратно броене, което показва времето за изчакване до следващото измерване.
   За да отмените измерването, натиснете ⏻ .
5. След третото измерване се показва средното измерване на систоличното налягане, диастоличното налягане и пулса и се обозначава с x3 .

Символът за контрол на позицията на маншета  се показва по време на цялото измерване. Ако маншетът е твърде разхлабен на екрана ще се появи  или **Er 3**. В такива случаи измерването се отменя след прибл. 5 секунди и устройството се самоизключва.
Er се появява на екрана и измерването не може да се извърши правилно.
Ако е необходимо трябва да поставите маншетът на ръката си повторно. Устройството се самоизключва след около 30 секунди (автоматично). Стойността е запаметена в избраната или най-скоро използваната потребителска памет.

На екрана излиза Er, ако измерването не може да се извърши правилно. Ако е необходимо, прикрепете отново маншета след 1 минута. Устройството се изключва автоматично след прибл. 30 секунди. Стойността се записва в избрания или най-скоро използван потребител.

Отчитане на резултатите:

<u>Сърдечна аритмия:</u> Уредът може да улови възможна сърдечна аритмия като това се обозначава с икона 
Ако иконата се появява често, отидете на кардиолог. Само лекар може да потвърди сърдечна аритмия и да ви даде инструкции относно това състояние.
<u>Индикатор на риска:</u> Измерванията могат да бъдат оценени и класифицирани според долната таблица. Имайте предвид, че тези данни са генерализирани, защото индивидуалните стойности на кръвното налягане варират при отделните хора и възрастови групи. Само лекар може да каже какви са вашите точни нормални стойности.

Апаратът показва в коя категория са отчетените стойности. Когато стойностите на систоличното и диастоличното налягане са в различни категории, отчита се по-високата. Например, ако систоличното налягане е високо, а диастоличното е нормално, стойността ще бъде отчетена като висока.

Систолично (в mmHg)	**Диастолично** (в mmHg)	**Класификация**	**Цвят на индикатор на риск**
≥ 180	≥ 110	Високо кръвно налягане (етап 3) (сериозно)	Червен
160-179	100-109	Високо кръвно налягане (етап 2) (средно)	Оранжев
140-159	90-99	Високо кръвно налягане (етап 1) (леко)	Жълт
130-139	85-89	Високо нормално кръвно налягане	Зелен
120-129	80-84	Нормално	Зелен
< 120	< 80	Оптимално	Зелен
< 90	< 60	Ниско кръвно налягане	Оранжев

Източник: СЗО, 1999 (Световна Здравна Организация)

Измерване на индикатора за покой (с помощта на HSD диагностика):
Най-честата грешка при измерване на кръвното налягане е измерване, когато не сте в покой (хемодинамична стабилност). В тези случаи систоличното и диастоличното кръвно налягане са неправилни. Докато измерва кръвното налягане, уредът автоматично определя дали сте в покой или не. Ако няма индикация, че кръвоносната система не е в достатъчен покой, символът  (хемодинамична стабилност) се появява на дисплея и измерването може да бъде записано като надеждна стойност на кръвното налягане в покой.

**Хемодинамично стабилен:**

Измерванията на систоличното и диастолното налягане са записани, когато кръвоносната система е в достатъчен покой. Ако има индикация, че кръвоносната система не е в достатъчен в покой (хемодинамична нестабилност) на дисплея се появява символът . В този случай измерването трябва да се повтори след кратък период на физическа и психическа почивка.

Не се показва индикатор за стабилност:
По време на измерването не е възможно да се определи дали кръвоносната система на потребителя е била в достатъчен покой. В такъв случай измерването трябва да се повтори след период на почивка с продължителност от най-малко 5 минути.

VII. Показване и изтриване на отчетени стойности:

Потребителска памет:

Натиснете на началния екран и изберете желаната от вас памет чрез плъзгащия се бутон.

Средна стойност:
AVG излиза на екрана:
Средната стойност на всички запазени стойности на този потребител се показват.

1. Натиснете **>**.
   На екрана излиза **AVG**
   Средната стойност на всички запазени сутрешни стойности (5 до 9 сутринта) от последните 7 дни на този потребител се показват.
2. Натиснете **>**.
   На екрана излиза **AVG**
   Средната стойност на всички запазени вечерни стойности (18 до 20 вечер) от последните 7 дни на този потребител се показват.

Индивидуални измерени стойности:

1. Ако натиснете **>** отново, последната измерена стойност ще бъде показана (например стойност 3).
2. Ако натиснете **< / >** отново може да видите индивидуалните измерени стойности.
3. За да изключите устройството отново, натиснете за около 2 секунди.
   Натиснете , за да излезете от менюто.

Изтриване на измерени стойности:

1. За да изтриете всички запазени измерени стойности на даден потребител, отидете в паметта на дадения потребител.
   На екрана ще видите средните стойности на всички запазени измерени стойности на дадения потребител.
2. Натиснете и задръжте **< и >** за около 5 секунди.
   CL 01 за потребител 1/ **CL 02** за потребител 2 се появява на екрана. Всички стойности на избрания потребител се изтриват.
   Устройството се изключва автоматично.

Нулиране на устройството до настройките му по подразбиране:

1. За да изтриете всички запазени настройки и стойности, моля изберете потребителска памет.
   На екрана излиза **AVG**
2. Натиснете и задръжте < и > за около 15 секунди.
   CL се появява на екрана. Всички данни, които са запазени на устройството ще бъдат изтрити; устройството е нулирано до заводските си настройки.
   Устройството се изключва автоматично.

VIII. Почистване и съхранение:

- Почиствайте уреда и маншета само с леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте никакви почистващи препарати или разтворители.
- Не потапяйте уреда или маншета във вода и не ги мокрете.
- При съхранение на уреда махайте батериите и не поставяйте тежки предмети върху него. Не прегъвайте маншета и въздушните му маркучи.

IX. Прехвърляне на данни чрез Bluetooth:

Прехвърляне чрез Bluetooth:

- Изтеглете безплатното приложение HealthManager Pro / beurer Health-Manager от Apple App Store или Google Play.
- Активирайте Bluetooth в настройките на вашия смартфон.
- Стартирайте приложението.
- Изберете BM 64 в приложението и следвайте инструкциите на екрана.
- Когато се свързвате за първи път ще видите 6-цифрен ПИН код на екрана на устройството. Въведете ПИН кодът на смартфона. След като кодът е бил въведен правилно, устройството ще бъде свързано към смартфона.

Списък със системни изисквания и съвместими устройства →

**Този продукт отговаря на всички приложими към него европейски директиви.*

X. Регулаторна информация:

Pb Cd Hg

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово/ Cd = Батерията съдържа кадмий/ Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Това устройство отговоря на всички приложими европейски и национални директиви.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Разделете продукта и опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

IP 20: Защитено от твърди чужди предмети с диаметър 12.5 мм или по-голям.

Уредът отговаря на европейския стандарт EN60601-1-2 (в съответствие с CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) и е обект на специални предпазни мерки по отношение на електромагнитната съвместимост. Моля, обърнете внимание, че преносимите и мобилните високочестотни комуникационни системи могат да попречат на това устройство.

За потребители/пациенти в Европейския съюз и идентични регулаторни системи (Регламент на ЕС за медицински изделия (MDR) 2017/745) се прилага следното: Ако по време на или по време на употреба на продукта възникне голям инцидент, уведомете производителя и/или неговия представител от това, както и съответния национален орган на държавата членка, в която се намира потребителят/пациентът.

Точността на този апарат за кръвно налягане е проверена внимателно, а самия апарат е разработен с цел продължителна и надеждна употреба.

Ако използвате устройството за търговски медицински цели, то трябва да бъде тествано редовно за точност с подходящи средства.

Може да изискате точни инструкции за проверка на точността на устройството от сервизния адрес.

Този уред отговаря на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО Текст от значение за ЕИП.

XI. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
   - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
   - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
   - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
   - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg