

StypCel™ SPECIFICAȚII

Model	Size(cm)	Straturi	blău/verde	Model	Size(cm)	Straturi	blău/verde
HF-A-116	2.5x2.5	6	5	HF-A-116s	2.5x2.5	6	10
HF-A-216	5.0x2.5		5	HF-A-216s	5.0x2.5		10
HF-A-226	5.0x5.0		5	HF-A-226s	5.0x5.0		10
HF-A-426	10.0x5.0		5	HF-A-426s	10.0x5.0		10
HF-A-446	10.0x10.0		5	HF-A-446s	10.0x10.0		10
HF-A-118	2.5x2.5	8	5	HF-A-118s	2.5x2.5	8	10
HF-A-218	5.0x2.5		5	HF-A-218s	5.0x2.5		10
HF-A-228	5.0x5.0		5	HF-A-228s	5.0x5.0		10
HF-A-428	10.0x5.0		5	HF-A-428s	10.0x5.0		10
HF-A-448	10.0x10.0		5	HF-A-448s	10.0x10.0		10
HF-A-1110	2.5x2.5	10	5	HF-A-1110s	2.5x2.5	10	10
HF-A-2110	5.0x2.5		5	HF-A-2110s	5.0x2.5		10
HF-A-2210	5.0x5.0		5	HF-A-2210s	5.0x5.0		10
HF-A-4210	10.0x5.0		5	HF-A-4210s	10.0x5.0		10
HF-A-4410	10.0x10.0		5	HF-A-4410s	10.0x10.0		10
Pătrat sau Dreptunghiular							

Medprin Biotech GmbH
Address: Gutleutstraße 163-167, 60327 Frankfurt
am Main, Germany
Tel: +49-69-580059970 Fax: +49-69-580059971
Email: Sales@medprin.com



StypCel™
Hemostatic

- Efect hemostatic rapid
- Absorbție 100%
- Structură multistrat netesută
- Țesut minim
- Fibre subțiri, efect hemostatic mai bun

StypCel™

Hemostatic

Hemostaticul StypCel™

este o țesătură absorbantă netesută, destinată hemostazei rapide a sângerărilor capilare și sângerărilor venoase, precum și a sângerărilor arterelor mici în timpul intervenției chirurgicale adjuvante atunci când ligarea sau alte metode convenționale de control sunt impracticabile sau ineficiente.


StypCel™ APLICAȚII



- Chirurgie Cardiovasculară / Cardioracică
- Chirurgie Generală și Digestivă
- Chirurgie Ortopedica
- Plastic surgery
- Neurochirurgie
- Obstetrică / Ginecologie
- Urologie
- Traumatologie
- Chirurgia Arsurilor
- Chirurgie Dentară
- Alte tipuri de chirurgie

StypCel™ BENEFII

- ▽ Celuloză regenerată oxidată, mediu bactericid acid.
StypCel™ este fabricat din celuloză regenerată oxidată, care asigură un mediu bactericid acid.
- 100% absorbție în 7-14 zile
La două săptămâni după experimentul pe iepuri, nu a fost observat niciun material.
- Reacție minimă a țesutului
La studiul preclinic al aplicării hemostazei la mușchiul de iepure. StypCel™ a prezentat o ușoară reacție tisulară.

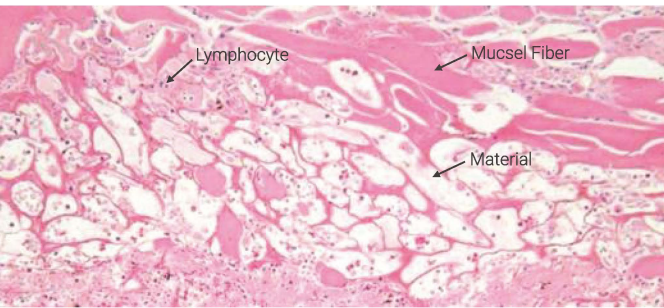


Grup de testare StypCel™

La o săptămână după implantare, secțiunile de țesut au fost colorate cu HE pentru a observa reacția țesutului. Câteva limfocite, nu s-au observat macrofage, indicând o reacție tisulară minimă.


Fibre subțiri, efect hemostatic mai bun

Prezintă o zonă de contact mai mare cu suprafața plăgii, iar efectul sau hemostatic este amplificat datorită fibrelor subțiri și caracteristicii sale compacte. În plus, fibrele mai lungi sunt mai ușor de îndepărtat după utilizare în chirurgia endoscopică.

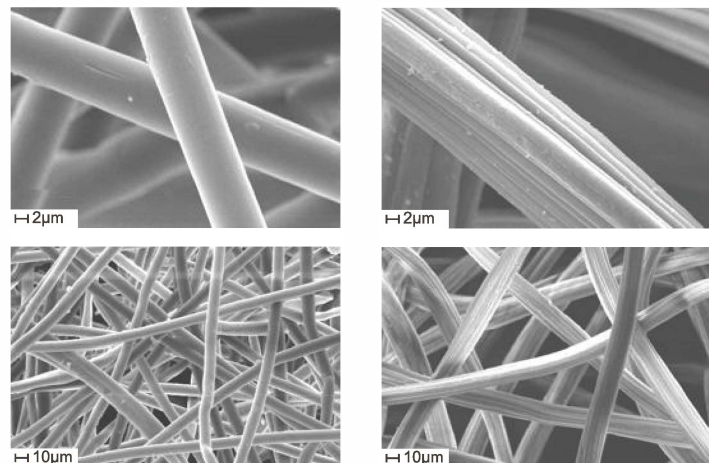


StypCel™ Grup alternativ

Studiu preclinic pe șoareci vii

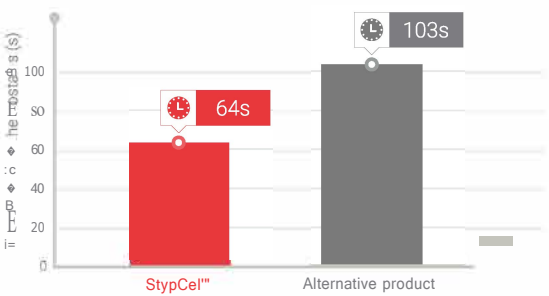

Rezultatul arată că grupul StypCel™ prezintă timpul de realizare a hemostazei semnificativ mai scurt decât grupul alternativ.

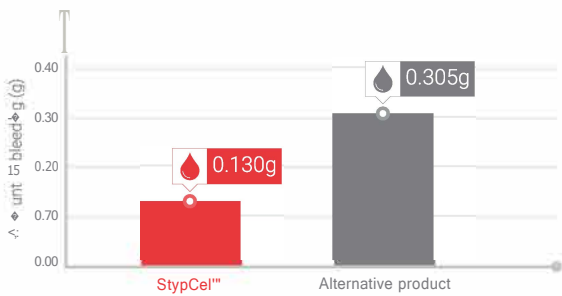

Rezultatul arată că StypCel™ are un grad de sângerare semnificativ mai mic înainte de hemostază.

StypCel™ STRUCTURĂ MULTISTRAT NETESUTĂ

