

INFORMATII | ACCERO®

Etichetat ca ACCERO® Dimensiuni(mm)	Numar de referinta	Stent Diametru (mm)	Stent Lungime (mm)	Diametrul vasului Recomandat (mm)	Necesar/ Recomandat Microcatetere pentru livrare(Inch)
2.5 × 10	01-000800	2.5	10	1.5 – 2.5	0.0165 – 0.017 NeuroSlider® 17 DLC
2.5 × 15	01-000801	2.5	15	1.5 – 2.5	
2.5 × 20	01-000802	2.5	20	1.5 – 2.5	
3.0 × 10	01-000803	3.0	10	2.0 – 3.0	
3.0 × 15	01-000804	3.0	15	2.0 – 3.0	
3.0 × 20	01-000805	3.0	20	2.0 – 3.0	
3.5 × 10	01-000806	3.5	10	2.5 – 3.5	
3.5 × 15	01-000807	3.5	15	2.5 – 3.5	
3.5 × 20	01-000808	3.5	20	2.5 – 3.5	
3.5 × 25	01-000841	3.5	25	2.5 – 3.5	
4.0 × 15	01-000810	4.0	15	3.0 – 4.0	
4.0 × 20	01-000811	4.0	20	3.0 – 4.0	
4.0 × 25	01-000845	4.0	25	3.0 – 4.0	


Toate modificările sau modificările, fie ele tehnice sau de altă natură, sau modificările în disponibilitatea produselor sunt expres rezervate.
Nu este disponibil spre vânzare în Statele Unite.



www.3wede 2205



ACCERO®
Stent

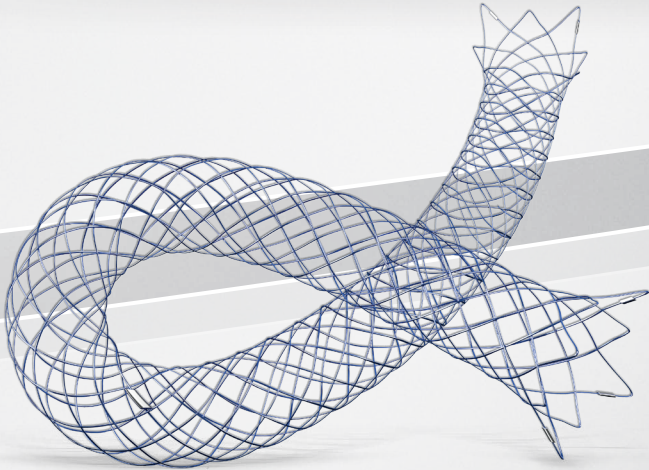


Finisarea suprafeței BlueXide®
Vizibilitate strălucitoare
Comportament excelent de deschidere și adaptabilitate

ACCERO® Stent

Foarte vizibil

Stent împletit auto-expandabil
cu finisaj BlueXide® – pentru tratamentul
anevrismelor intracraniene.

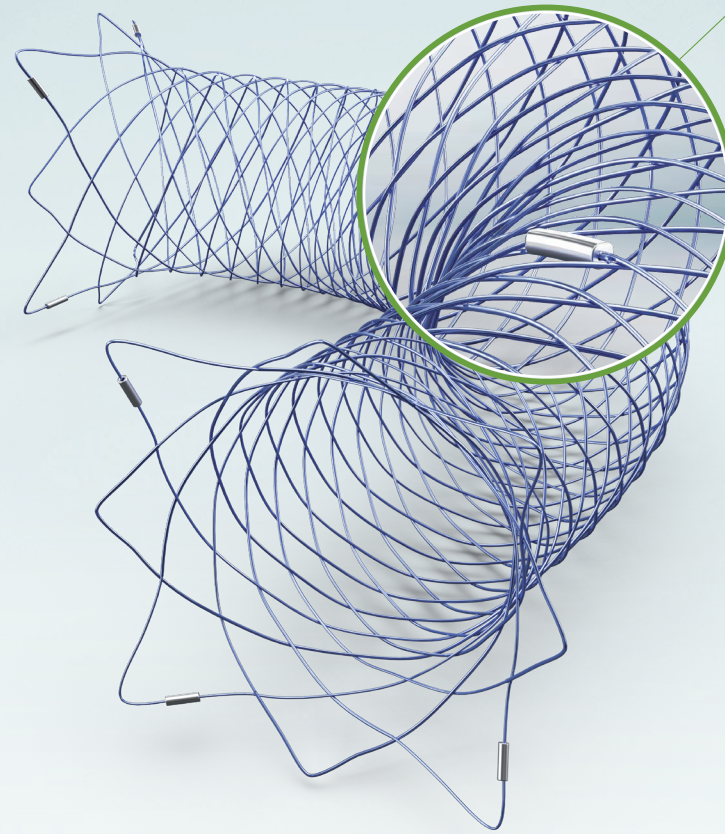

Finisajul de suprafață BlueXide® cu
protecție împotriva coroziunii,
brevetat Acandis®, urmărește să
optimizeze biocompatibilitatea și să
faciliteze livrarea stentului.


Adaptiv

Stent-ul ACCERO® are un design
de stent adaptiv.

Capetele evazate permit o apunere
favorabilă a peretelui în
segmentele de vas drepte și curbe.

Buclele de fir închise permit
livrarea lină și ancorarea
atraumatică.

Forța rezistivă radială mare asigură
o retenție fiabilă a bobinei.

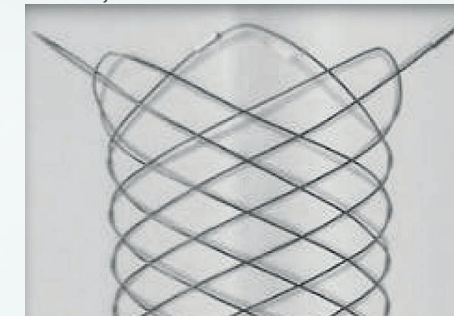


Capetele evazate cu bucle de fir închise

Ușor de folosit

Suprafața netedă asigură livrarea
ușoară și economisită, plasarea
precisă și favorizează un
comportament excelent de
deschidere.

Stent-ul ACCERO® poate fi livrat prin
microcatetere ID 0,0165" – 0,017" și
catetere cu balon cu dublu lumen.

Stent-ul este repositionabil până la
95% din lungime.

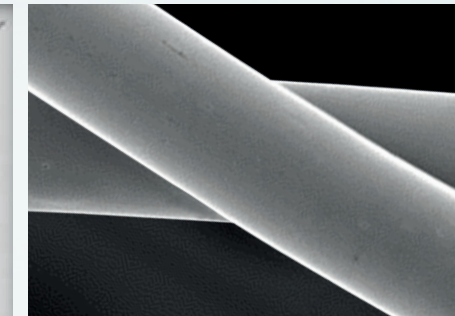


Suprafață netedă

Suport pentru dimensionare

Acandis® oferă un suport unic
de dimensionare în pregătirea
cazurilor cu Stent ACCERO®

Prin simularea dimensionării 3D
de la Acandis, bazată pe
software-ul Ankyras, ajutam
medicii să aleagă dimensiunea
optimă a stentului înainte de
tratament.

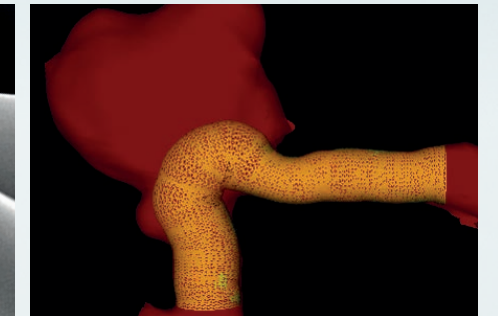

Suport de dimensionare Acandis®

SIGUR & EFICIENT¹


100 % Succes tehnic

76 % Ocluzie completa


95 % Ocluzie satisfăcătoare

5 % Retratare


Tratament cu stent ACCERO®

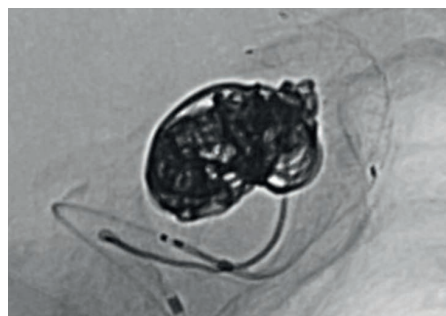

Înfășurare cu Stent ACCERO® pe
jumătate desfășurat

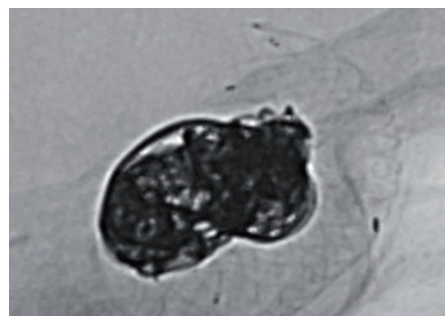

Stent ACCERO® desfășurat complet (vedere laterală)

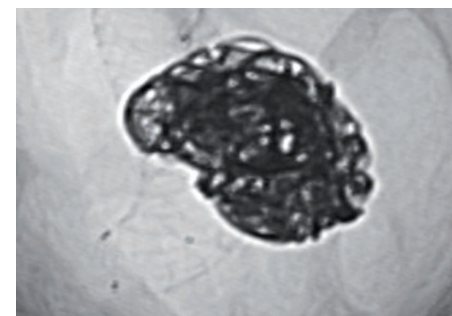

Stent ACCERO® desfășurat complet (vedere frontală)

¹ Nania, A. et al. (2020): Experiență timpurie în tratarea anevrismelor intracraniene folosind Accero: un stent împletit nou, complet vizibil, cu profil redus, cu tehnologie de sârmă compozită platină-nitinol. Journal of NeuroIntervent Surgery, 2020; 0:1–5
² Imaginile sunt oferite de Dr. Paul Stracke, Spitalul Alfried Krupp, Essen-Rüttenscheid, Germania

Conceptul de marker radioopac

Trei markeri de dispozitiv
distal/proximal

pentru control suplimentar al
poziției stentului și al
comportamentului de
deschidere

Marcator proximal fir de
transport

indicând „punctul fără
întoarcere” până la care stentul
poate fi repositionat în
siguranță

Fire compozite radioopace
Nitinol

permit vizibilitatea întregului
contur al stentului

Un marcator de dispozitiv
din mijloc

pentru plasarea precisă sub
gâtul anevrismului

