


ACCLINO® flex plus Stent

- » Design cu celule închise extrem de flexibil
- » Mai multe opțiuni de tratament
- » Compatibil cu microcatetere ID 0,0165" – 0,027"

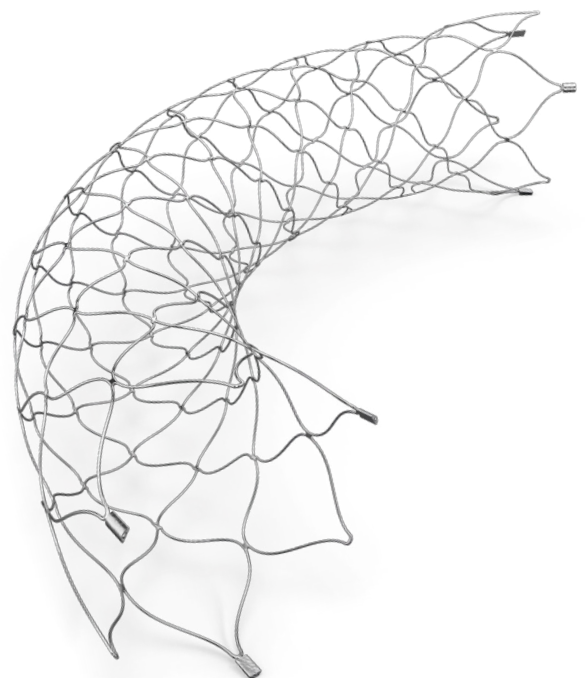


ACCLINO® flex plus Stent

Foarte flexibil

Stent cu nitinol tăiat cu laser auto-expandabil pentru tratamentul anevrismelor intracraniene – retenție fiabilă a spiralei cu acoperire minimă a metalului

Mai multe opțiuni de tratament

Gamă mărită de dimensiuni, potrivită pentru diametrele vasului de la 1,5 – 7,0 mm. Pentru o manipulare ușoară, toate dimensiunile de până la 5,5 mm în diametru sunt livrate prin microcateterele ID 0,0165" – 0,017" permițând plasarea secvențială a stentului și bobinei fără schimbarea microcateterului.

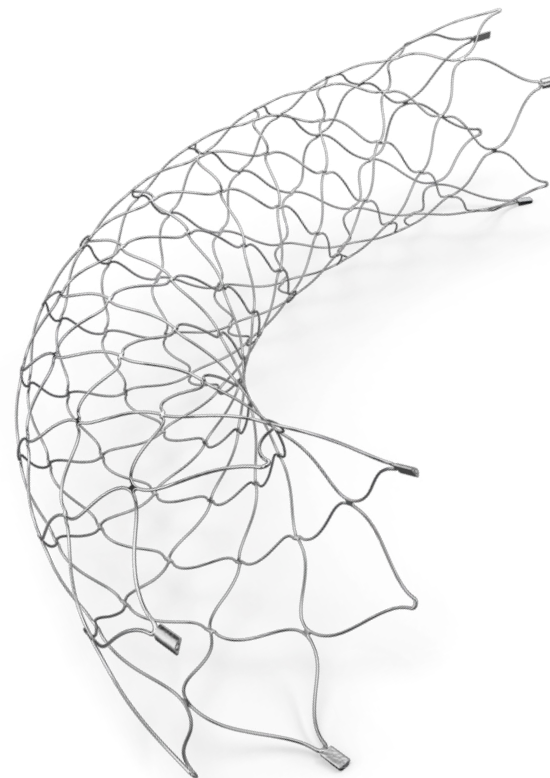

SIGUR ȘI EFICIENT¹

100 %

Succes tehnic

92.3 %

Ocluzie completă la urmărirea precoce (6 luni)


11 %

Retratate

Flexibil

Designul patentat cu celule închise asimetrice al ACCLINO® flex plus Stent duce la cea mai mare flexibilitate din clasa sa de stenturi tăiate cu laser.

Stent-ul prezintă o apozitie excelentă a peretelui vasului și o adaptabilitate chiar și în anatomii dificile.

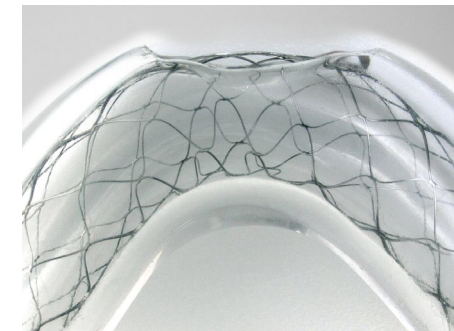


Flexibilitate maximă

Neted

Structura de stent extra-plat și suprafața perfect electropolizată permit o livrare lină.

Structura stentului asigură o permeabilitate ridicată în lumenul vasului și conduce la o trombogenitate scăzută.²

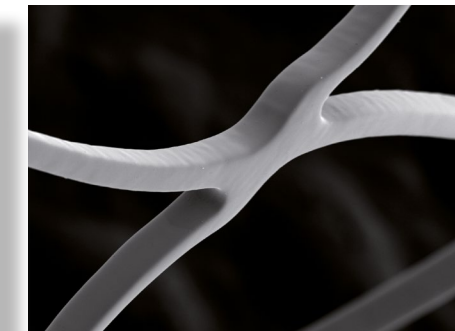

Profil scăzut și neted

Sigur

Conceptul de marker radioopac ușor și clar și vizibilitatea bună asigură o poziționare precisă, precum și un control optim în timpul procedurii.

Repoziționabil până la 90% din lungime.




Vizibilitate bună

Conceptul markerului radiopac

Marker pentru firul de transport distal
pentru controlul constant al vârfului firului de transport în timpul procedurii

Trei markere distale/proximal ale dispozitivului
pentru control suplimentar al poziției stentului și al comportamentului de deschidere

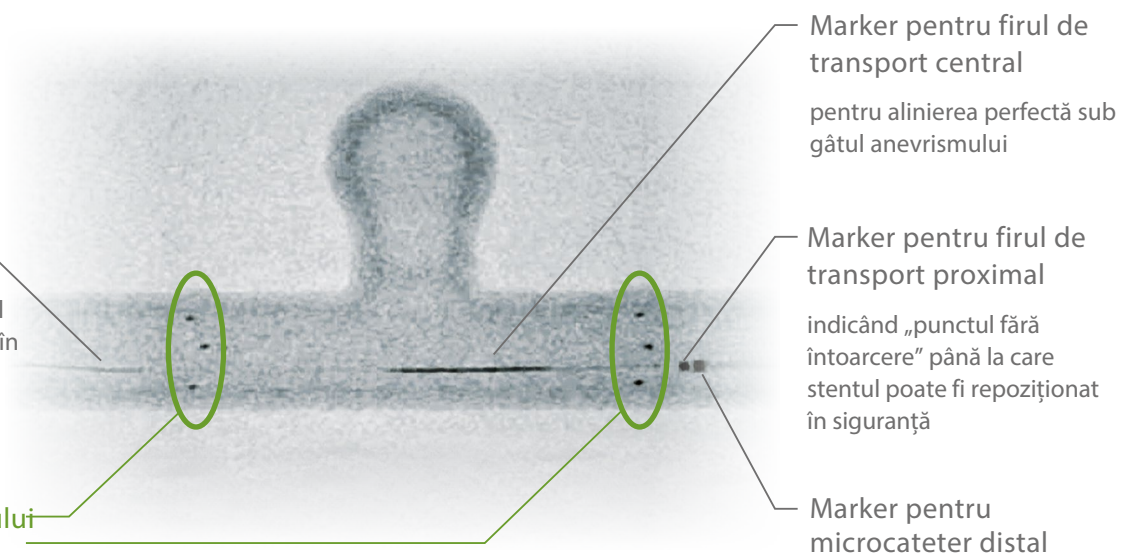

¹ Goertz, L. și colab. (2019): Rezultatele angiografice pe termen lung ale stentului Acandis Acclino cu profil redus pentru tratamentul anevrismelor intracraniene. Un studiu multicentric. Neuroradiologie clinică, 2019
² Brassel, F. și colab. (2016): Tratamentul endovascular al anevrismelor intracraniene complexe folosind stenturile Acandis Acclino. Journal of NeuroInterventional Surgery, 2017, 9 (9), S. 854–859

ORDERING INFORMATION | ACCLINO® flex plus

Dimensiuni etichetate ACCLINO® flex plus	Număr de referință	Diametrul stentului (mm)	Lungimea stentului (mm)	Diametrul vasului recomandat (mm)	Catetere recomandate (obligatorii) pentru livrare (inci)
HRF	3.0 × 15	01-001122	3.0	15	1.5 – 2.5
	3.0 × 20	01-001123	3.0	20	1.5 – 2.5
	3.0 × 25	01-001124	3.0	25	1.5 – 2.5
	3.0 × 30	01-001125	3.0	30	1.5 – 2.5
	3.0 × 35	01-001126	3.0	35	1.5 – 2.5
	3.5 × 15	01-001132	3.5	15	1.5 – 3.0
	3.5 × 20	01-001133	3.5	20	1.5 – 3.0
	3.5 × 25	01-001134	3.5	25	1.5 – 3.0
	3.5 × 30	01-001135	3.5	30	1.5 – 3.0
	3.5 × 35	01-001136	3.5	35	1.5 – 3.0
HRF	4.0 × 15	01-001142	4.0	15	2.5 – 3.5
	4.0 × 20	01-001143	4.0	20	2.5 – 3.5
	4.0 × 25	01-001144	4.0	25	2.5 – 3.5
	4.0 × 30	01-001145	4.0	30	2.5 – 3.5
	4.0 × 35	01-001146	4.0	35	2.5 – 3.5
	4.5 × 15	01-001152	4.5	15	2.5 – 4.0
	4.5 × 20	01-001153	4.5	20	2.5 – 4.0
	4.5 × 25	01-001154	4.5	25	2.5 – 4.0
	4.5 × 30	01-001155	4.5	30	2.5 – 4.0
	4.5 × 35	01-001156	4.5	35	2.5 – 4.0
HRF	5.0 × 15	01-001162	5.0	15	3.0 – 4.5
	5.0 × 20	01-001163	5.0	20	3.0 – 4.5
	5.0 × 25	01-001164	5.0	25	3.0 – 4.5
	5.0 × 30	01-001165	5.0	30	3.0 – 4.5
	5.0 × 35	01-001166	5.0	35	3.0 – 4.5
	5.5 × 20	01-001173	5.5	20	3.5 – 5.0
	5.5 × 25	01-001174	5.5	25	3.5 – 5.0
	5.5 × 30	01-001175	5.5	30	3.5 – 5.0
	5.5 × 35	01-001176	5.5	35	3.5 – 5.0
	6.5 × 20	01-001193	6.5	20	4.0 – 6.0
	6.5 × 25	01-001194	6.5	25	4.0 – 6.0
	6.5 × 30	01-001195	6.5	30	4.0 – 6.0
	6.5 × 35	01-001196	6.5	35	4.0 – 6.0
HRF	8.0 × 20	01-001213	8.0	20	6.0 – 7.0
	8.0 × 30	01-001215	8.0	30	6.0 – 7.0
	8.0 × 40	01-001217	8.0	40	6.0 – 7.0
	8.0 × 60	01-001221	8.0	60	6.0 – 7.0

NeuroSlider® 17
NeuroSlider® 17 DLC
(ID: 0.0165 – 0.017)

NeuroSlider® 21
NeuroSlider® 21 DLC
(ID: 0.021)

NeuroSlider® 27
NeuroSlider® 27 DLC
(ID: 0.027)

HRF: Forță radială ridicată – în comparație cu ACCLINO® flex plus Stenturi în același diametru recomandat de vas.

Toate modificările sau modificările, fie ele tehnice sau de altă natură, sau modificările în disponibilitatea produselor sunt expres rezervate. Vă rugăm să contactați reprezentantul local Acandis® pentru disponibilitatea produsului și informații despre (micro)catetere compatibile. Nu este disponibil spre vânzare în Statele Unite.

CE 0297