


DERIVO® 2

Dispozitiv de embolizare

- » Portofoliu larg pentru diametre de vase de la 1,5 la 8,0 mm
- » Compatibil cu (micro)catetere ID 0,0165" – 0,039"
- » Vizibilitate de vârf în clasa și apozitia peretelui navei

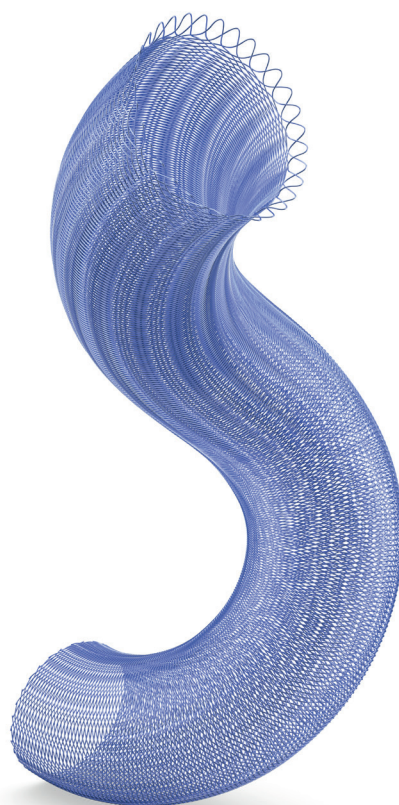


DERIVO® 2

Dispozitiv de embolizare

Tehnologie dovedită combinată cu design sofisticat pentru cel mai bun efect de deviere a fluxului

Vizibilitatea de vârf a
conturului și forme
dispozitivului datorită firelor
compozite de nitinol cu
proporție mai mare de platină.*

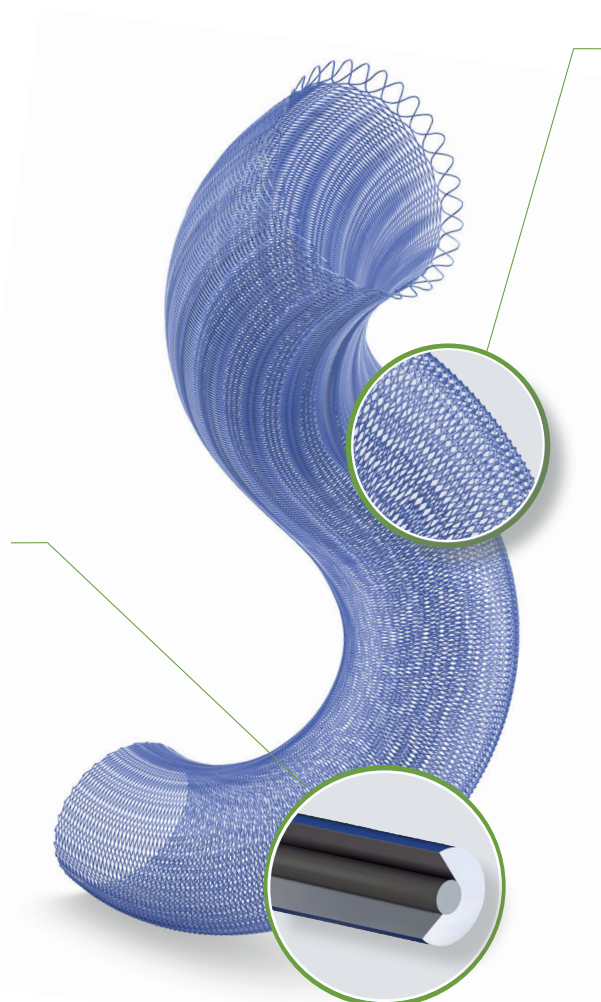

Finisajul de suprafață BlueXide®,
proprietar Acandis®, urmărește să
optimizeze biocompatibilitatea și
să faciliteze livrarea stentului.

* Comparativ cu dispozitivul de embolizare DERIVO® și DERIVO® mini

Design sofisticat


Potrivirea perfectă a parametrilor
de proiectare (unghiul de împletire,
grosimea firului și numărul de fire)
pentru fiecare dispozitiv asigură...

- Comportament perfect de deschidere
- Adaptabilitate optimă a peretelui vasului
- Cea mai mare flexibilitate
- Forța radială echilibrată
- Porozitate omogenă (~ 70 %)
- Cel mai bun efect de deviere a fluxului în
tratament - aproape personalizat

Portofoliu larg

Variatatea largă de dimensiuni
permite tratarea diametrelor
vaselor de la 1,5 la 8,0 mm cu
microcatetere ID 0,0165" – 0,039".

Cu lungimi ale dispozitivului de la
10 mm până la 50 mm (în funcție
de diametrul dispozitivului) și
diferite configurații ale cablurilor
de transport, dispozitivul de
embolizare DERIVO® 2 este potrivit
pentru diferite situații anatomice.

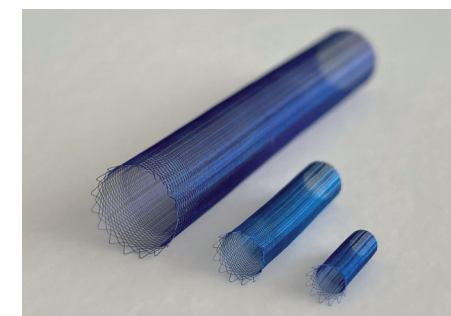

Dispozitiv de embolizare DERIVO® 2

Cea mai mare adaptabilitate Cea mai mare precizie

Capătul închis atraumatic împreună cu un capăt
deschis, cu un unghi de împletire constant, asigură
o desfășurare fiabilă și ușoară, precum și o apunere
optimă a peretelui.

Designul de împletitură ajustat optim asigură o
porozitate omogenă pentru cel mai bun efect de
deviere a fluxului, precum și o bună apunere a
peretelui vasului, chiar și în diametrele vaselor
foarte variabile și în anatomii sinuoase.


Oferim ajutorul nostru în pregătirea
cazurilor în anatomii complexe și
provocatoare.

Cu o simulare de dimensionare 3D,
asistăm medicii să aleagă dimensiunea
optimă a dispozitivului înainte de
tratament.

Dispozitivul de embolizare DERIVO® 2 este
repoziționabil până la 90 % din lungimi
pentru o plasare precisă și sigură a
dispozitivului.



Flexibilitate excelentă și adaptabilitate a pereților vasului

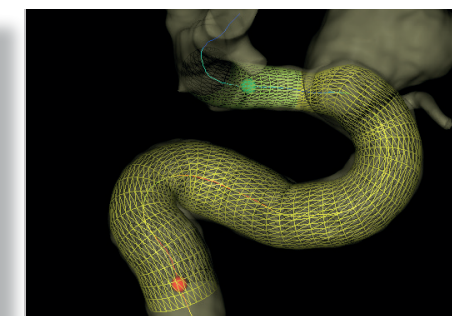


Simularea dispozitivului de embolizare DERIVO® 2

Conceptul de Marker Radioopac

Fire compozite de
nitinol radioopace

pentru vizualizarea perfectă a
întregul contur și forma dispozitivului

Punct de atașare suplimentar

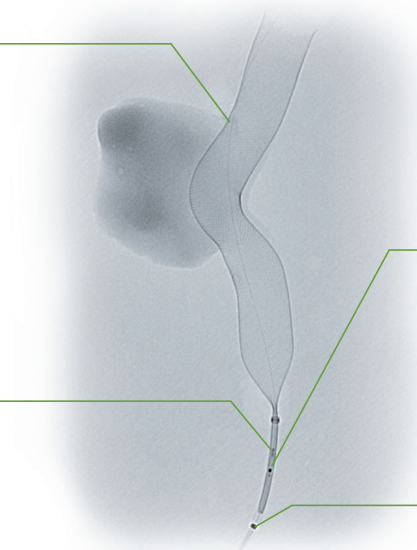

Marker pentru firul de ghidare
distal

indicând „punctul fără întoarcere” până
la care dispozitivul poate fi repoziționat
în siguranță

Marker pentru firul de ghidare
proximal

INFORMAȚII DE COMANDĂ | DERIVO® 2

Dimensiuni etichetate DERIVO® 2 (mm)	Număr de referință	Diametrul dispozitivului (mm)	Lungimea dispozitivului (mm)	Diametrul recomandat al vasului (mm)	Catetere recomandate (obligatorii) pentru livrare (inci)
2.5 × 10	01-107001	2.5	10	1.5 – 2.5	NeuroSlider® 17 DLC (ID: 0,0165 – 0,017)
2.5 × 15	01-107002	2.5	15	1.5 – 2.5	
2.5 × 20	01-107003	2.5	20	1.5 – 2.5	
3.0 × 10	01-107005	3.0	10	2.0 – 3.0	
3.0 × 15	01-107006	3.0	15	2.0 – 3.0	
3.0 × 20	01-107007	3.0	20	2.0 – 3.0	
3.0 × 25	01-107008	3.0	25	2.0 – 3.0	
3.5 × 10	01-107009	3.5	10	2.5 – 3.5	
3.5 × 15	01-107010	3.5	15	2.5 – 3.5	
3.5 × 20	01-107011	3.5	20	2.5 – 3.5	
3.5 × 25	01-107012	3.5	25	2.5 – 3.5	
3.5 × 30	01-107013	3.5	30	2.5 – 3.5	NeuroSlider® 27 NeuroSlider® DLC (ID: 0.027)
3.5 × 40	01-107035	3.5	40	2.5 – 3.5	
4.0 × 15	01-107014	4.0	15	3.0 – 4.0	
4.0 × 20	01-107015	4.0	20	3.0 – 4.0	
4.0 × 25	01-107016	4.0	25	3.0 – 4.0	
4.0 × 30	01-107017	4.0	30	3.0 – 4.0	
4.0 × 40	01-107039	4.0	40	3.0 – 4.0	
4.5 × 15	01-107018	4.5	15	3.5 – 4.5	
4.5 × 20	01-107019	4.5	20	3.5 – 4.5	
4.5 × 25	01-107020	4.5	25	3.5 – 4.5	
4.5 × 30	01-107021	4.5	30	3.5 – 4.5	
4.5 × 40	01-107043	4.5	40	3.5 – 4.5	
5.0 × 15	01-107022	5.0	15	4.0 – 5.0	
5.0 × 20	01-107023	5.0	20	4.0 – 5.0	
5.0 × 25	01-107024	5.0	25	4.0 – 5.0	
5.0 × 30	01-107025	5.0	30	4.0 – 5.0	
5.0 × 40	01-107047	5.0	40	4.0 – 5.0	
5.0 × 50	01-107048	5.0	50	4.0 – 5.0	
5.5 × 15	01-107026	5.5	15	4.5 – 5.5	
5.5 × 20	01-107027	5.5	20	4.5 – 5.5	
5.5 × 25	01-107028	5.5	25	4.5 – 5.5	
5.5 × 30	01-107029	5.5	30	4.5 – 5.5	
5.5 × 40	01-107052	5.5	40	4.5 – 5.5	
5.5 × 50	01-107053	5.5	50	4.5 – 5.5	
6.0 × 15	01-107030	6.0	15	5.0 – 6.0	
6.0 × 20	01-107031	6.0	20	5.0 – 6.0	
6.0 × 25	01-107032	6.0	25	5.0 – 6.0	
6.0 × 30	01-107033	6.0	30	5.0 – 6.0	
6.0 × 40	01-107057	6.0	40	5.0 – 6.0	
6.0 × 50	01-107058	6.0	50	5.0 – 6.0	
7.0 × 20	01-107059	7.0	20	6.0 – 7.0	NeuroSlider® 39 DLC (ID: 0.039)
7.0 × 25	01-107060	7.0	25	6.0 – 7.0	
7.0 × 30	01-107061	7.0	30	6.0 – 7.0	
7.0 × 40	01-107068	7.0	40	6.0 – 7.0	
7.0 × 50	01-107069	7.0	50	6.0 – 7.0	
8.0 × 20	01-107062	8.0	20	7.0 – 8.0	
8.0 × 25	01-107063	8.0	25	7.0 – 8.0	
8.0 × 30	01-107064	8.0	30	7.0 – 8.0	
8.0 × 40	01-107073	8.0	40	7.0 – 8.0	
8.0 × 50	01-107074	8.0	50	7.0 – 8.0	

Toate modificările sau modificările, fie ele tehnice sau de altă natură, sau modificările în disponibilitatea produselor sunt expres rezervate. Vă rugăm să contactați reprezentantul local Acandis® pentru informații despre (micro)catetere compatibile. Nu este disponibil spre vânzare în Statele Unite.

CE 0297