


DERIVO® peripher Dispozitiv de embolizare

- » Oferă noi opțiuni de tratament
- » Cea mai mare flexibilitate
- » Sistem de livrare mic
- » Vizibilitate excelentă

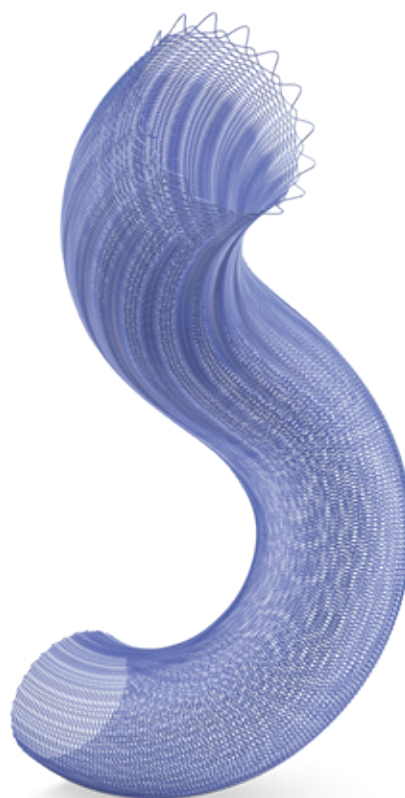

DERIVO® peripher


Dispozitiv de embolizare

Acest deviator de flux oferă noi opțiuni de tratament endovascular pentru anevrismele periferice și viscerale.

Deviatoarele de flux sunt proiectate pentru a lamina fluxul de sânge în vasul părinte pentru a reduce viteza fluxului și pentru a duce la embolizarea anevrismului. Acționează ca o schelă pentru proliferarea neointimală, menținând în același timp permeabilitatea ramurilor laterale.




prof. dr. Elmar Spüntrup,
Spitalul Saarbrücken gGmbH, Germania

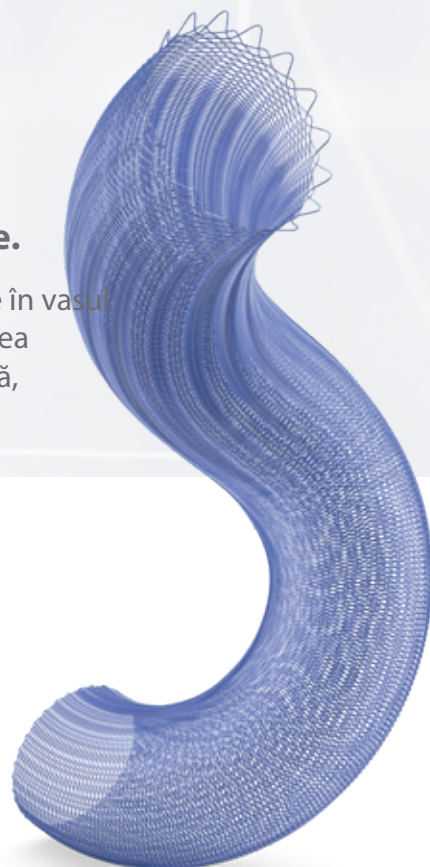


// Deviatorul de flux periferic DERIVO® este o extensie importantă a tratamentului anevrismului arterei viscerale. Permite tratamentul anatomiilor dificile, care nu ar putea fi tratate fără riscul ridicat de ocluzie a vasului. Nu sunt disponibile alte opțiuni de tratament pentru anevrisme așa cum este descris în raportul de caz. Reconstrucția unui gât larg este posibilă cu un deviator de flux. Anatomia sinuoasă poate fi tratată cu un deviator de flux fără riscul de stenoza prin îndoire. Un alt aspect pozitiv al utilizării unui deviator de flux este faptul că se poate obține perfuzie. Performanța, vizibilitatea și efectul de deviere a fluxului sunt la fel de bune ca produsele intracraniene. Experiența în aplicarea intracraniană poate fi de ajutor în utilizarea periferică. //

Tratament cu dispozitivul de embolizare periferică DERIVO®¹

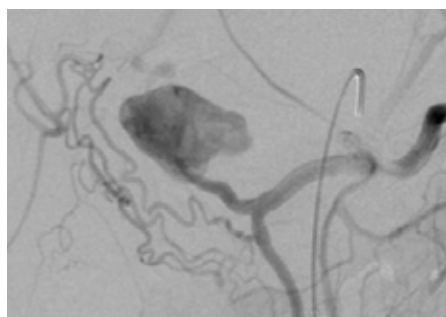

Pretratament - Anevrișm de arteră hepatică

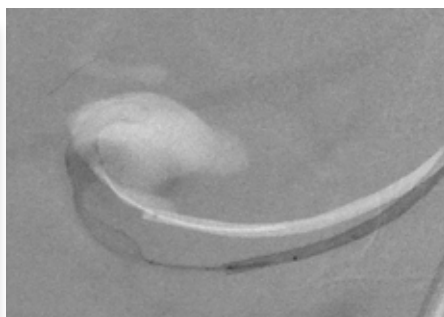

Desfășurarea dispozitivului de embolizare periferică DERIVO® 5,0 x 30 mm



Post-tratament - Rezultat după instalarea dispozitivului de embolizare periferică DERIVO® 5,0 x 30 mm și bobinaj suplimentar

¹ Imaginile sunt oferite de Prof. Dr. Elmar Spüntrup, Spitalul Saarbrücken gGmbH, Germania

² Imaginile sunt oferite de Prof. Dr. Peter Minko, Spitalul Universitar Düsseldorf, Germania


³ Semeraro V. et al. (2022): Tratamentul cu devierea fluxului pentru anevrismele arterei renale: urmărirea de un an a unei experiențe preliminare multicentrice. Diagn Interv Radiol. 2022; 28(6):609-615

Sistem de livrare mic

Compatibilitatea cu sisteme de livrare mici și flexibile (0,027" – 0,039" ID) permite tratarea anatomiilor sinuoase și anevrisme localizate distal.

Vizibilitate excelentă

Vizibilitatea excelentă a conturului și formei dispozitivului datorită firelor compozite cu nitinol.²

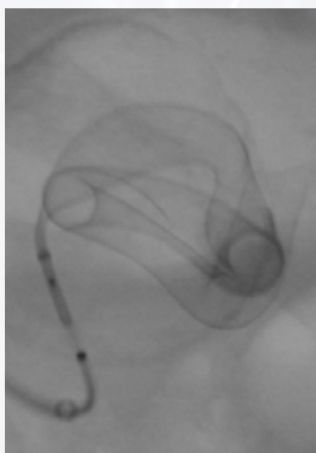

Finisarea suprafeței BlueXide®


Finisajul de suprafață BlueXide®, proprietar Acandis, urmărește să optimizeze biocompatibilitatea și să faciliteze livrarea dispozitivului.

Conceptul markerului radiopac

Fire compozite de nitinol radioopace

pentru vizualizarea perfectă a întregului contur și formă a dispozitivului

Punct de atașare suplimentar

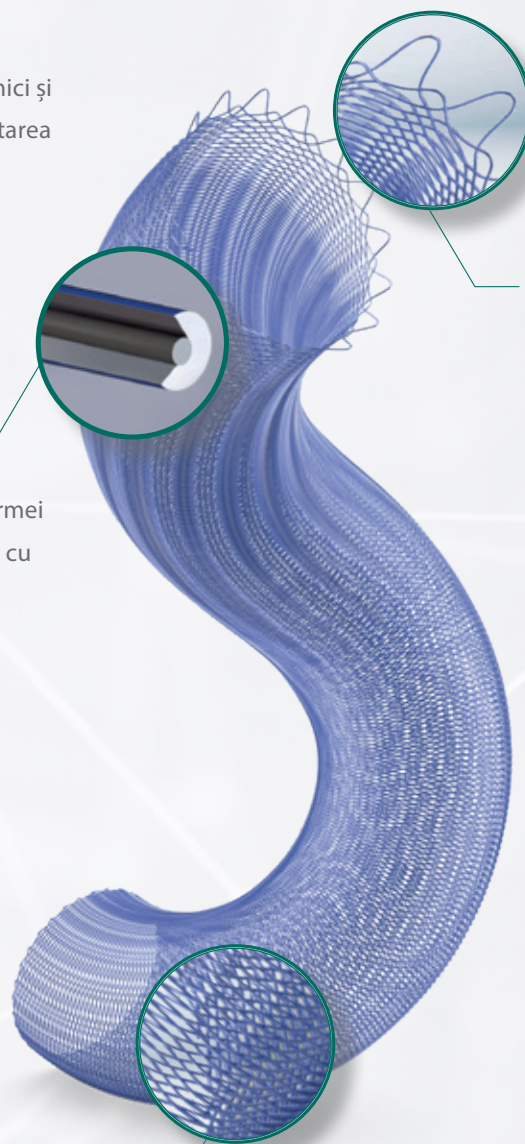

Capăt distal lărgit

Capătul distal lărgit cu bucle de sârmă închise permite o apunere perfectă și atraumatică a peretelui, precum și o poziționare precisă datorită ancorării stabile în vasul pulsatil.

Porozitate echilibrată

Porozitatea optimă echilibrată permite tratarea arterei anevrismale de la nivelul gâtului, păstrând în același timp permeabilitatea ramurilor laterale și evitând riscul de ruptură accidentală asociat cu manevrele intrasaculare.³


Suport clinic

Acandis® oferă un serviciu individual de asistență pentru dimensionare, precum și instruire practică cu modelul de silicon specific pacientului și dispozitivul de embolizare periferic DERIVO® selectat, în pregătirea pentru intervenția planificată.

Marcator distal pentru firul de transport

indicând „punctul fără întoarcere” până la care dispozitivul poate fi repositionat în siguranță

Marcator proximal pentru firul de transport

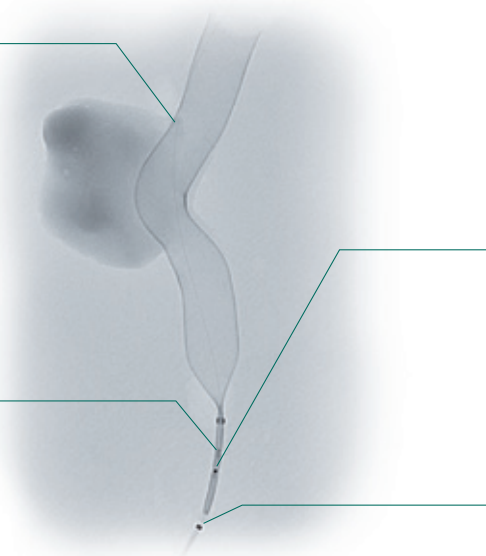

INFORMAȚII DE COMANDĂ | DERIVO® peripher

Dimensiuni periferice etichetate DERIVO® (mm)	Număr de referință	Diametrul dispozitivului (mm)	Lungimea dispozitivului (mm)	Utilizare prevăzută Diametrul vasului (mm)	Catetere recomandate (obligatorii) pentru livrare (inci)
5.0 × 15	01-102310	5.0	15	4.0 – 5.0	NeuroSlider® 27 NeuroSlider® 27 DLC (ID: 0.027)
5.0 × 20	01-102311	5.0	20	4.0 – 5.0	
5.0 × 25	01-102312	5.0	25	4.0 – 5.0	
5.0 × 30	01-102313	5.0	30	4.0 – 5.0	
5.0 × 40	01-102363	5.0	40	4.0 – 5.0	
5.0 × 50	01-102364	5.0	50	4.0 – 5.0	
5.5 × 15	01-102410	5.5	15	4.5 – 5.5	
5.5 × 20	01-102411	5.5	20	4.5 – 5.5	
5.5 × 25	01-102412	5.5	25	4.5 – 5.5	
5.5 × 30	01-102413	5.5	30	4.5 – 5.5	
5.5 × 40	01-102463	5.5	40	4.5 – 5.5	
5.5 × 50	01-102464	5.5	50	4.5 – 5.5	
6.0 × 15	01-102510	6.0	15	5.0 – 6.0	
6.0 × 20	01-102511	6.0	20	5.0 – 6.0	
6.0 × 25	01-102512	6.0	25	5.0 – 6.0	
6.0 × 30	01-102513	6.0	30	5.0 – 6.0	
6.0 × 40	01-102563	6.0	40	5.0 – 6.0	
6.0 × 50	01-102564	6.0	50	5.0 – 6.0	
7.0 × 20	01-102514	7.0	20	6.0 – 7.0	NeuroSlider® 39 DLC (ID: 0.039)
7.0 × 25	01-102515	7.0	25	6.0 – 7.0	
7.0 × 30	01-102516	7.0	30	6.0 – 7.0	
7.0 × 40	01-102568	7.0	40	6.0 – 7.0	
7.0 × 50	01-102569	7.0	50	6.0 – 7.0	
8.0 × 20	01-102519	8.0	20	7.0 – 8.0	
8.0 × 25	01-102520	8.0	25	7.0 – 8.0	
8.0 × 30	01-102521	8.0	30	7.0 – 8.0	
8.0 × 40	01-102573	8.0	40	7.0 – 8.0	
8.0 × 50	01-102574	8.0	50	7.0 – 8.0	

Toate modificările sau modificările, fie ele tehnice sau de altă natură, sau modificările în disponibilitatea produselor sunt expres rezervate. Vă rugăm să contactați reprezentantul local Acandis® pentru disponibilitatea produsului și informații despre (micro)catetere compatibile. Nu este disponibil spre vânzare în Statele Unite.

CE 0297